


## سیستم آنالیز پوست هوشمند

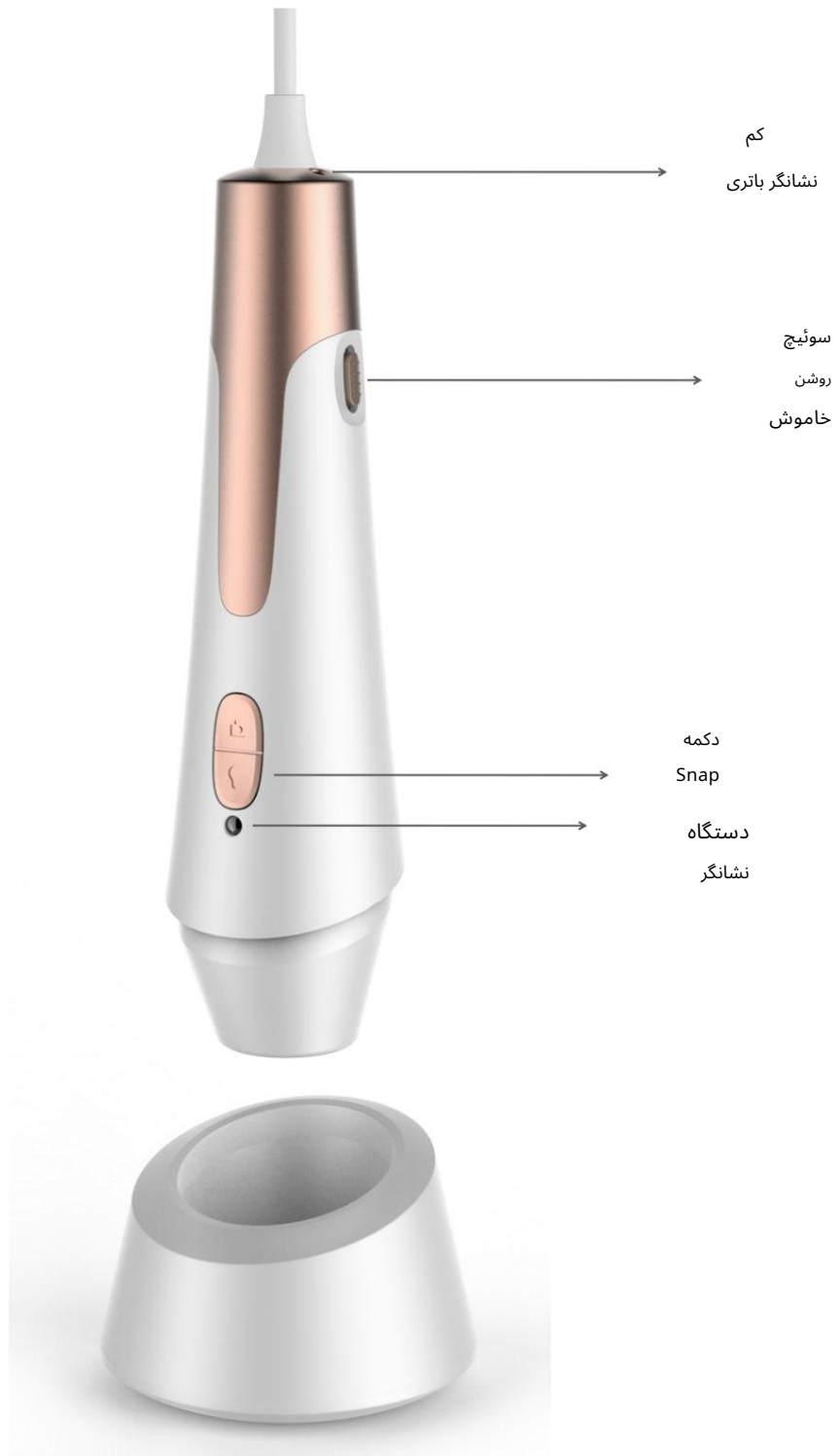

## مقدمه

آنالیز پوست اتوماتیک با طیف سه رنگ که اپیدرم را تجزیه و تحلیل می کند (نور قرمز)، چرم (سبز روشن) و منافذ UV (بنفش روشن). مجهز به آنالیز پوست حرفه ای است نرم افزاری برای کمک به پزشکان یا آرایشگران و متخصصان بهداشت، مشاهده و تحلیل مصرف کننده پوست. وضعیت سلامت، و می تواند گزارش تجزیه و تحلیل خودکار پوست را ذخیره کند، به مصرف کنندگان کمک می کند به طور مستقیم و سریع سلامت پوست خود را درک کنند.

محصولات مورد استفاده در سالن های زیبایی، نمایندگی های زنجیره ای زیبایی، فروش توزیع لوازم آرایش، زیبایی فروش توزیع محصولات، فروش توزیع محصولات مراقبت از پوست، توزیع محصولات بهداشتی فروش، خودآزمایی شخصی و خانوادگی و غیره! انتخاب یک آنالیز پوست آرایشی مناسب می تواند بهبود پایه علمی تجزیه و تحلیل، کیفیت خدمات و کارایی کار، دادن مصرف کنندگان تجربه بهتری دارند.

سیستم اندروید آنالیز پوست اتوماتیک طیف سه رنگ حرفه ای، می تواند تجزیه و تحلیل خودکار 6 داده اصلی پوست: 1. رنگ پوست، 2. تعادل، 3. W/O، چین و چروک، 4. التهاب، 5. حساسیت، 6. منافذ.

آنالیز پوست اتوماتیک طیف سه رنگ حرفه ای به FullFace و مجرد. FullFace برای تشخیص چهره به شش قسمت تقسیم می شود: با توجه به صدای هوشمند سریع، تشخیص پیشانی، ناحیه چشم، گونه چپ، بینی، گونه راست، بینی. مجرد ثابت است چهره تشخیص نقطه در یک قسمت، پس از فشار دادن دکمه دوربین، 3 تصویر پوست (پوست، چرم، منافذ UV) به طور خودکار گرفته می شود. هنگام گرفتن عکس به صورت خودکار، لطفا مراقب باشید برای حرکت آشکارساز

می توان از سیستم آنالیز خودکار پوست با طیف سه رنگ حرفه ای استفاده کرد تجزیه و تحلیل حرفه ای پوست، که بسیار راحت است. به منظور معرفی این محصول در جزئیات بیشتر، لطفا برای خواندن معرفی محصول، روش استفاده و اقدامات احتیاطی صبور باشید.

توجه: 1. هنگامی که نشانگر کم بودن باتری در انتهای آشکارساز به سرعت چشمک می زند، نشان می دهد که محصول کم است برای شارژ باید سوئیچ را روی OFF قرار دهید.  
2. هنگامی که آزمایش برای مدت طولانی انجام نمی شود، لطفا سوئیچ را در حالت OFF قرار دهید و سپس برای صرفه جویی در مصرف باتری، ردیاب را از تیلت گوشی جدا کنید.

## فهرست مطالب

معرفی محصول	2
مشخصات محصول	*
اقدامات احتیاطی قبل از استفاده	5
سیستم آنالیز پوست اندروید دانلود و نصب کنید	6
معرفی عملکرد جانبی سیستم آنالیز پوست	12
دانلود و نصب کامپیوتر سیستم آنالیز پوست	20
معرفی عملکرد سمت کامپیوتر سیستم آنالیز پوست	25

## مشخصات محصول

چیپ کنترل اصلی: DSP اصلی اختصاصی

بزرگنمایی: فوکوس ثابت 80X

عکس/فیلم: داخلی

منبع نور کمکی: 6 چراغ LED سفید، 6 چراغ LED بنفش UV

پیکسل: HD 2MP

وضوح استاتیک: پیش فرض 640\*480، سخت افزار 1200\*1600

فاصله تصویربرداری: فوکوس خودکار 0 میلی متر

پایه ثابت: پایه مخصوص

نرم افزار: HotSkin (سیستم آنالیز حرفه ای پوست)

سیستم پشتیبانی: Windows XP/Vista, Windows 7, Win8, Win 10, Android

روش اتصال: رابط USB

برق: USB (5V DC)

فریم های دینامیک: 30f/s زیر 600 LUX روشنایی

محدوده روشنایی: 30000LUX ~ 0کنترل از راه دور قابل تنظیم

زبان های پشتیبانی شده: انگلیسی (زبان های دیگر باید سفارشی شوند)

رنگ محصول: سفید مروارید + طلای محلی، رنگ های دیگر را می توان سفارشی کرد

اندازه بدنه: 158mm (L) \* 45mm (D)

## هشدارهای ایمنی و اقدامات احتیاطی

1. برای جلوگیری از نفوذ الکتریسیته ساکن به دقت، این محصول را جدا نکنید.

تراشه.2.

برای تمیز کردن محصول از حلال های آلی مانند الکل استفاده نکنید.

3. برای جلوگیری از خراشیدگی و کثیفی روی سطح، لنز را با انگشتان خود لمس نکنید.

4. از اتصال کوتاه در فضای باز در محیط های با دمای بالا و رطوبت بالا اجتناب کنید.

استفاده در فضای باز. این محصول عملکرد ضد آب ندارد، لطفاً از باران و آب اجتناب کنید.

5. محدوده دمایی استفاده و نگهداری این محصول:  $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$  رطوبت نسبی:

45% RH ~ 85% RH

6. اگر مواد خارجی یا رطوبت/مایع به طور تصادفی وارد محصول شد، بلافاصله

منبع تغذیه را قطع کرده و برای تعمیر به مرکز تعمیر بفرستید. خودتان به آن رسیدگی نکنید.

## توضیحات لوازم جانبی

آنالایزر پوست 1X

1X پایین نشستن ویژه

کتابچه راهنمای 1X

کابل آداپتور 2X

## ابتدا سیستم آنالیز پوست در سمت اندروید دانلود می شود.

1. لینک را در نوار آدرس گوشی اندرویدی یا مرورگر تبلت اندروید خود وارد کنید:  
<http://indmu.com/hot/hotskin.apk> دستورات روی صفحه را برای دانلود و نصب دنبال کنید  
نرم افزار HotSkin به طور مستقیم.
2. پس از نصب نرم افزار، دسکتاپ گوشی آیکون تجزیه و تحلیل بافت پوست را نمایش می دهد.




## دوم، سیستم تجزیه و تحلیل پوست ویژگی های نرم افزار اندروید

1. سوئیچ را روی "روشن" قرار دهید و ببینید که نشانگر دستگاه به رنگ قرمز روشن است که نشان می دهد آشکارساز روشن است، و سپس آشکارساز را به یک تلفن یا تبلت اندرویدی متصل کنید. سپس روی آن کلیک کنید



نماد "SkinAnalysis" روی دسکتاپ.


به صفحه اصلی نرم افزار بروید.

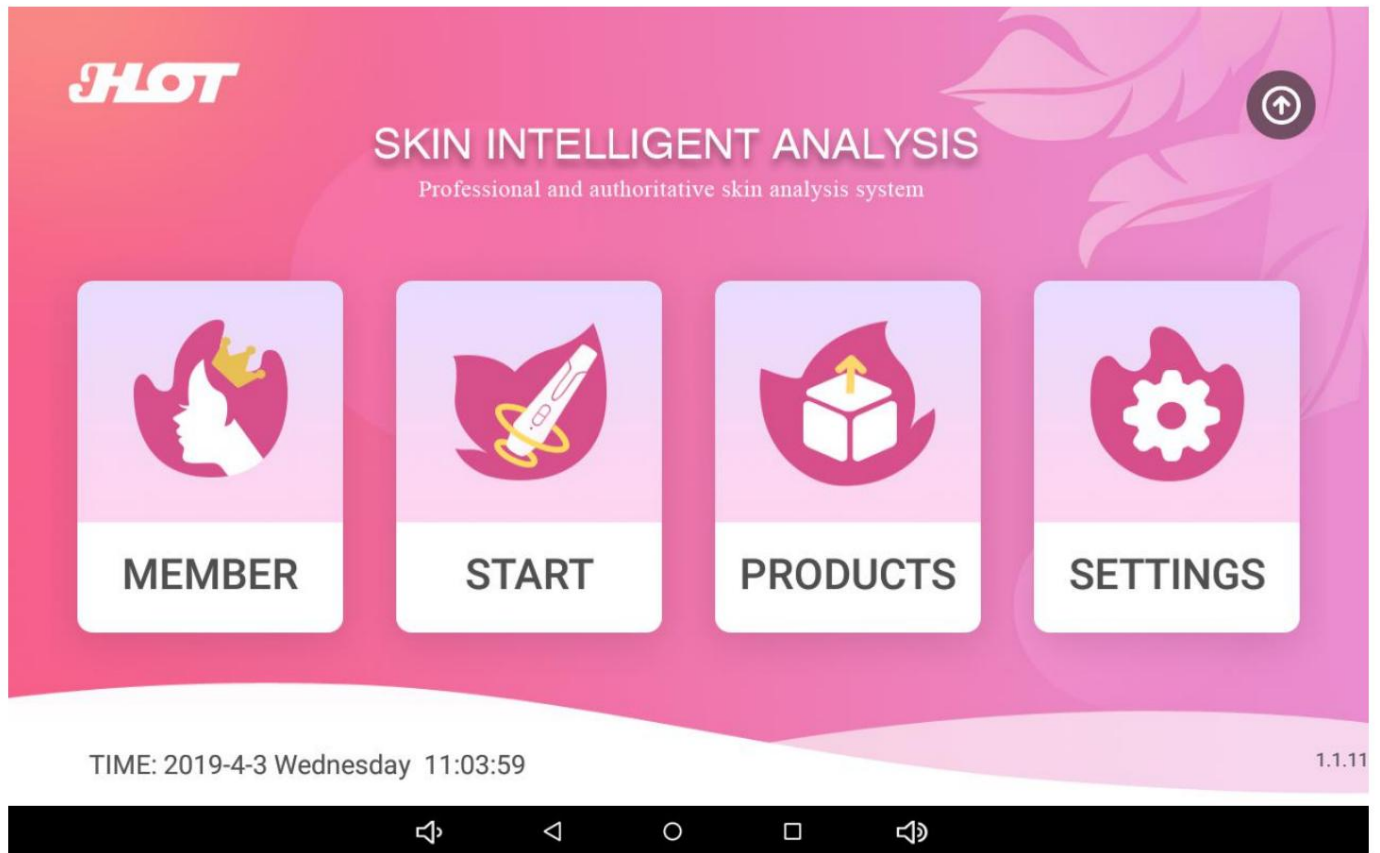


صفحه اصلی نرم افزار نمایش داده می شود: 1. Member 2. Start 3. Products 4. Settings. اگر متوجه شدید که فلش در گوشه سمت راست بالا "NEW" را نشان می دهد، برنامه به روز شده است، می توانید برای ارتقا خودکار روی فلش کلیک کنید. برنامه

2. روی عضو کلیک کنید، وارد رابط عضو شوید، روی نماد "+" در گوشه سمت راست بالا کلیک کنید.

برای افزودن یک کاربر جدید، مانند آرشیو کردن چندین کاربر، می‌توانید کاربران را با نام پیدا کنید

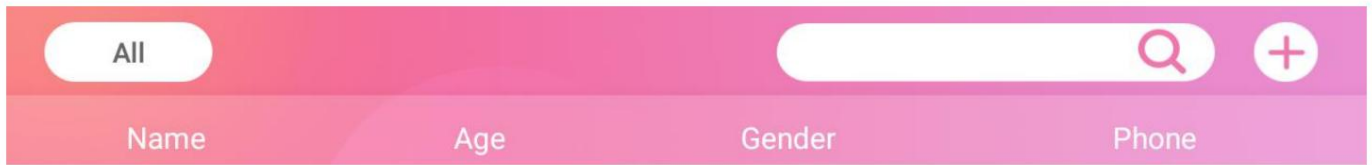

3. برای ورود به رابط کاربری جدید روی نماد "+" کلیک کنید.

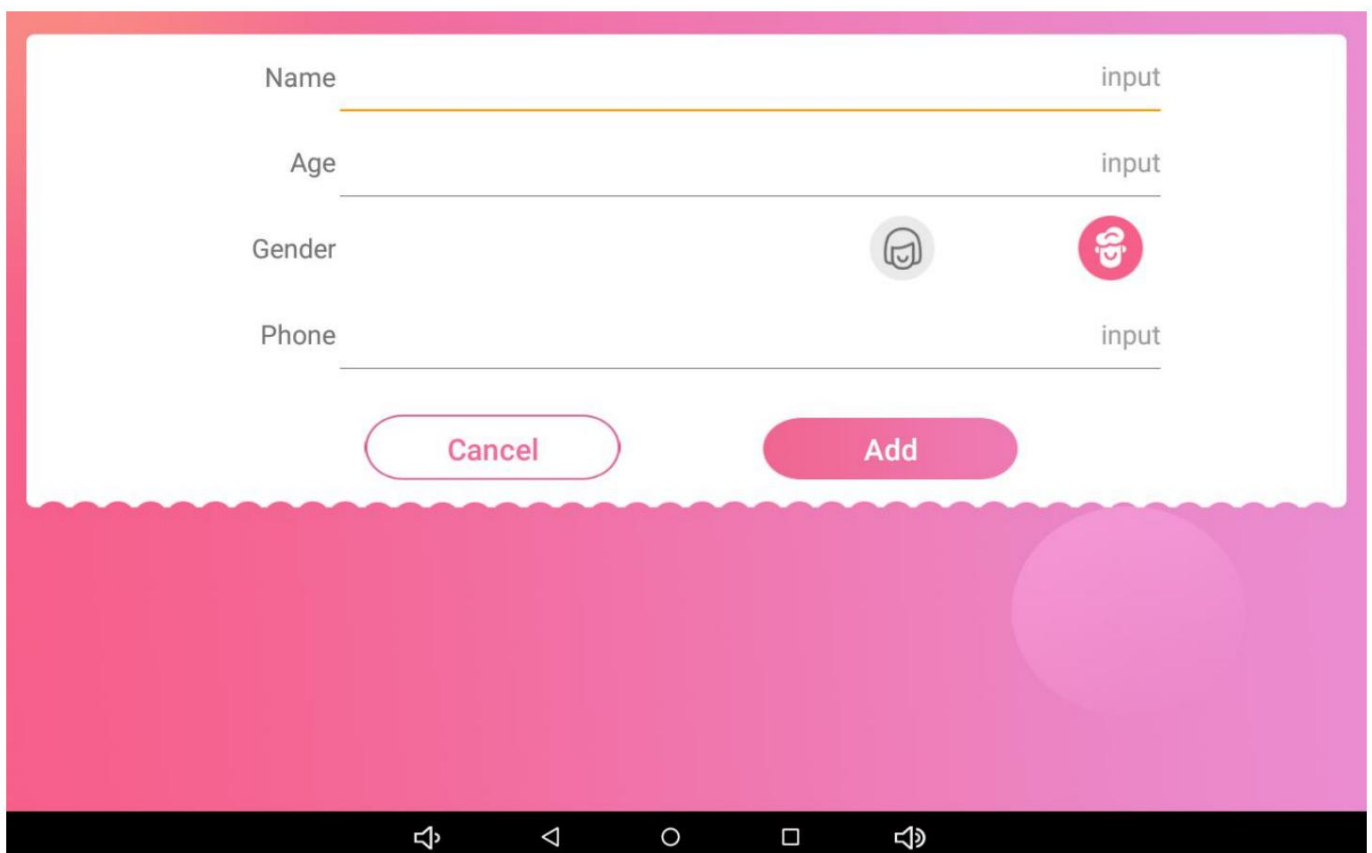

4. وارد پروفایل کاربری شوید و جنسیت کاربر را انتخاب کنید، روی دکمه افزودن کلیک کنید، کاربر اضافه می کند

با موفقیت، سپس نقطه کاربر را برای شروع انتخاب کنید

Name Lucy

Age 20

Gender

Phone 123456789

Cancel Add

5. برای ورود به محصول پیشنهادی روی محصول کلیک کنید، برای افزودن محصول جدید بر روی + کلیک کنید

All

please input name

name classification price effect

6. به رابط محصول جدید بروید، اطلاعات محصول را وارد کنید، تصویر محصول را اضافه کنید، انتخاب کنید اثر محصول، و سپس روی افزودن کلیک کنید، محصول با موفقیت اضافه شد.

name Skin care

classification Whitening

price 198

effect Whitening moisturizing


choose

Cancel Add

7. روی تنظیمات کلیک کنید، می توانید نتایج تجزیه و تحلیل و پیشنهادات بهبود را تغییر دهید.


SkinBrightness	Oil	Wrinkle	Inflammation	Spot	Pore
90 ~ 100	80 ~ 90	70 ~ 80	60 ~ 70	0 ~ 60	
<p><b>Result</b></p> <p>Normal skin color, no dark patches, please continue to maintain.</p> <p>Dark skin, it's time to check what's the reason.</p> <p>Darker skin. Please check what causes it as soon as possible.</p> <p>is already obvious facial dark color, this is the key period, if let alone,</p> <p>Dark face color is very deep, please intensive care.</p>					
<p><b>Suggestion</b></p> <p>We should recognize and distinguish the different types of dullness: sunlight exposure, hyperkeratosis, skin water</p> <p>Causes of dullness: excessive melanin deposition, oxidation of cuticle, accumulation of waste cuticle.</p> <p>Causes of dullness: excessive melanin deposition, oxidation of cuticle, accumulation of waste cuticle.</p> <p>dark care measures: if genetic causes, foundation and Concealer can also provide temporary emergency.</p> <p>regularly exfoliates, gives new horny display opportunities, replenishment and moisturizing skin, uses water replenishing facial</p>					
<p>organization name</p>				<p>SAVE</p>	

8. برای بایگانی پروفایل های کاربر، از نقطه رابط بایگانی شروع کنید.

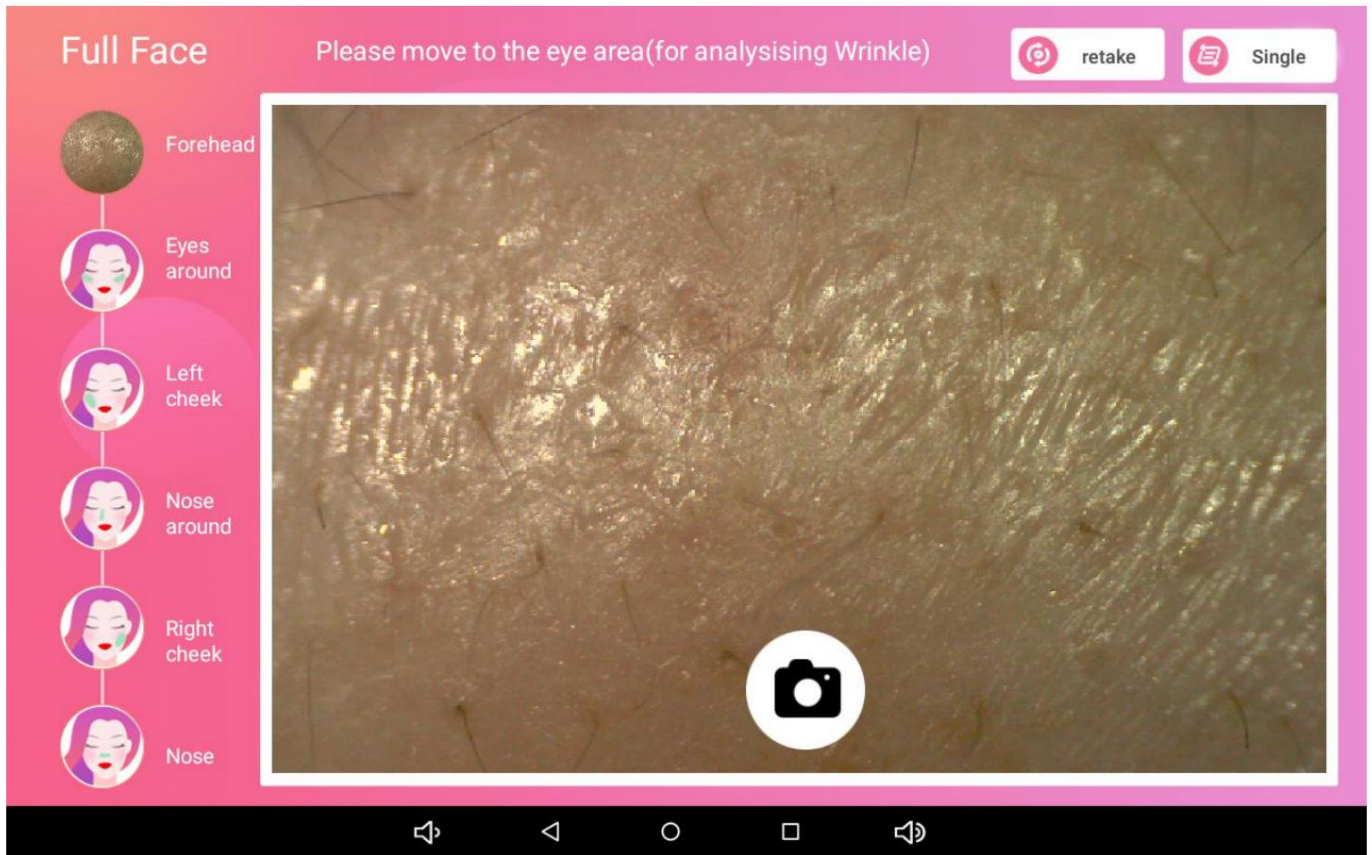

9. پیش فرض این است که وارد منطقه تشخیص عکسبرداری کامل صورت شوید و از 6 قسمت از صورت عکس بگیرید:

1. پیشانی، 2. دور چشم، 3. گونه چپ، 4. بینی، 5. گونه راست، 6. بینی

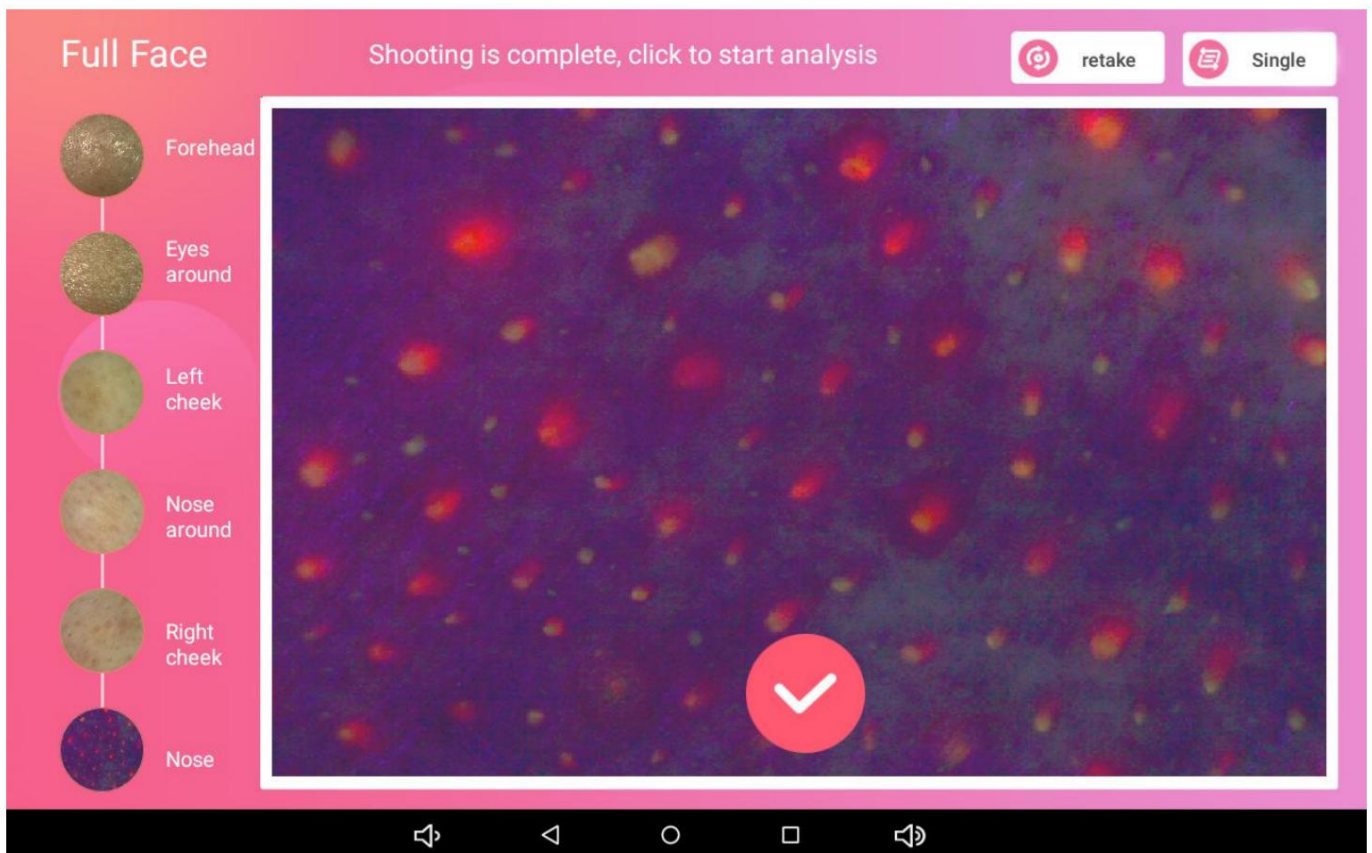


10. پس از گرفتن عکس، برای انجام آنالیز خودکار پوست برای مشاهده، روی علامت تیک کلیک کنید

نتایج گزارش جامع (شاخص داده های پوست و نتایج آزمایش و توصیه ها)، پرداخت

توجه به حساب عمومی وی چت، نتایج تجزیه و تحلیل را می توان با دوستان وی چت به اشتراک گذاشت یا به اشتراک گذاشت

به حلقه دوستان وی چت

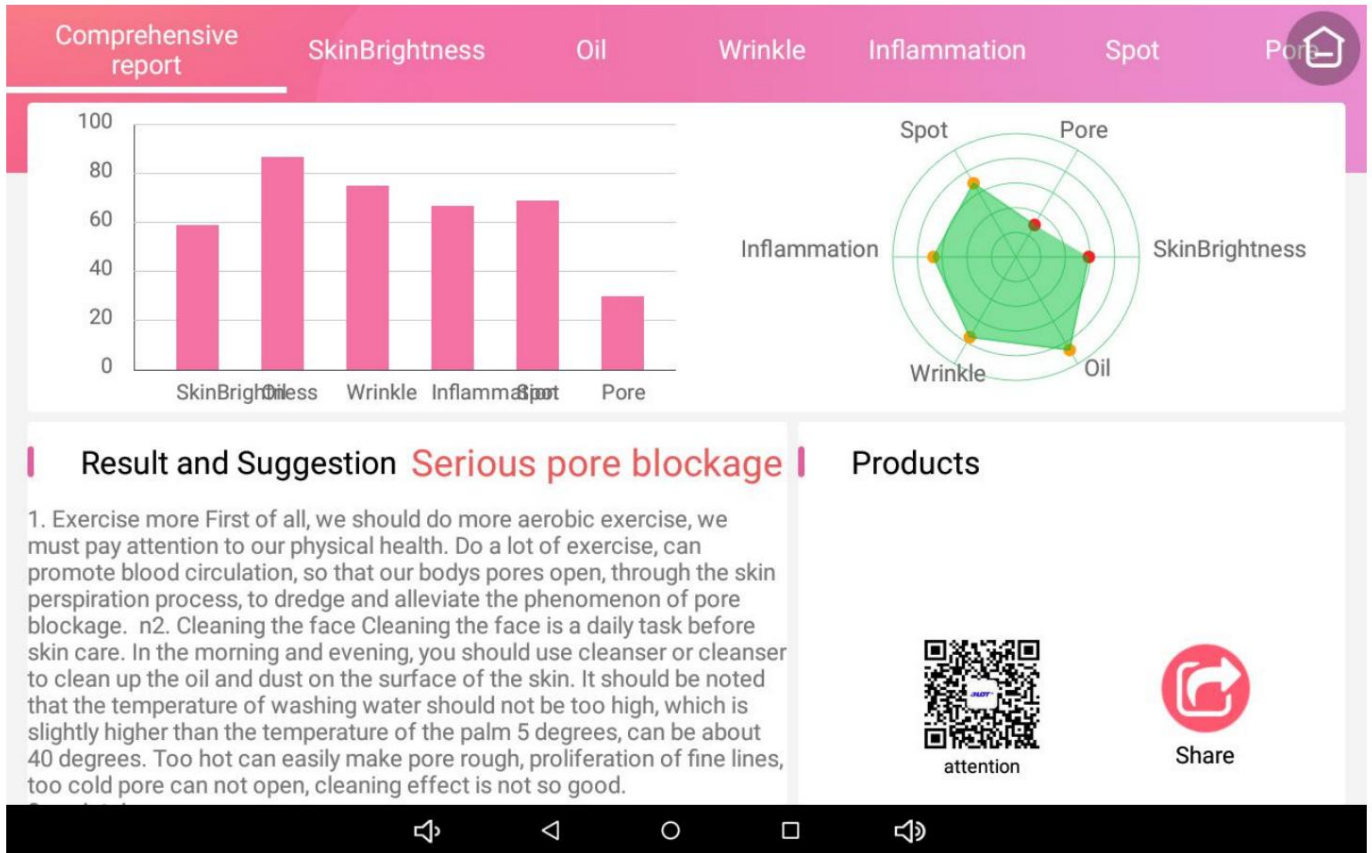

11. تجزیه و تحلیل یک آیتم تمام صورت را مشاهده کنید و نتایج تجزیه و تحلیل "SkinBrightness" را انتخاب کنید، روی آن کلیک کنید

برای بزرگنمایی لوگو می توانید تصویر را بزرگنمایی کنید تا تصویر را مشاهده کنید.

Comprehensive report SkinBrightness Oil Wrinkle Inflammation Spot

Item Score

59

darker

Normal skin Collected pictures Analysis picture

Result

is already obvious facial dark color, this is the key period, if let alone, it will not recover.

Products

Suggestion

dark care measures: if genetic causes, foundation and Concealer can also provide temporary emergency, proper massage, exfoliation, adequate sleep, and multi vitamin A diet.

attention Share

12. تجزیه و تحلیل یک مورد را به صورت کامل مشاهده کنید و نتایج "W/O balance" را انتخاب کنید

Comprehensive report SkinBrightness Oil Wrinkle Inflammation Spot

Item Score

87

healthy

Normal skin Collected pictures Analysis picture

Result

Your skin is full of moisture, please continue to maintain.

Products

Suggestion

water and oil balance maintenance strategy: replenishment mask is the most important, do not sun, do not frequent wash your face and use facial cleanser, regularly clean horny, diet should be light, choose the appropriate skin care products.

attention Share

13. تجزیه و تحلیل یک مورد تمام صورت را مشاهده کنید و نتایج "چروک" را انتخاب کنید

Comprehensive report SkinBrightness Oil **Wrinkle** Inflammation Spot

Item Score

75  
light

Normal skin Collected pictures Analysis picture

Result

Products

Suggestion

The way to reduce fine lines is to remember not to make exaggerated expressions, insist on facial massage, chew less chewing gum, compress fine lines with cold and hot, and use the correct wrinkle-removing cosmetology instrument.

attention Share

14. تجزیه و تحلیل یک مورد را به صورت کامل مشاهده کنید و نتایج "التهاب" را انتخاب کنید

Comprehensive report SkinBrightness Oil **Wrinkle** Inflammation Spot

Item Score

67  
moderate

Normal skin Collected pictures Analysis picture

Result

There are many red blood silk phenomena on the face. Please pay attention to it and pay attention to the nursing and maintenance.

Products

Suggestion

In daily facial maintenance, need to add red blood silk maintenance, or soon covered with face. Relevant methods have been prepared for you: no irritant ingredients for external use, pay attention to physical protection of the face, keep clean, eat more fruits and vegetables, avoid wind and sun, avoid frequent exfoliation

attention Share


15. تجزیہ و تحلیل یک مورد را به صورت کامل مشاهده کنید و نتایج "نقطه" را انتخاب کنید

Comprehensive report SkinBrightness Oil Wrinkle Inflammation **Spot** Pore


### Item Score

69


moderate



Normal skin



Collected pictures



Analysis picture


### Result

There are more spots on the skin. It's time to pay attention to the problem of lower stains.


### Products

### Suggestion

Before freckle removal, we should distinguish the causes of facial spots: genetic causes, ultraviolet radiation, endocrine causes, life habits.



attention



Share


16. تجزیہ و تحلیل یک آئتم تمام صورت را مشاهده کنید و نتایج "Pore" را انتخاب کنید

Comprehensive report SkinBrightness Oil Wrinkle Inflammation Spot Pore


### Item Score

30


severe



Normal skin

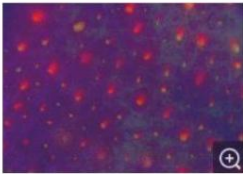

Collected pictures

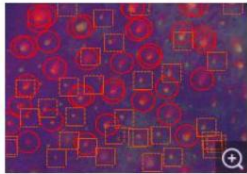

Analysis picture


### Result

Your skin pore blockage is serious, please continue to use the correct facial cleanser, otherwise easy to cause inflammation.


### Products

### Suggestion

deep cleansing: remove the makeup thoroughly every day, regularly exfoliate and put on face to prevent skin pores from blocking. Strengthen moisturizing: use moisturizing essence or moisturizing gel to prevent skin dryness and use skin care products that promote skin metabolism or strengthen the connective tissue of skin



attention




Share

17. روی نماد بزرگنمایی در گوشه سمت راست پایین تصویر پوست کلیک کنید تا نمای بزرگ شود.




18. در گوشه سمت راست بالای رابط تشخیص عکسبرداری تمام چهره، روی عکسبرداری تکی کلیک کنید تا

به تیراندازی تک نقطه ای بروید

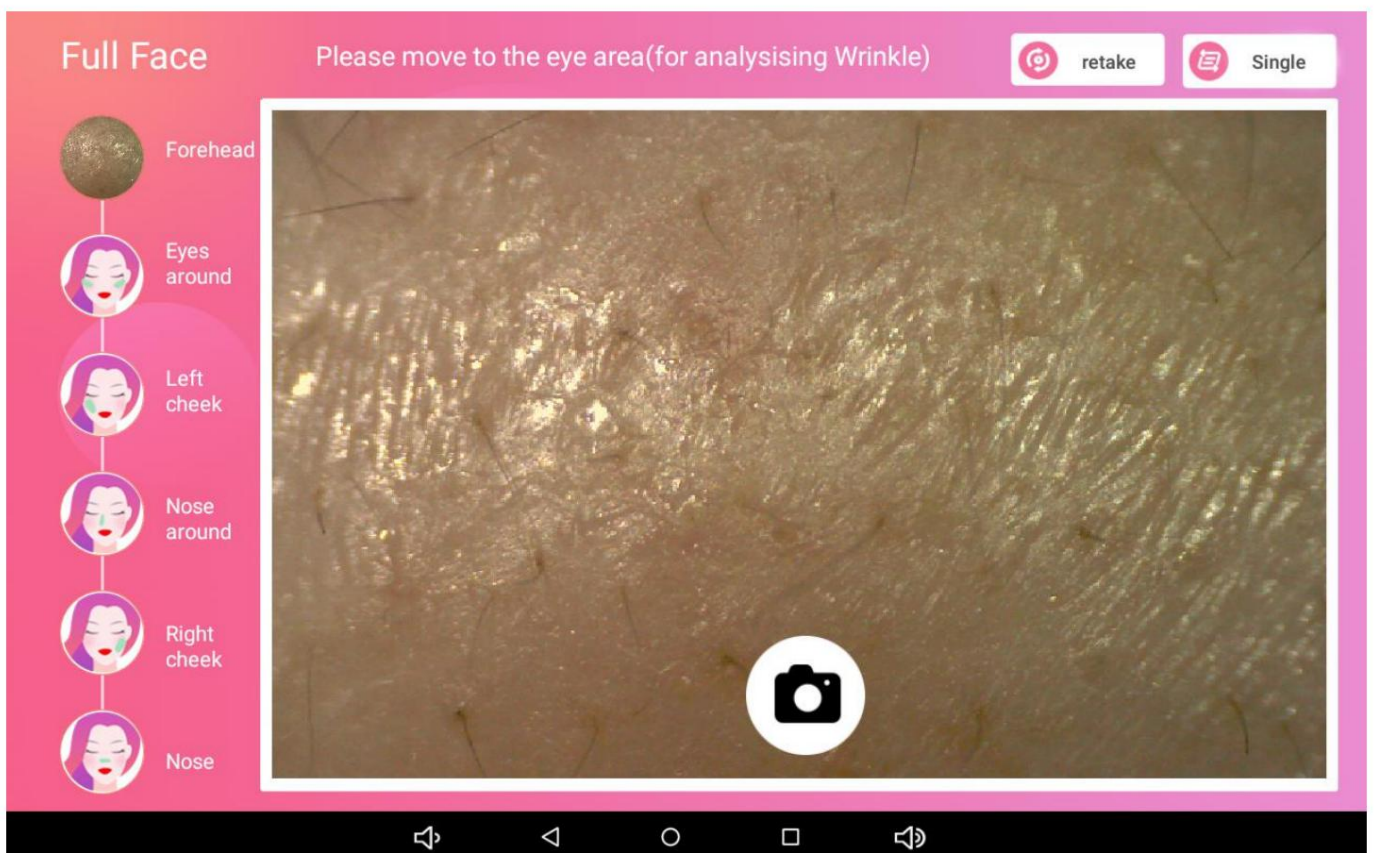


19. آنالایزر را به سمت قسمتی از صورت که باید شناسایی شود، بگیرید، به طور خودکار روی a فوکوس کنید

تصویر را پاک کنید، سپس روی دکمه دوربین کلیک کنید

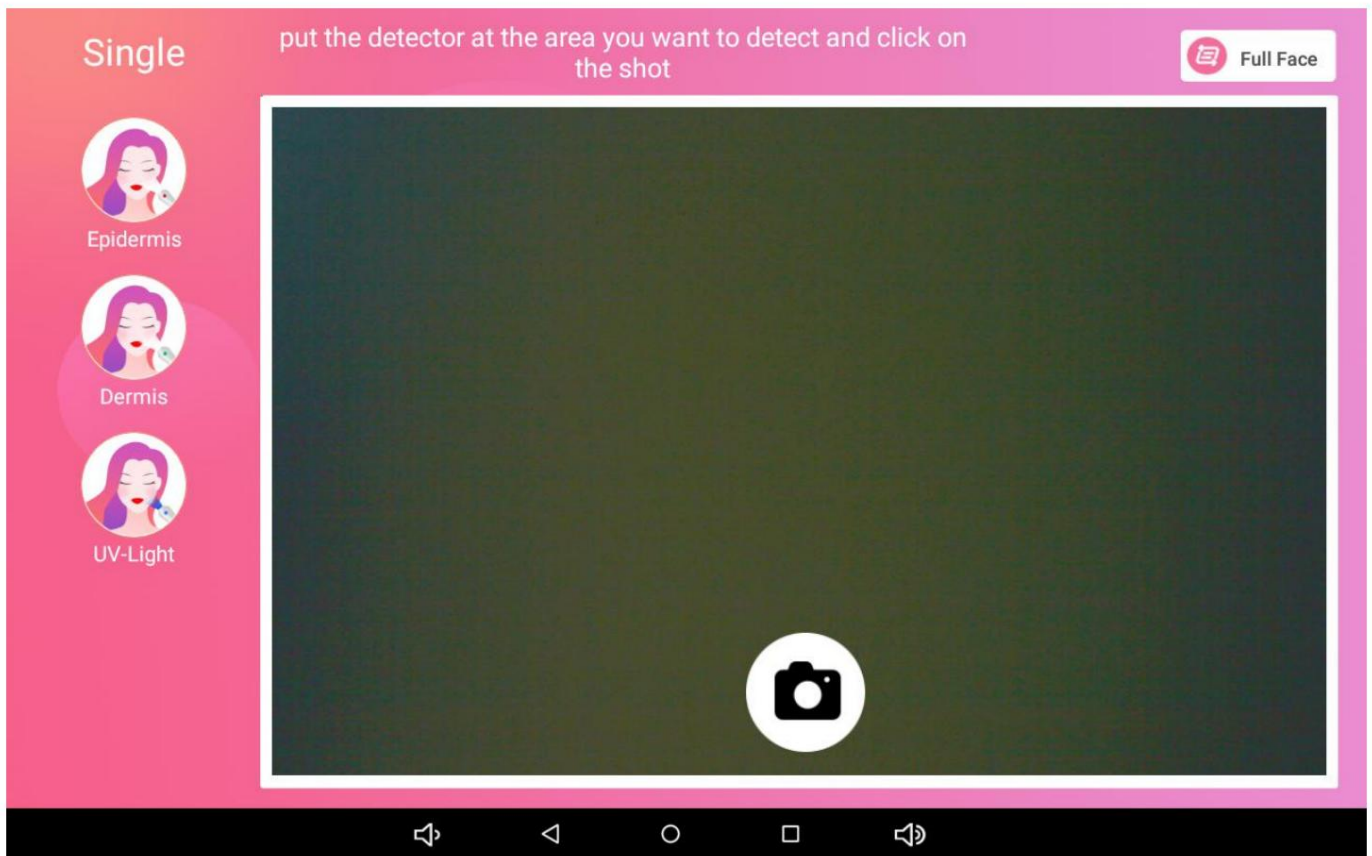


20. فقط هر بار عکس بگیرید، آنالایزر را در طول عکسبرداری خودکار حرکت ندهید

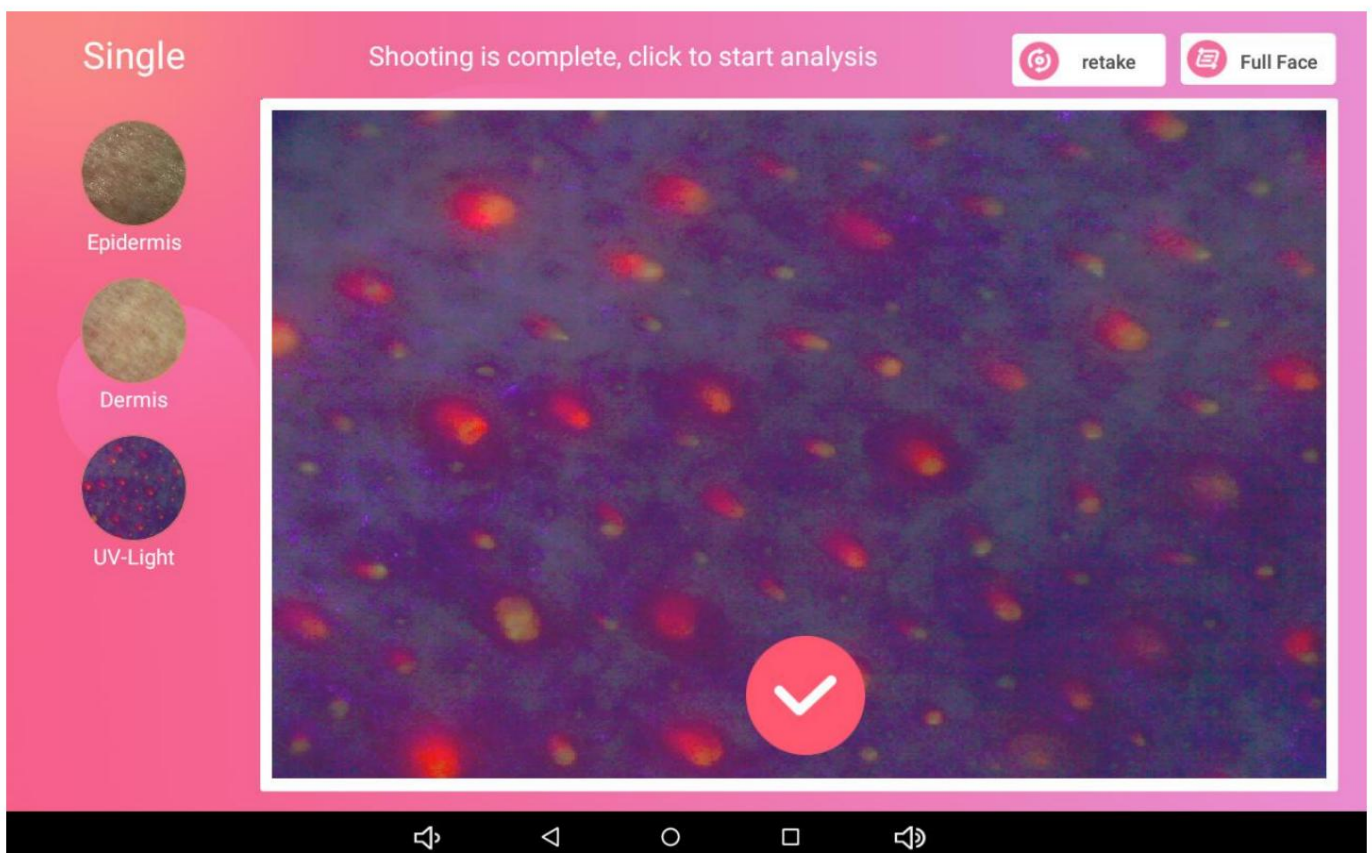


21. پس از گرفتن عکس، روی علامت تیک زیر تصویر کلیک کنید تا پوسته خودکار انجام شود.

تجزیه و تحلیل و مشاهده نتایج گزارش جامع.

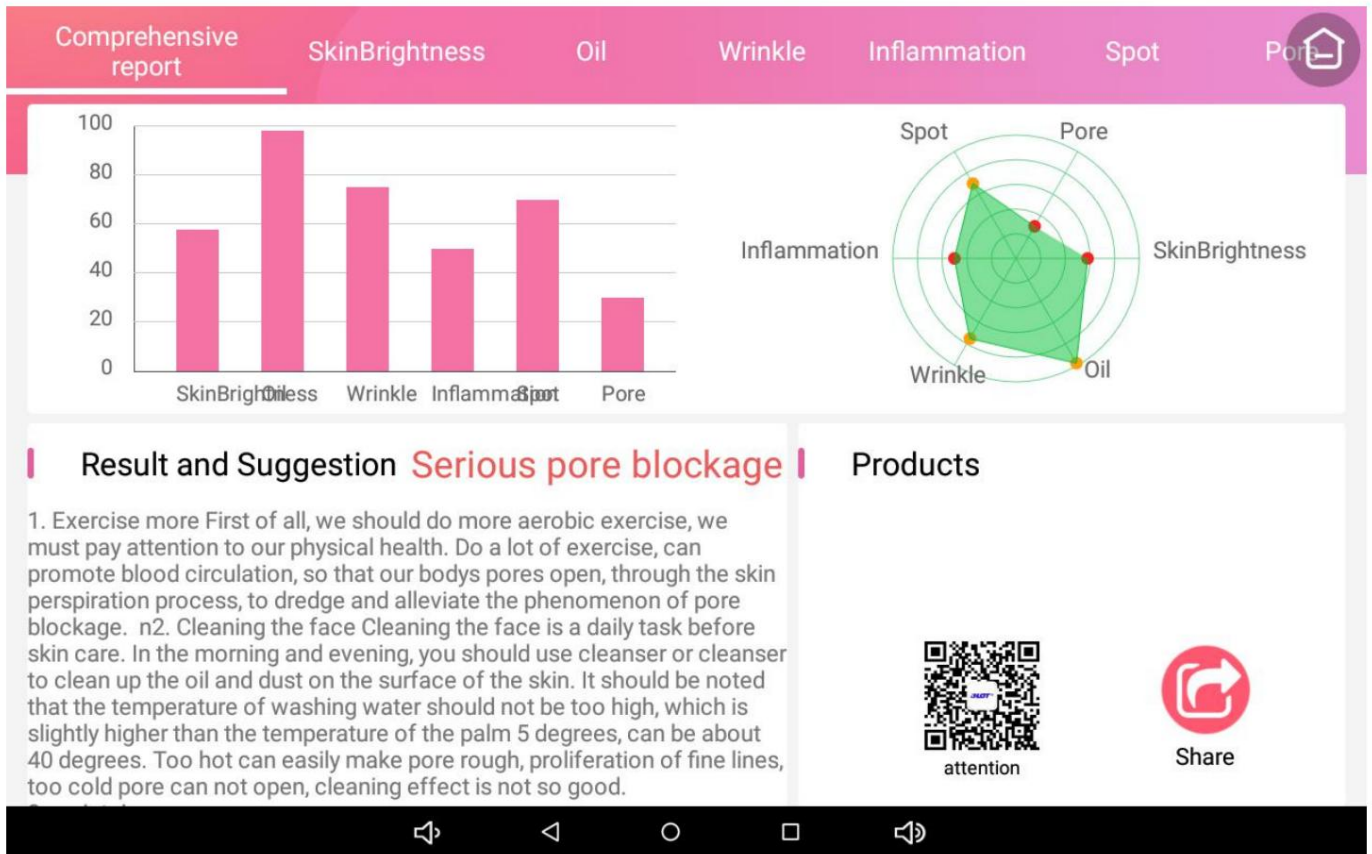

22. تجزیه و تحلیل تک نقطه ای را مشاهده کنید و نتایج تجزیه و تحلیل "SkinBrightness" را انتخاب کنید.

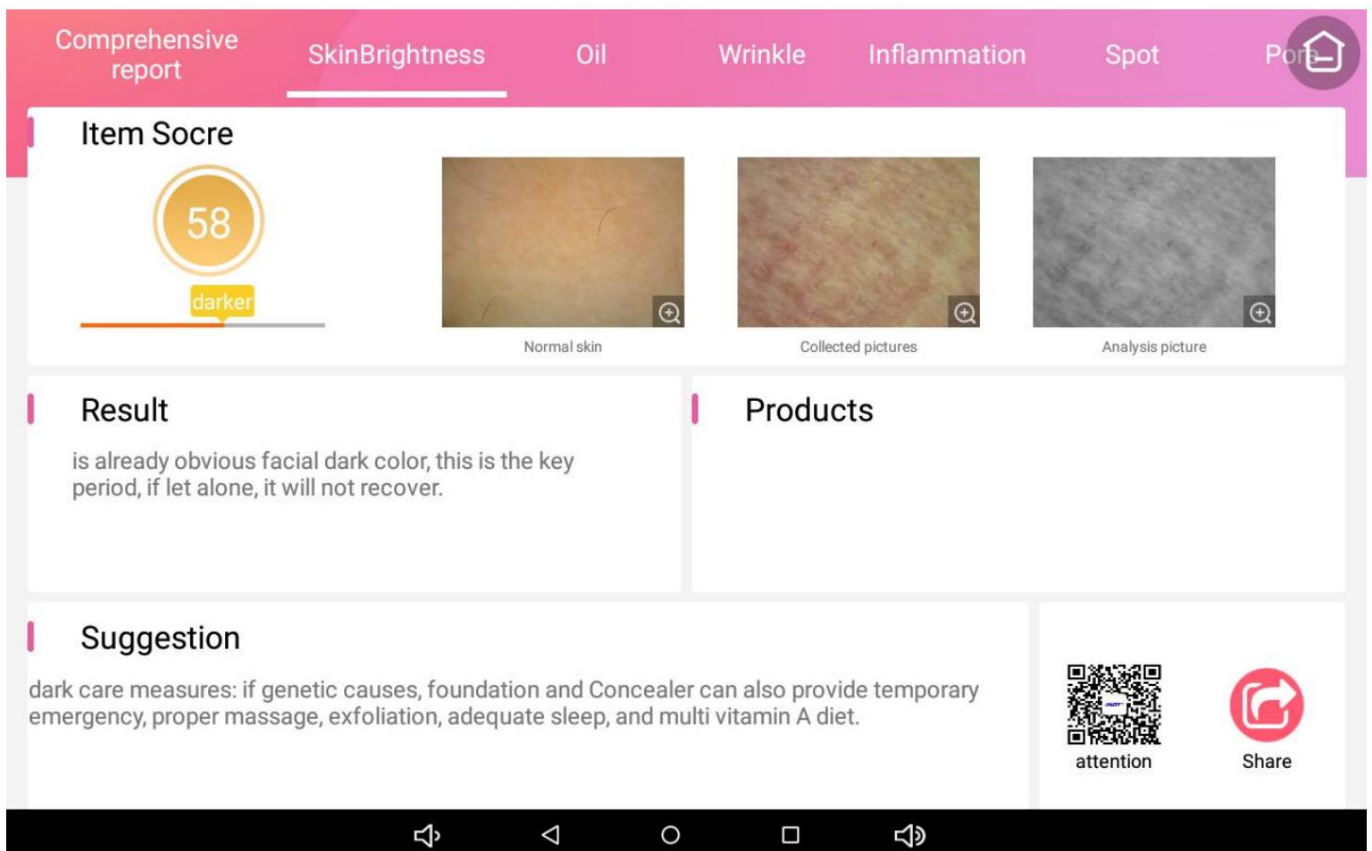

23. تجزیه و تحلیل یک مورد تک نقطه را مشاهده کنید و نتایج تجزیه و تحلیل "SkinBrightness" را انتخاب کنید

Comprehensive report SkinBrightness Oil Wrinkle Inflammation Spot

Item Score

98

healthy

Normal skin Collected pictures Analysis picture

Result

Your skin is full of moisture, please continue to maintain.

Products

Suggestion

water and oil balance maintenance strategy: replenishment mask is the most important, do not sun, do not frequent wash your face and use facial cleanser, regularly clean horny, diet should be light, choose the appropriate skin care products.

attention Share

24. مشاهده تجزیه و تحلیل یک مورد تک نقطه ای و انتخاب نتایج تجزیه و تحلیل "چروک"، التهاب، نقطه،

منافذ، نتایج تجزیه و تحلیل را می توان به تنهایی مشاهده کرد

Comprehensive report SkinBrightness Oil Wrinkle Inflammation Spot

Item Score

75

light

Normal skin Collected pictures Analysis picture

Result

Products

Suggestion

The way to reduce fine lines is to remember not to make exaggerated expressions, insist on facial massage, chew less chewing gum, compress fine lines with cold and hot, and use the correct wrinkle-removing cosmetology instrument.

attention Share



سوم، سیستم تجزیه و تحلیل پوست کامپیوتر را دانلود و نصب کنید

1. لینک را در آدرس وب مرورگر رایانه وارد کنید: [hot/hotskinanalysis.exe](http://indmu.com/hot/hotskinanalysis.exe)

<http://indmu.com/>



使用 Google 执行搜索，或者输入网址

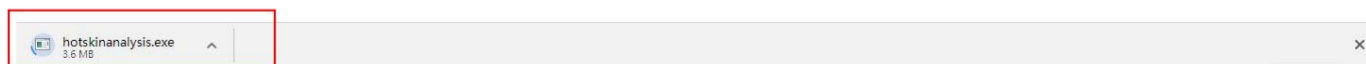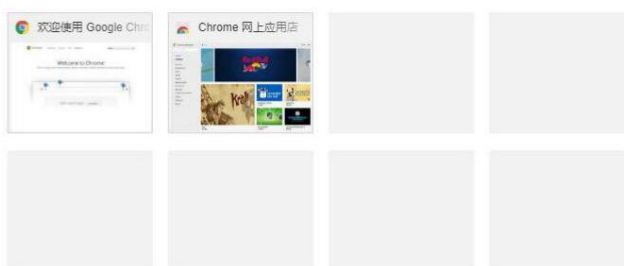

صبر کنید تا برنامه hotskinanalysis.exe دانلود شود، سپس hotskinanalysis.exe را پیدا کنید




برنامه.




2. بر روی برنامه hotskinanalysis.exe دوبار کلیک کنید.


3. در پنجره جدید روی «Browse...» کلیک کنید.

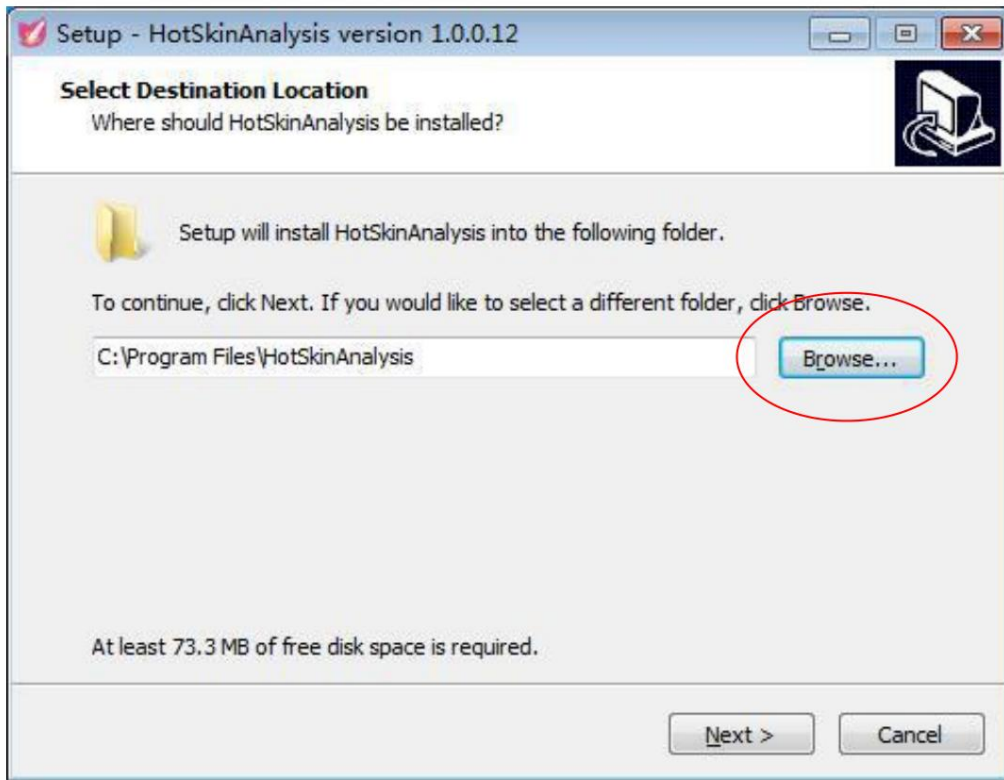


4. در پنجره جدید، دیسکی غیر از درایو C مانند D، E، F را انتخاب کنید، "OK" را انتخاب کنید.

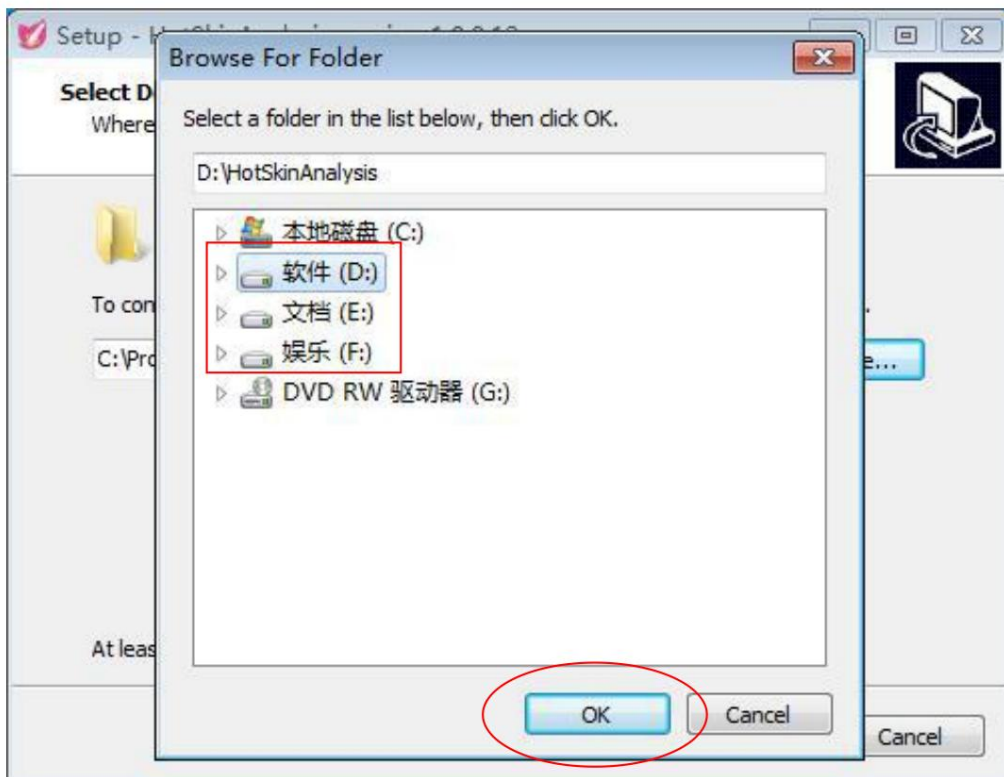


5. در پنجره جدید، روی "بعدی" کلیک کنید.

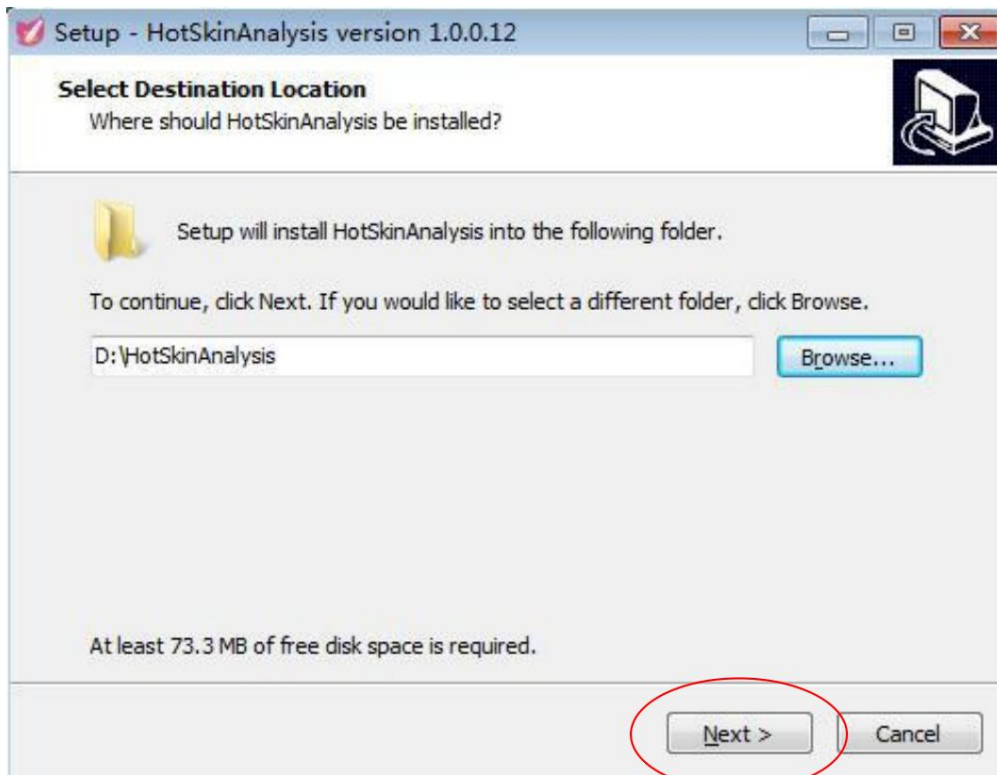


6. در پنجره جدید، روی "Y" کلیک کنید.

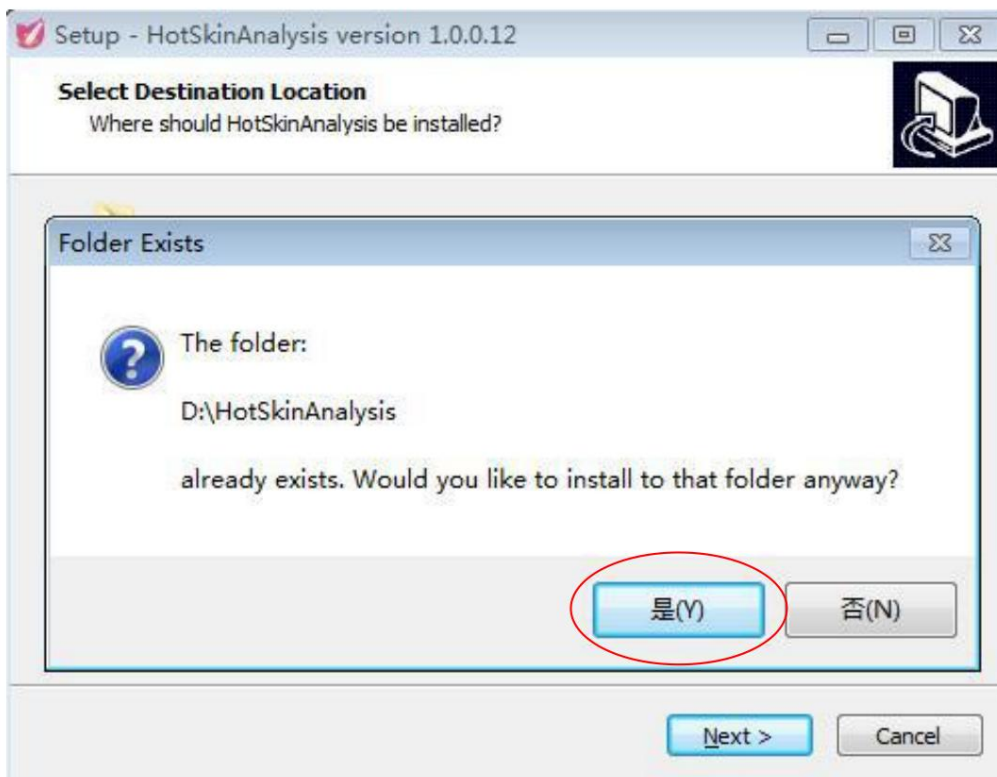


7. در پنجره جدید، روی «بعدی» کلیک کنید.

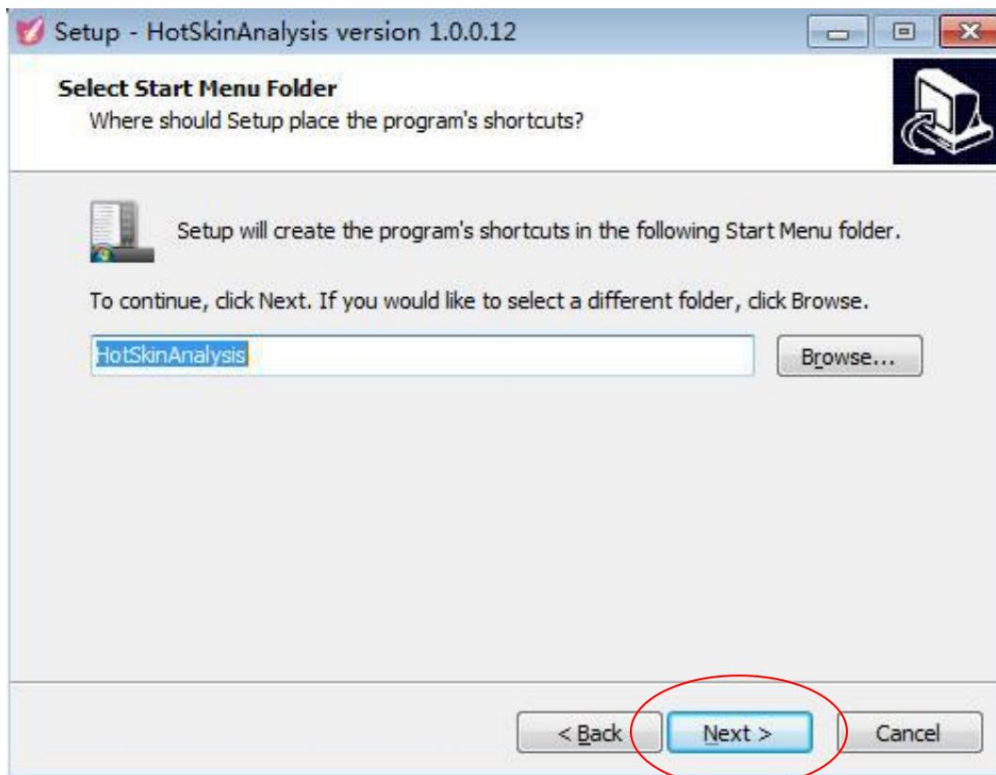

8. در پنجره جدید، روی "Install" کلیک کنید.

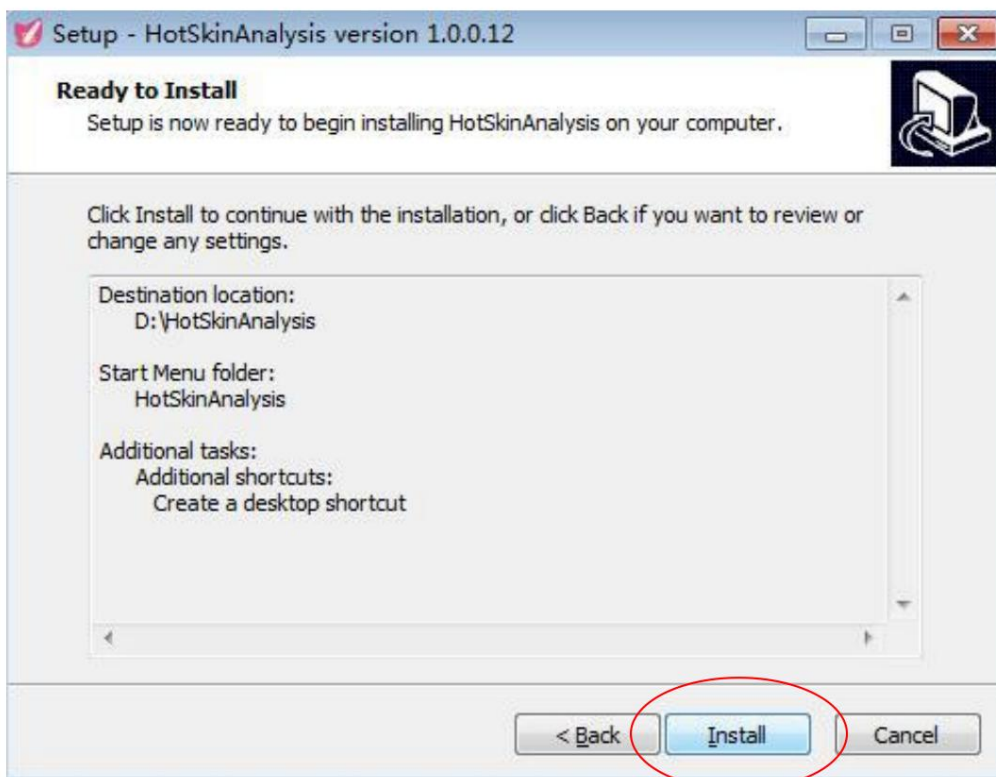

9. در پنجره جدید، روی «پایان» کلیک کنید.

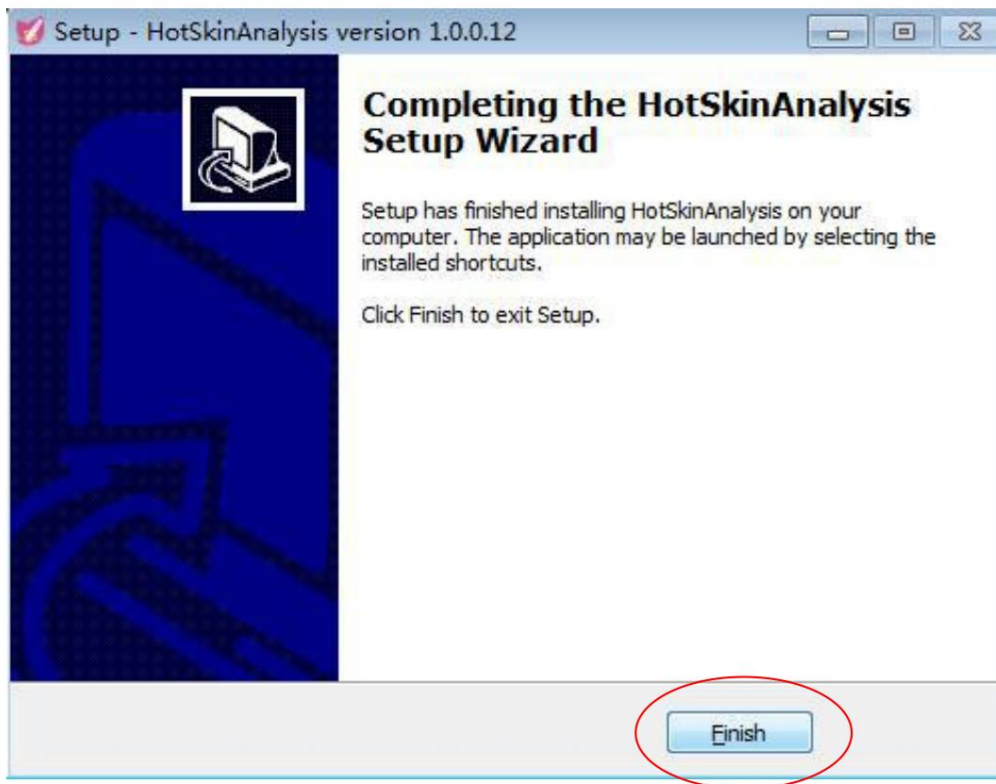

10. در پایان نصب نرم افزار، دسکتاپ نماد میانبر Skin Analysis را نمایش می دهد.



## چهارم، سیستم تجزیه و تحلیل پوست معرفی عملکرد سمت کامپیوتر


سوئیچ را روی «OFF» قرار دهید و آنالایزر پوست را به پورت USB رایانه وصل کنید. زمانی که نشانگر دستگاه قرمز روشن می شود، آشکارساز روشن می شود. سپس روی «تحلیل پوست» دوبار کلیک کنید.




نماد میانبر روی دسکتاپ

1. به صفحه اصلی بروید و "NEW" را در گوشه سمت راست پایین نمایش دهید تا نشان دهد که سیستم


به روز شده است. مستقیماً روی برنامه ارتقا کلیک کنید.

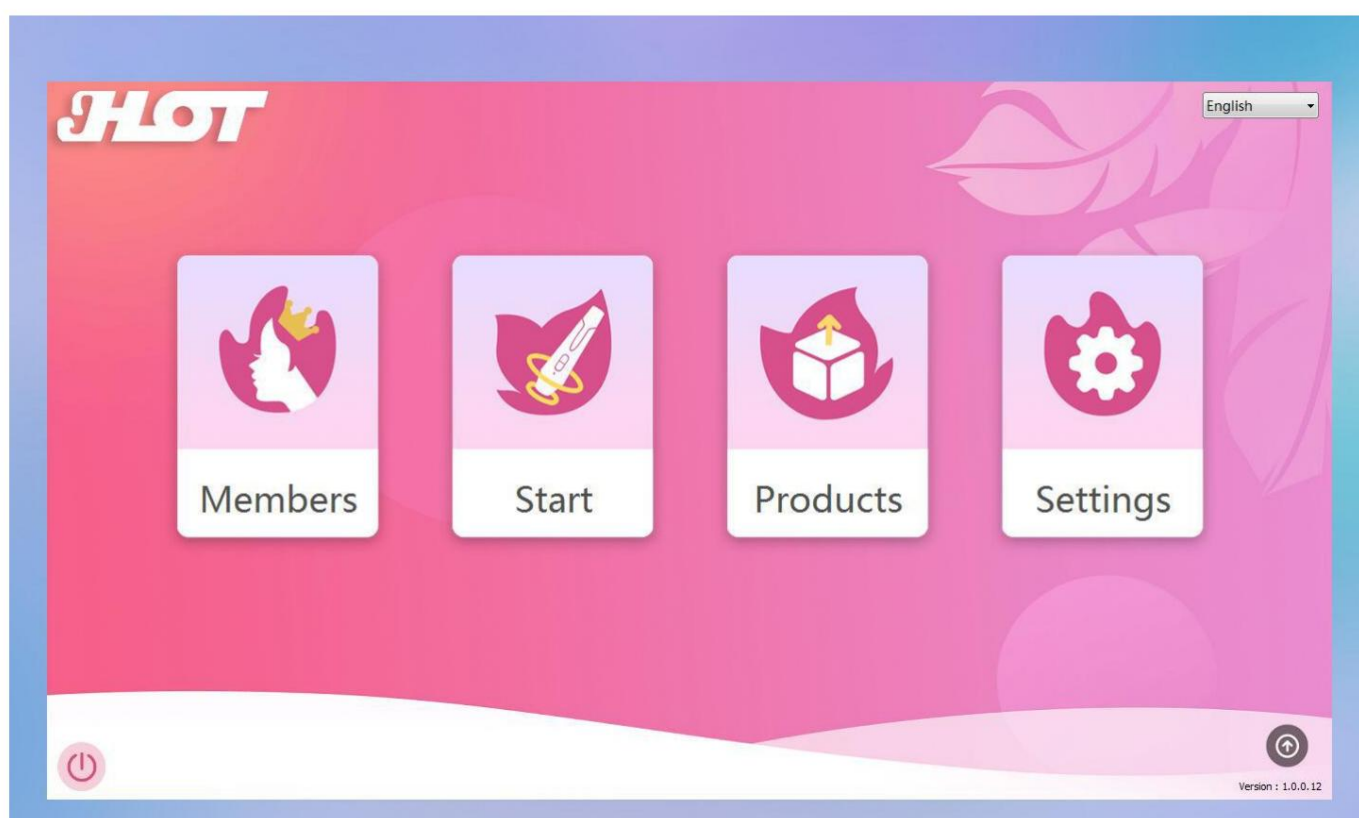

2. روی "محصولات" در صفحه اصلی کلیک کنید تا وارد رابط محصول توصیه شده شوید، می توانید اضافه کنید، تغییر، حذف، جستجو بر اساس نام و مدل.

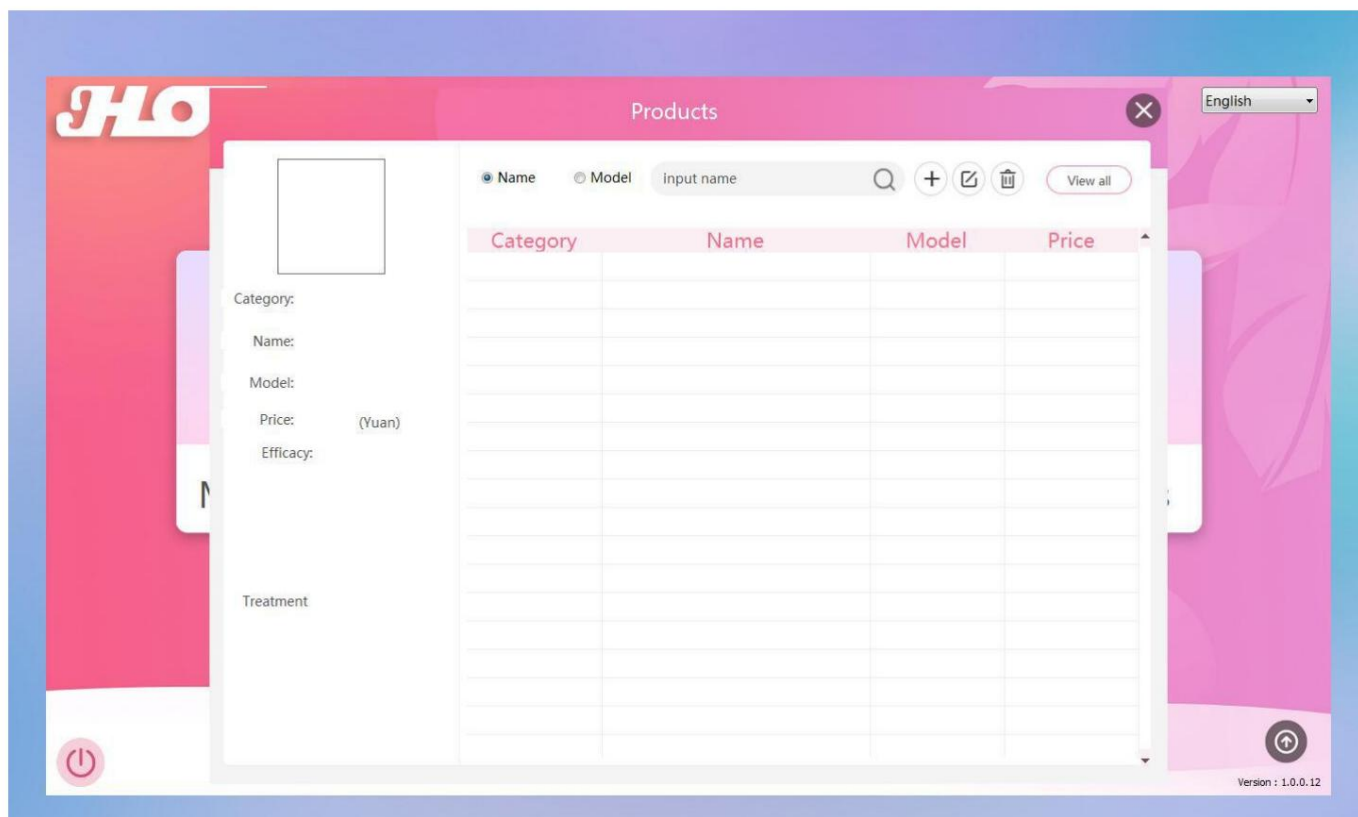


3. روی "+" در گوشه سمت راست بالا کلیک کنید تا وارد صفحه محصول جدید شوید، سپس محصول را وارد کنید اطلاعات

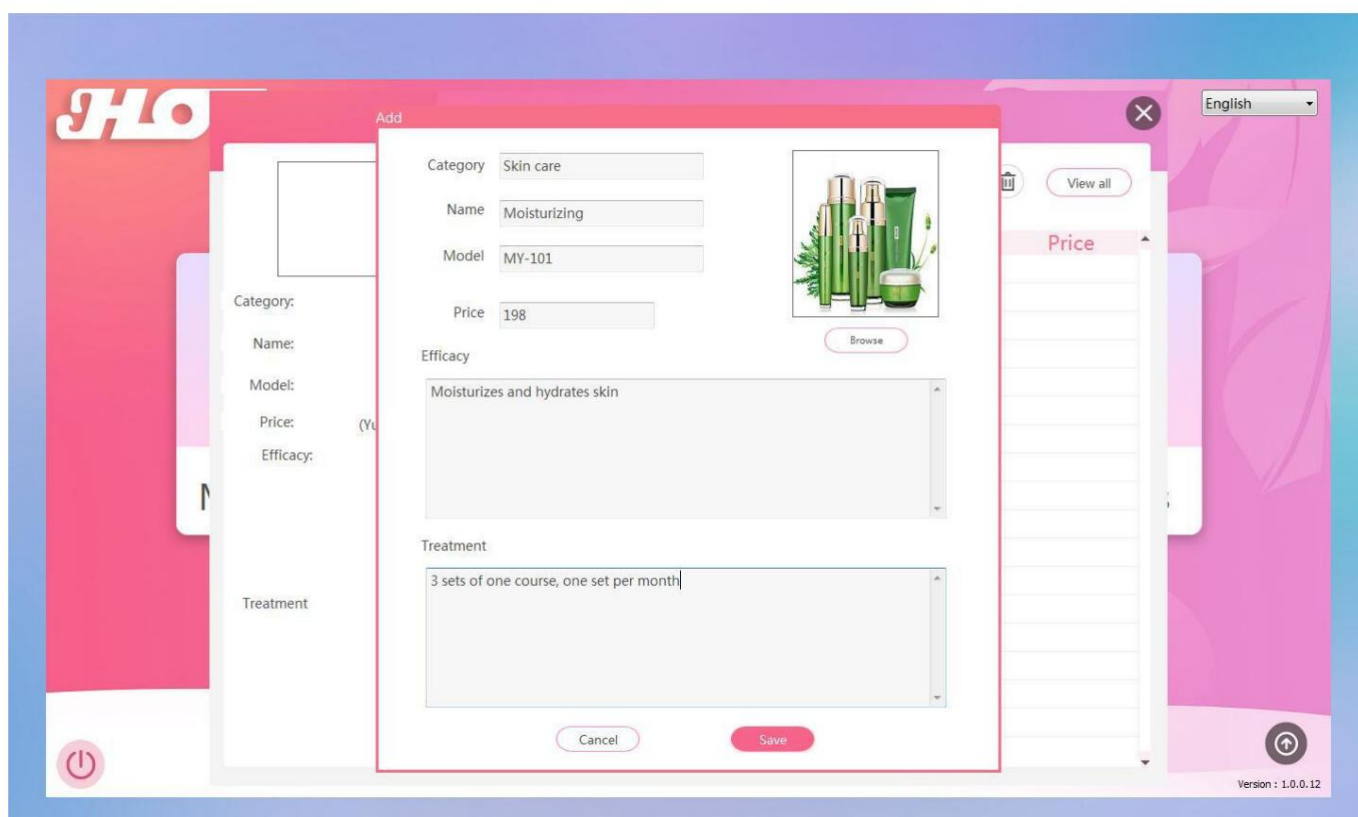



6. مورد را در گوشه سمت راست بالا شناسایی کنید، روی پیکان کشویی کلیک کنید تا موارد دیگر را تغییر دهید.


موارد

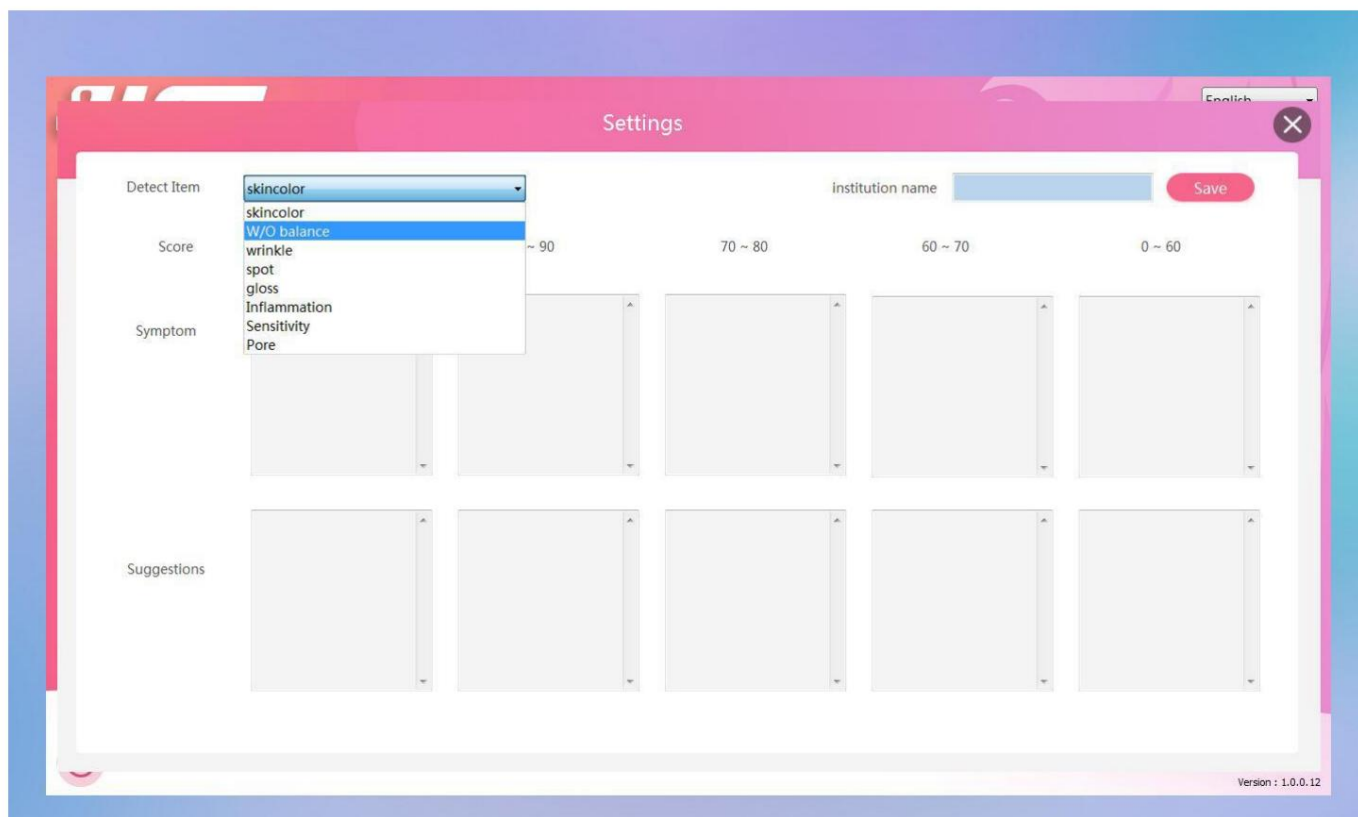

7. روی "اعضا" در صفحه اصلی کلیک کنید تا وارد رابط بایگانی اعضا شوید. می توانید اضافه کنید، تغییر دهید،

حذف و جستجو برای اعضا با نام. اگر نیازی به بایگانی ندارید، روی "شروع" در قسمت اصلی کلیک کنید

صفحه برای ورود به صفحه تجزیه و تحلیل.

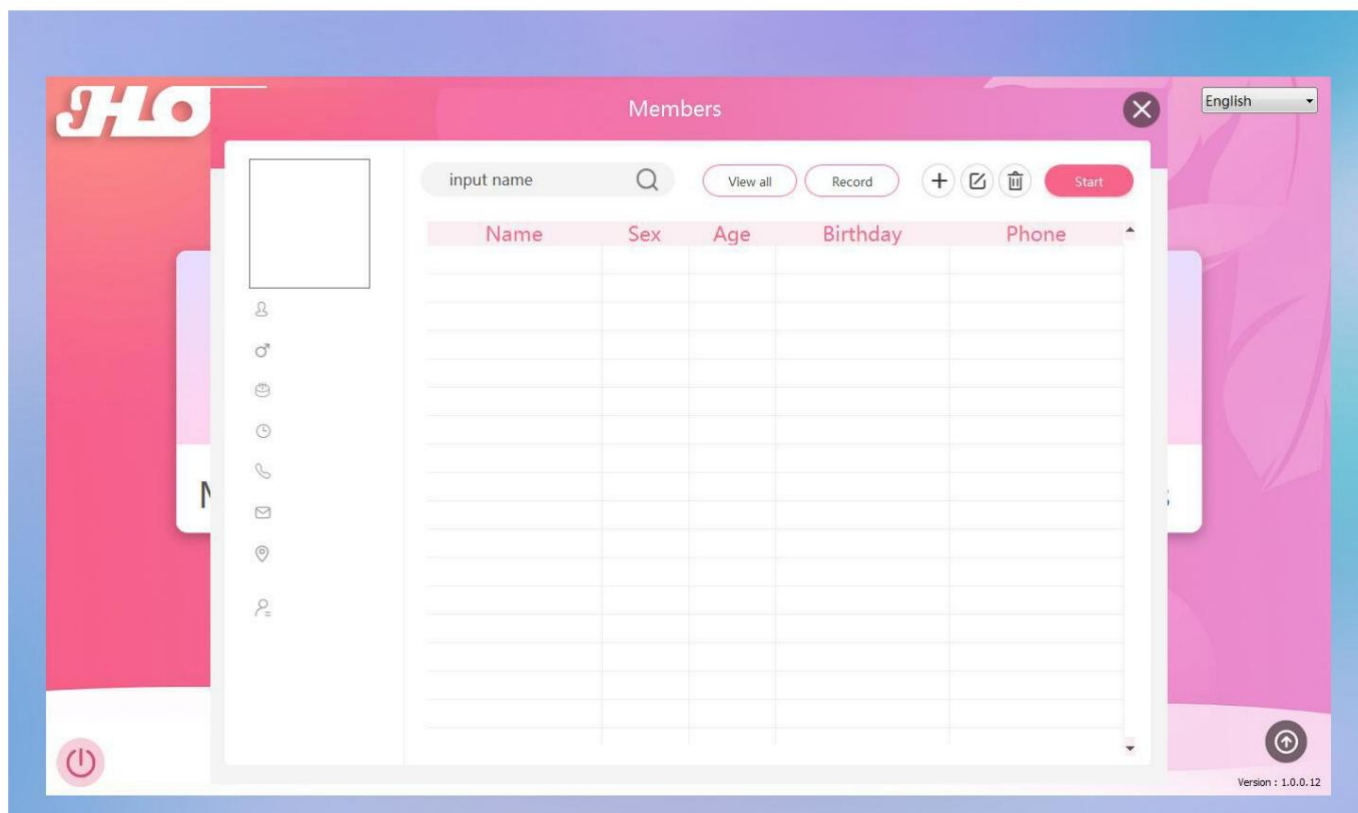

8. روی "+" در گوشه سمت راست بالا کلیک کنید تا وارد پنجره عضو جدید شوید، سپس عضو را وارد کنید.

اطلاعات

**Members** English

**Add**

Name: Lucy

Sex:  Male  Female

Age: 20

Birthday: 1999/ 3/ 1

Phone: 123456789

Email: 1234@qq.com

Address: London

Operator: 01

Remarks:

Cancel OK

Version : 1.0.0.12

9. پس از وارد کردن اطلاعات عضو، روی "OK" کلیک کنید و عضو با موفقیت اضافه شد.

**Members** English

input name View all Record + Start

Name	Sex	Age	Birthday	Phone
Lucy	Female	20	1999/03/01	123456789

Lucy

Female

20

1999/03/01

123456789

1234@qq.com


London

01

Version : 1.0.0.12

10. عضو مورد آزمایش را انتخاب کنید، روی "شروع" در گوشه سمت راست بالا کلیک کنید تا وارد قسمت اصلی شوید.


رابط تجزیه و تحلیل، و به طور پیش فرض عکسبرداری تمام صورت را وارد کنید.

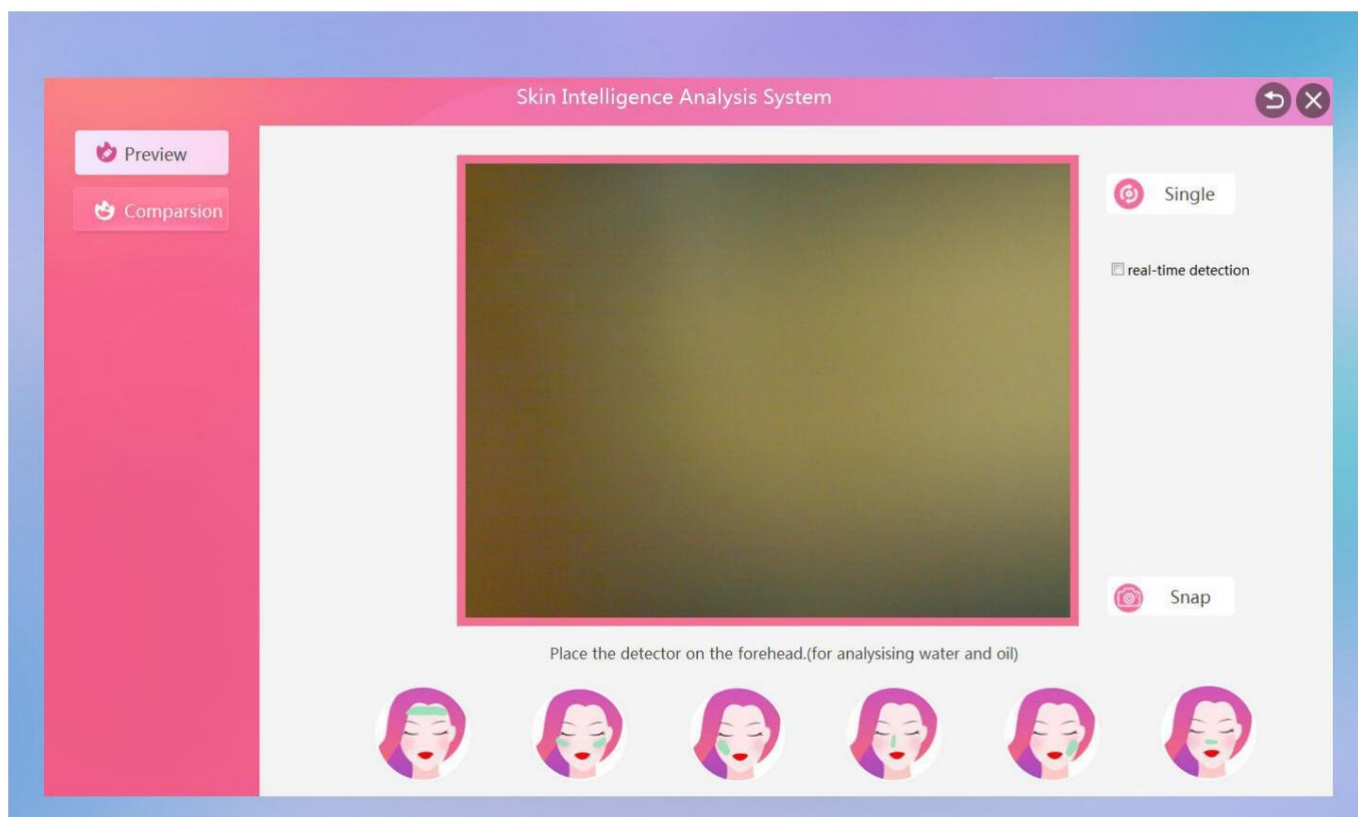


11. سمت راست "Dynamic Data" را برای تشخیص بصری ناحیه غیر طبیعی بررسی کنید. ناحیه سفید رنگ

پنجره کوچک ناحیه توزیع متمرکز آب و روغن را نشان می دهد. وقتی تصویر است


در فوکوس، روی "Snap" در گوشه پایین سمت راست کلیک کنید تا عکس بگیرید.

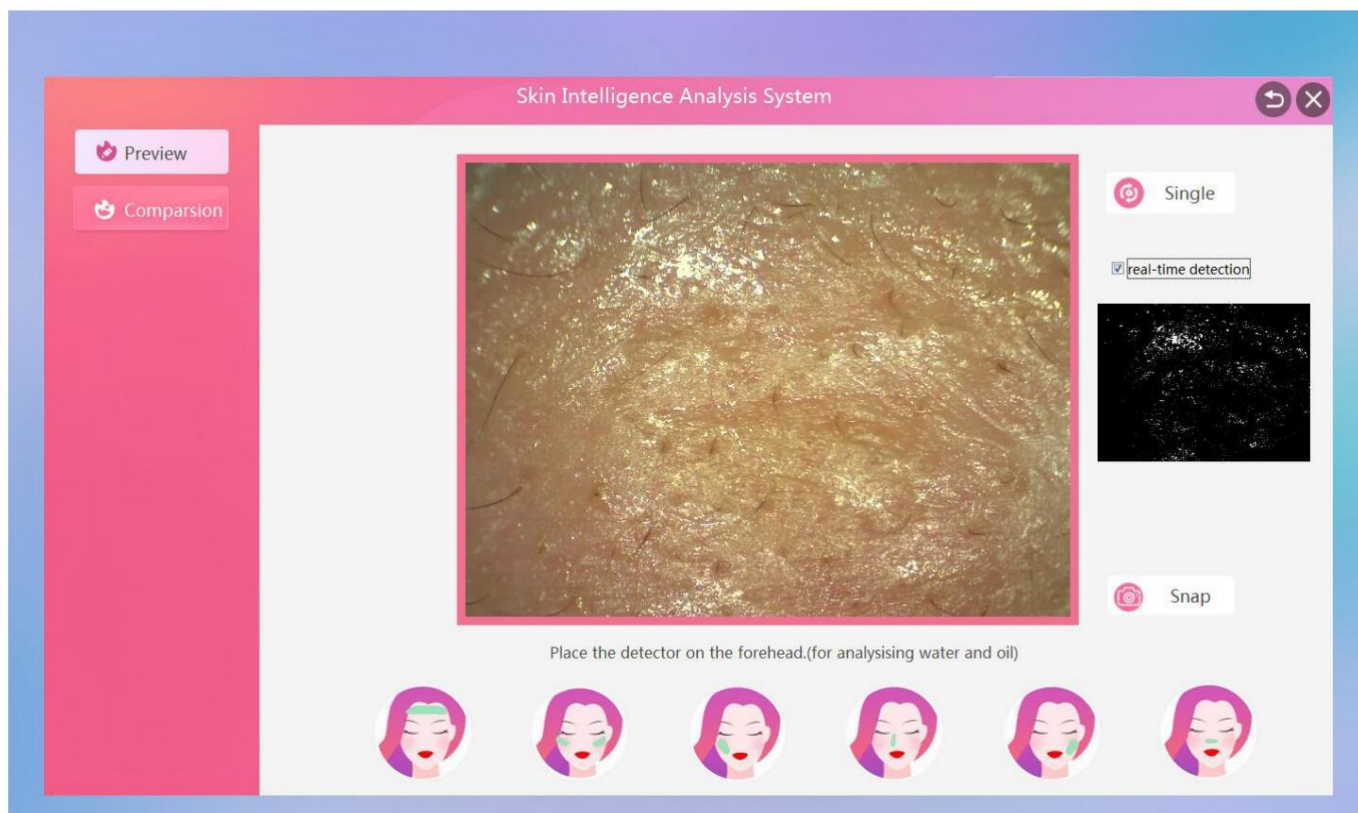

12. رنگ های کوچک سفید نشان می دهد که خطوط ریز در منطقه متمرکز شده اند. زمانی که تصویر در فوکوس است، برای گرفتن عکس روی "Snap" در گوشه سمت راست پایین کلیک کنید.

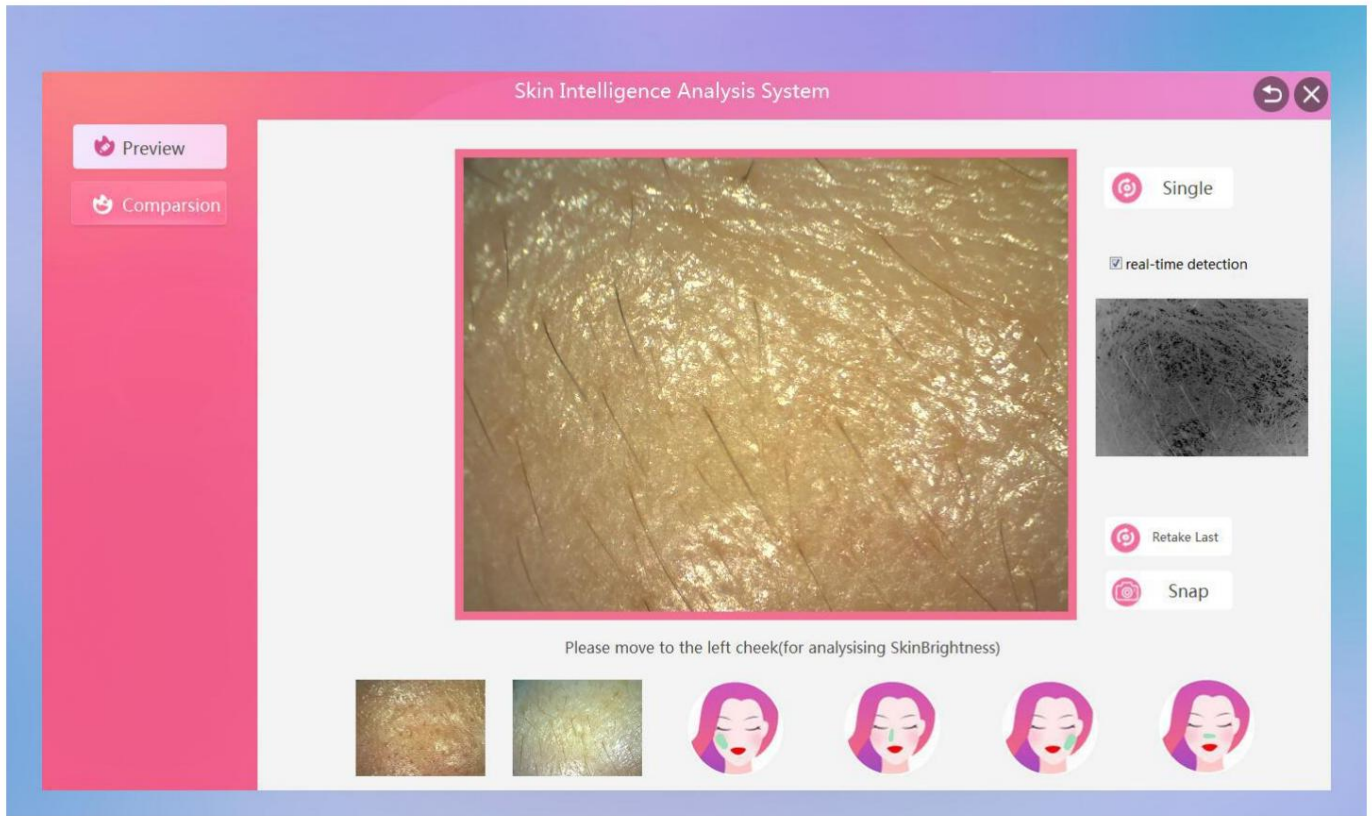


13. رنگ روشن تر پنجره کوچک نشان دهنده ناحیه ای است که رنگ پوست سفید است. چه زمانی تصویر در فوکوس است، روی "Snap" در گوشه سمت راست پایین کلیک کنید تا عکس بگیرید.

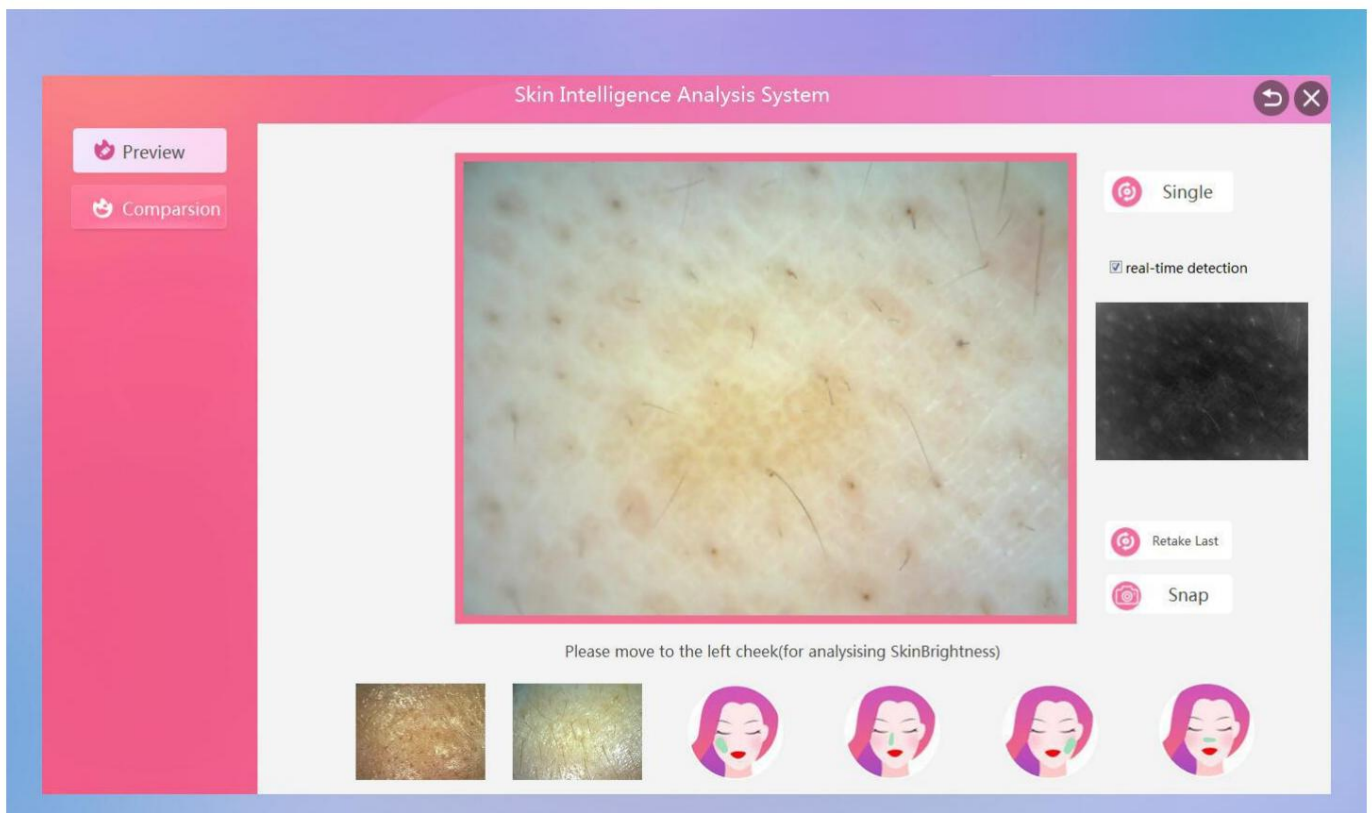


14. برجستگی کوچک قرمز پنجره کوچک، ناحیه توزیع متمرکز آن را نشان می دهد

خون قرمز هنگامی که تصویر در فوکوس است، روی "Snap" در گوشه پایین سمت راست کلیک کنید تا عکس بگیرید.

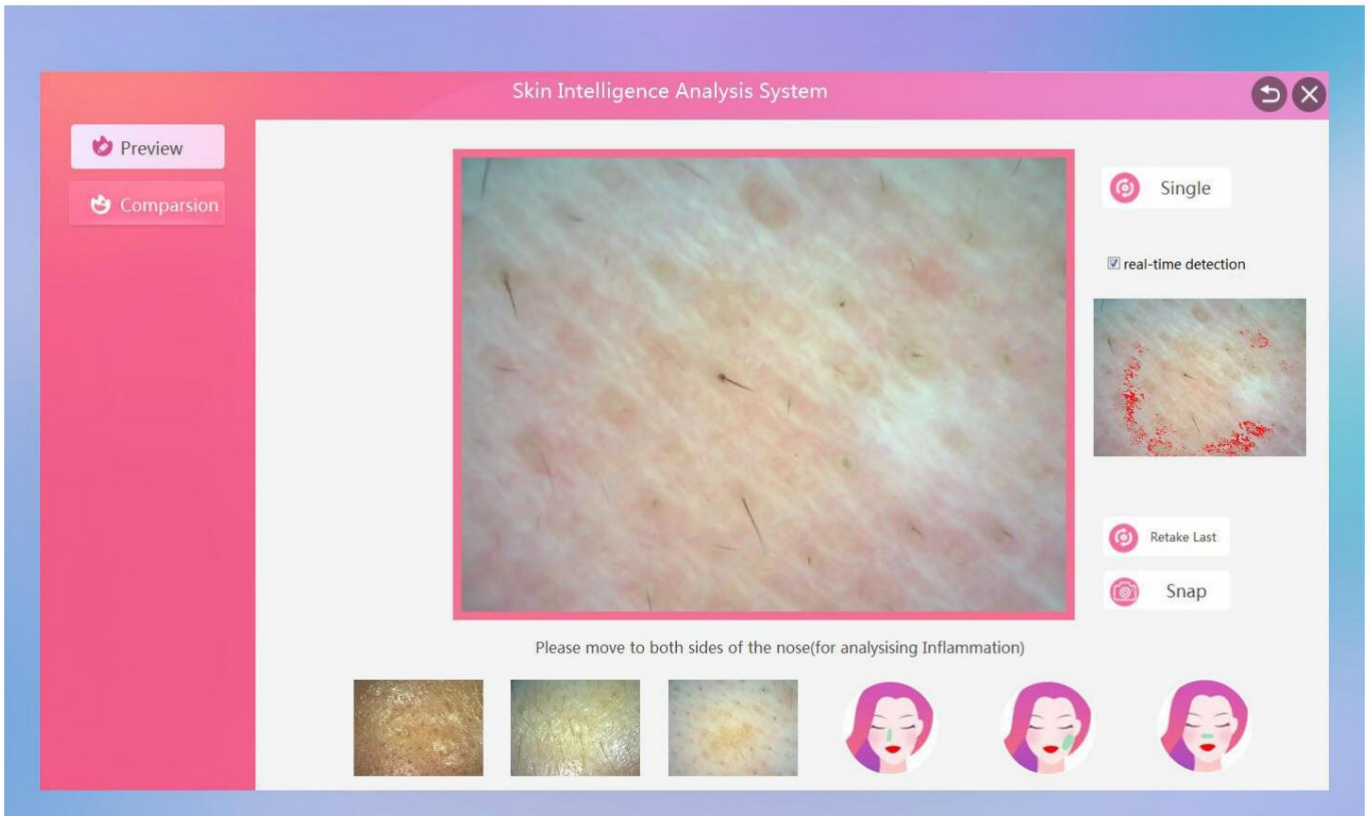


15. ناحیه رنگی کوچک پنجره، ناحیه توزیع متمرکز لکه های رنگی را نشان می دهد.


هنگامی که تصویر در فوکوس است، روی "Snap" در گوشه پایین سمت راست کلیک کنید تا عکس بگیرید.

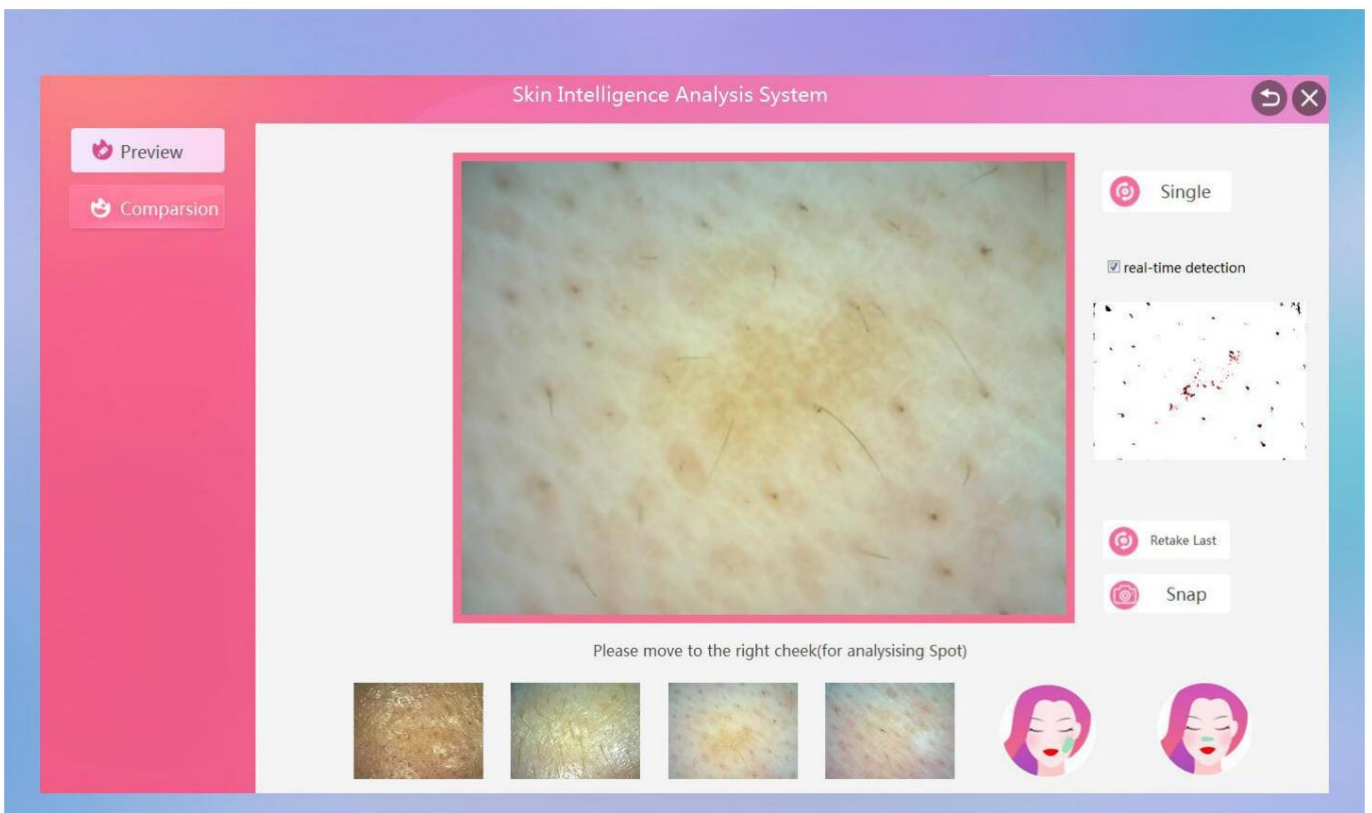

16. برجسته سفید کوچک پنجره کوچک نشان دهنده مسدود شدن منافذ است. زمانی که تصویر در فوکوس است، روی "Snap" در گوشه پایین سمت راست کلیک کنید تا عکس بگیرید.

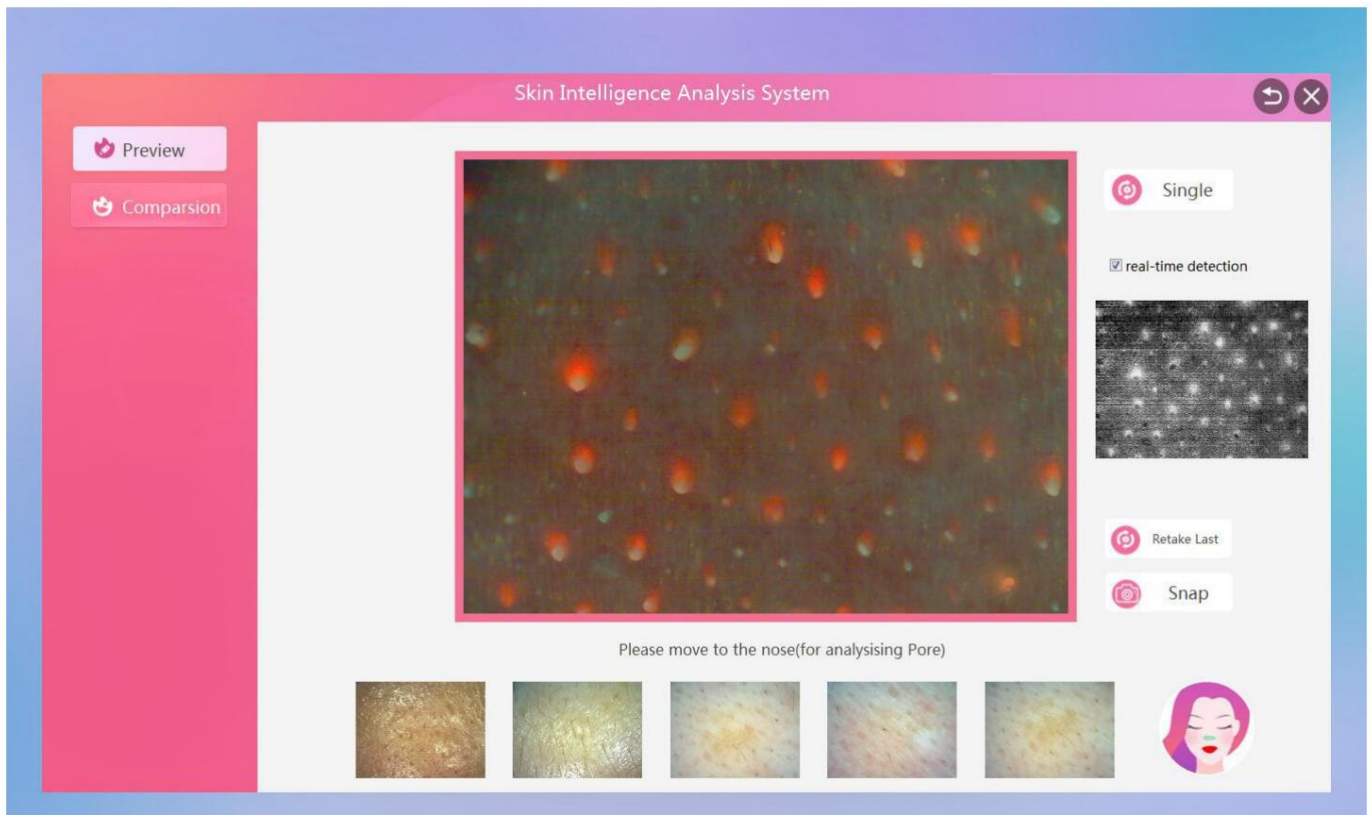


17. تصویربرداری تمام صورت کامل شد

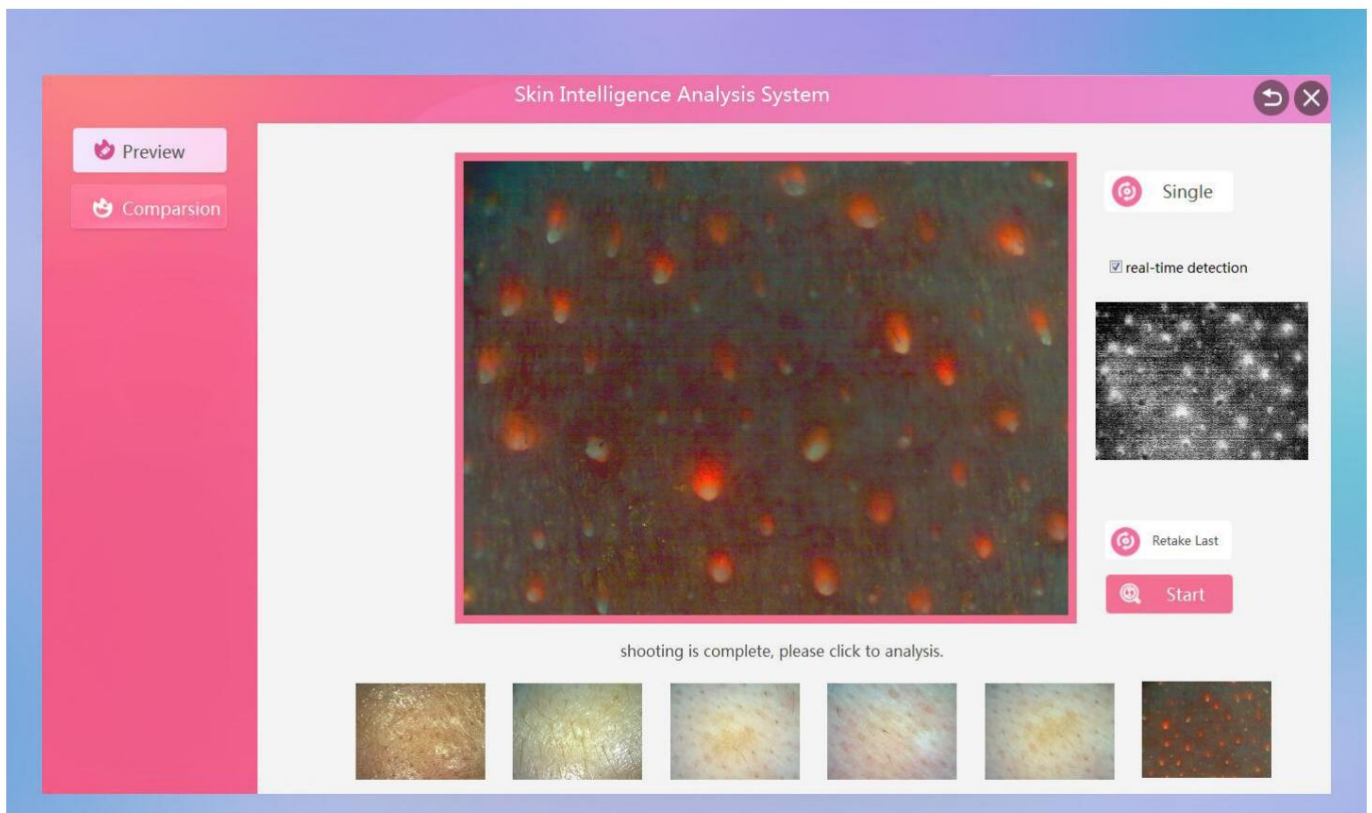


18. پس از گرفتن تمام صورت، می توانید روی قاب عکس دوبار کلیک کنید تا بزرگنمایی کنید و آن را به صورت واقعی مشاهده کنید.


زمان، و موقعیت تصویر را با ماوس بکشید.

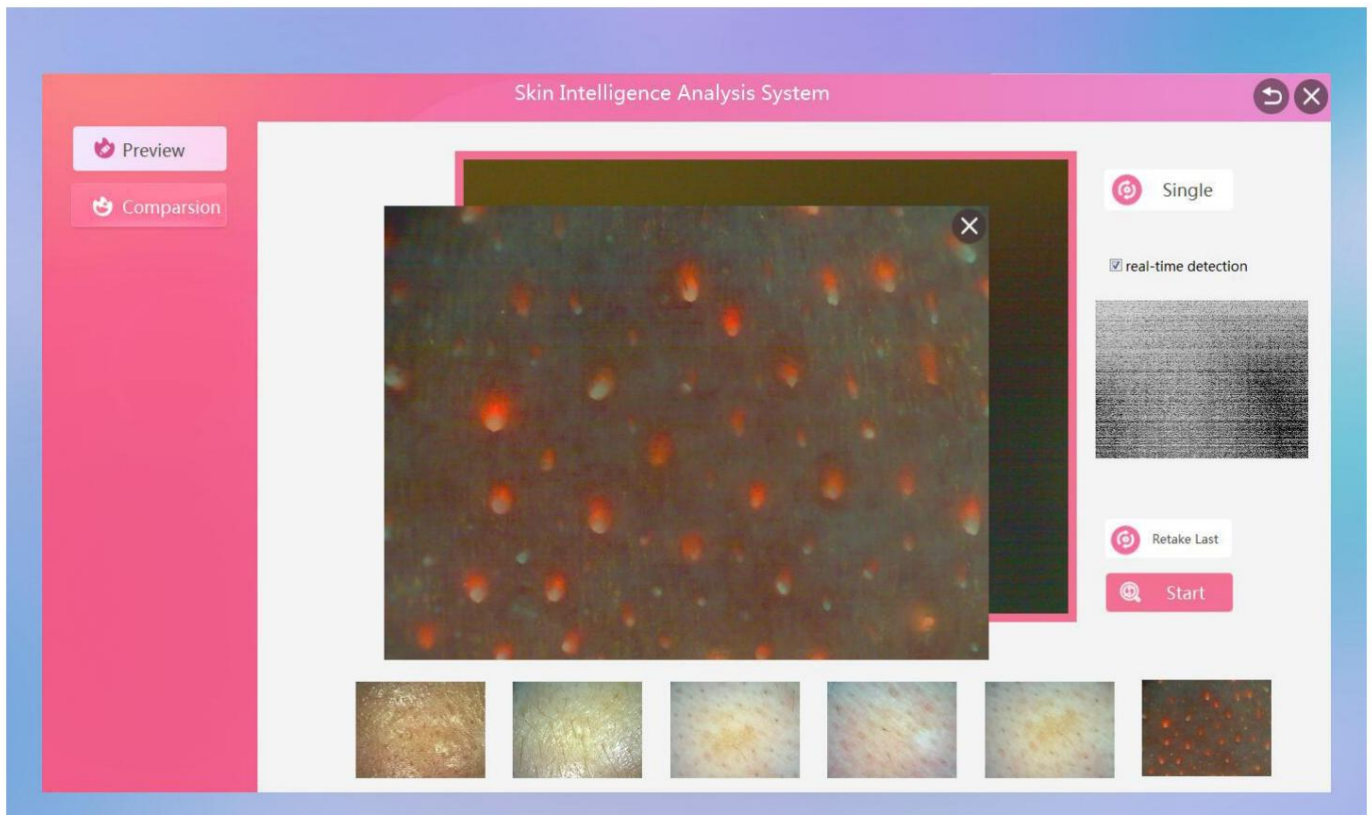


19. برای مشاهده تصویر، چرخ ماوس را برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی حرکت دهید.

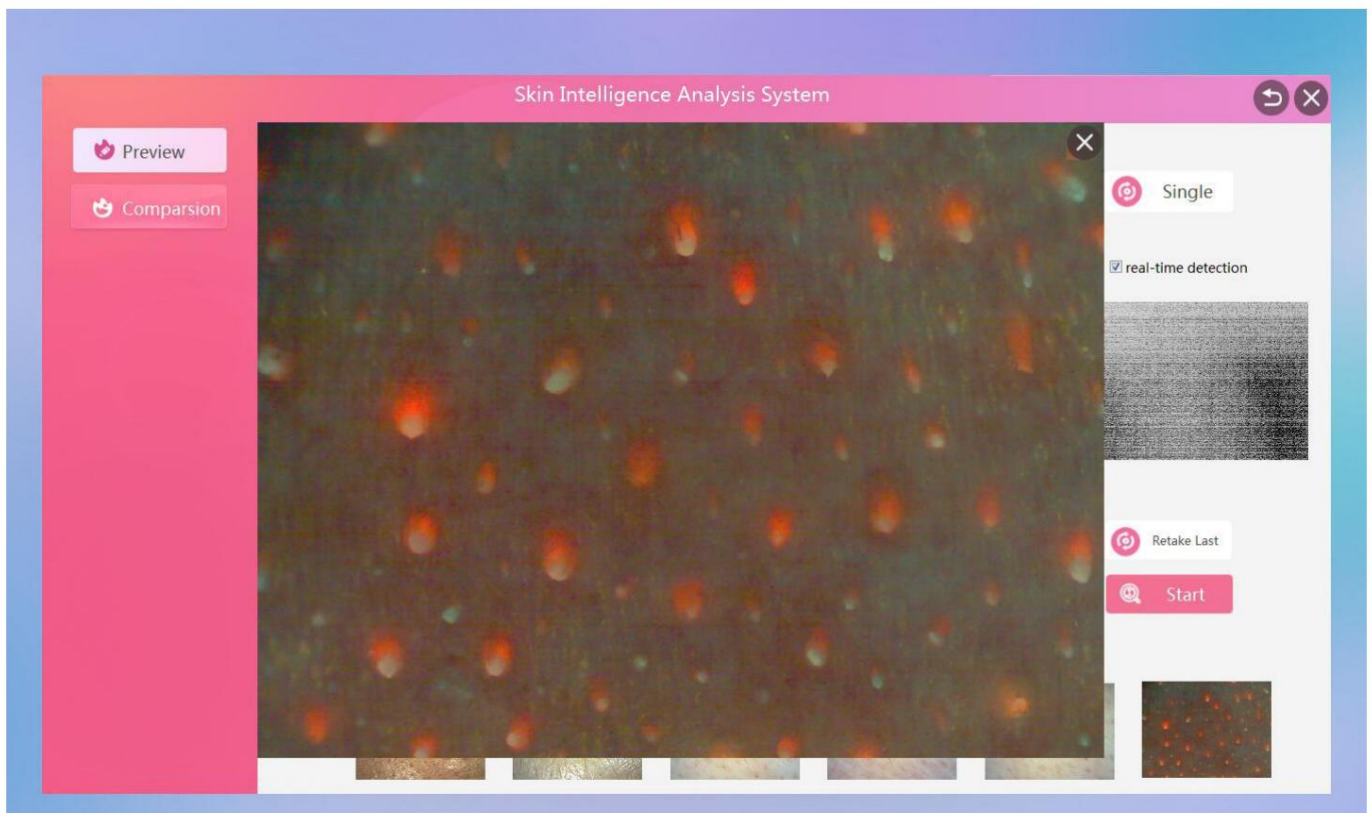


20. چرخ ماوس را برای بزرگنمایی به حالت تمام صفحه حرکت دهید.

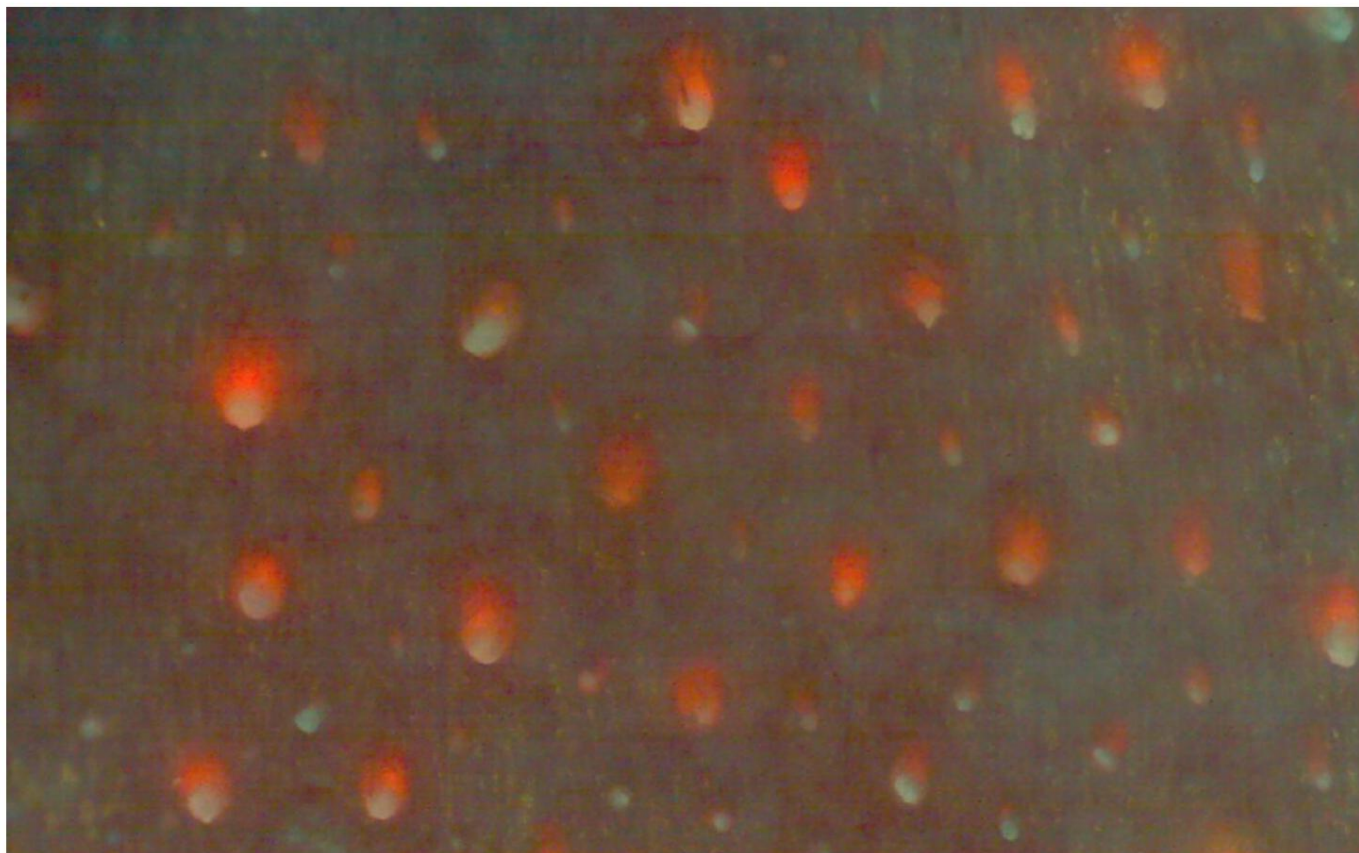


21. پس از گرفتن تمام صورت، روی "شروع" در گوشه پایین سمت راست کلیک کنید تا داده های پوست را تجزیه و تحلیل کنید.

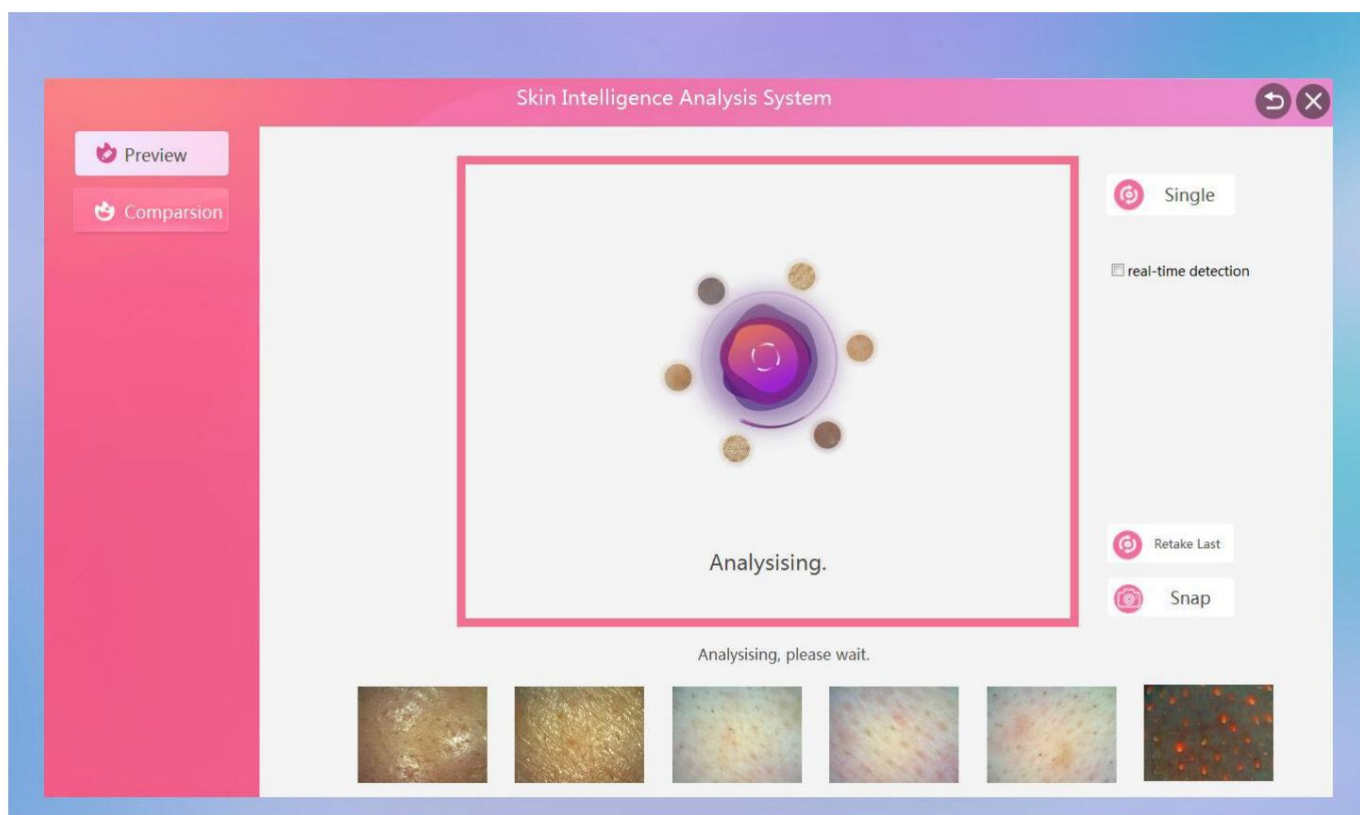


22. پس از تکمیل تجزیه و تحلیل خودکار، یک گزارش تشخیص چهره کامل و یک گزارش تست واحد تولید می شوند. گزارش کامل چهره می تواند نتایج 8 مورد داده اصلی را به طور مستقیم مشاهده کند سلامت پوست خود را درک کنید.

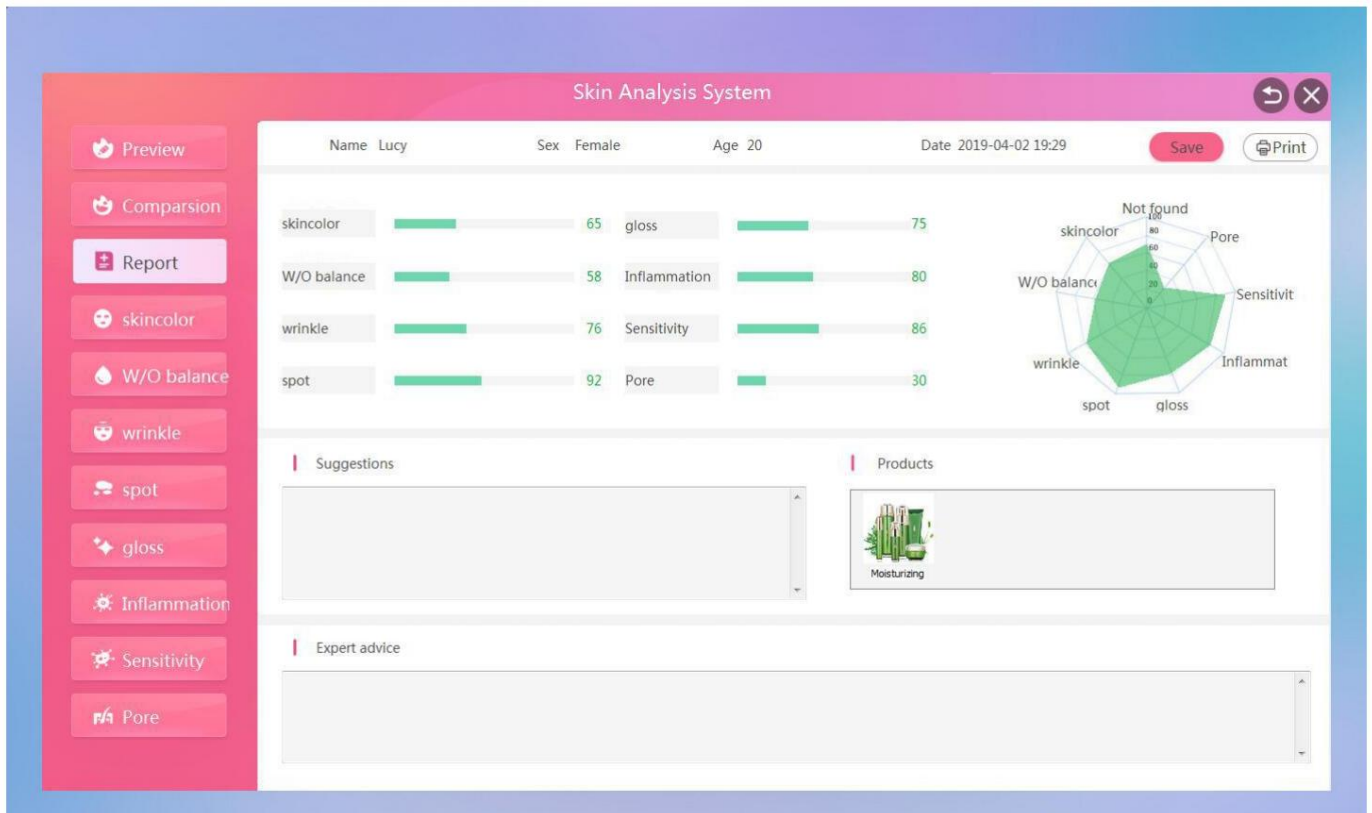


23. مشاهده عکس تمام صورت "رنگ پوست" نتایج آزمایش تکی و پیشنهادات برای بهبود، داده ها امتیاز (هرچه امتیاز بالاتر باشد، رنگ پوست بهتر است)، تصویر را می توان بزرگ کرد

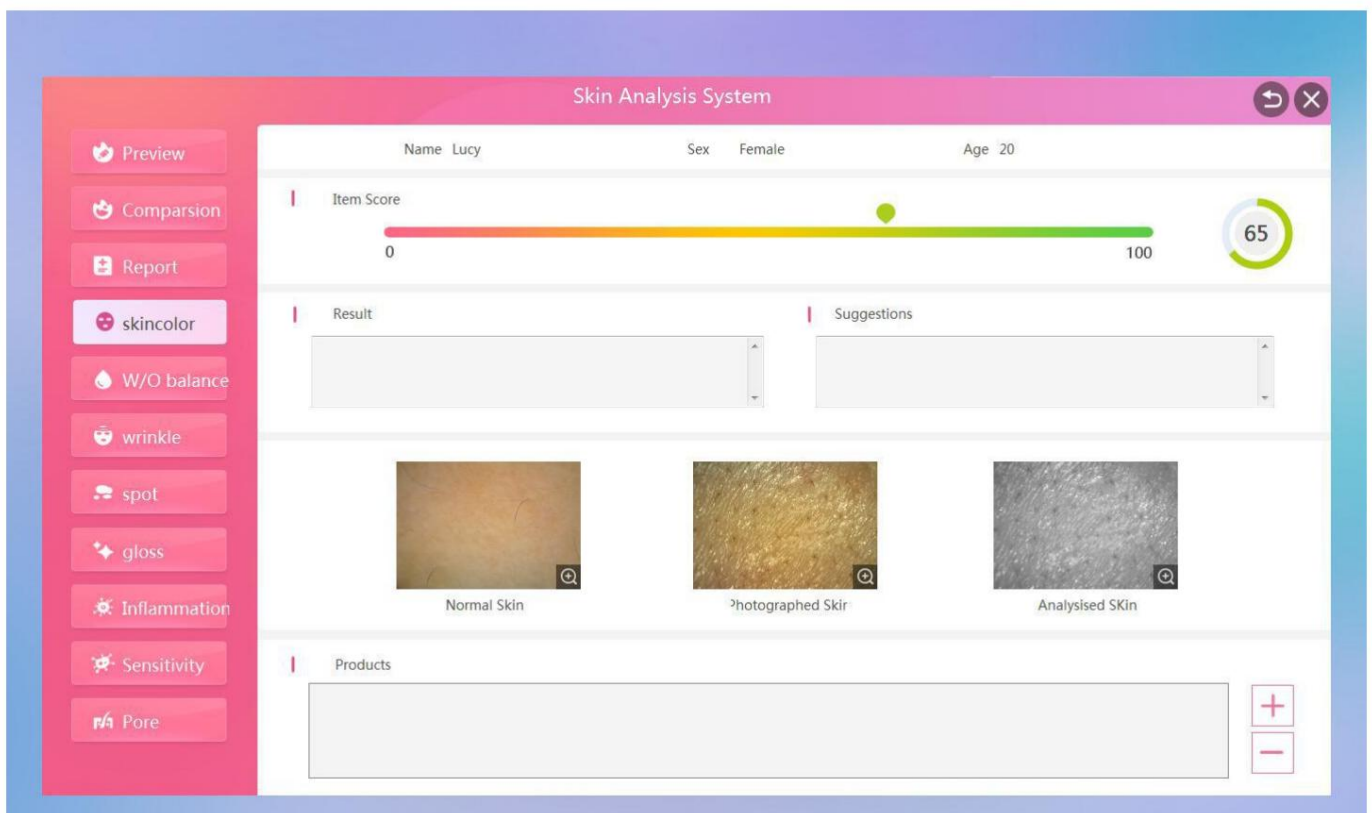


24. در گزارش تجزیه و تحلیل رنگ پوست، روی ستون توصیه محصول "+" کلیک کنید تا انتخاب شود. محصول توصیه می شود، و سپس روی OK کلیک کنید، محصول را می توان به رنگ پوست اضافه کرد گزارش تحلیل

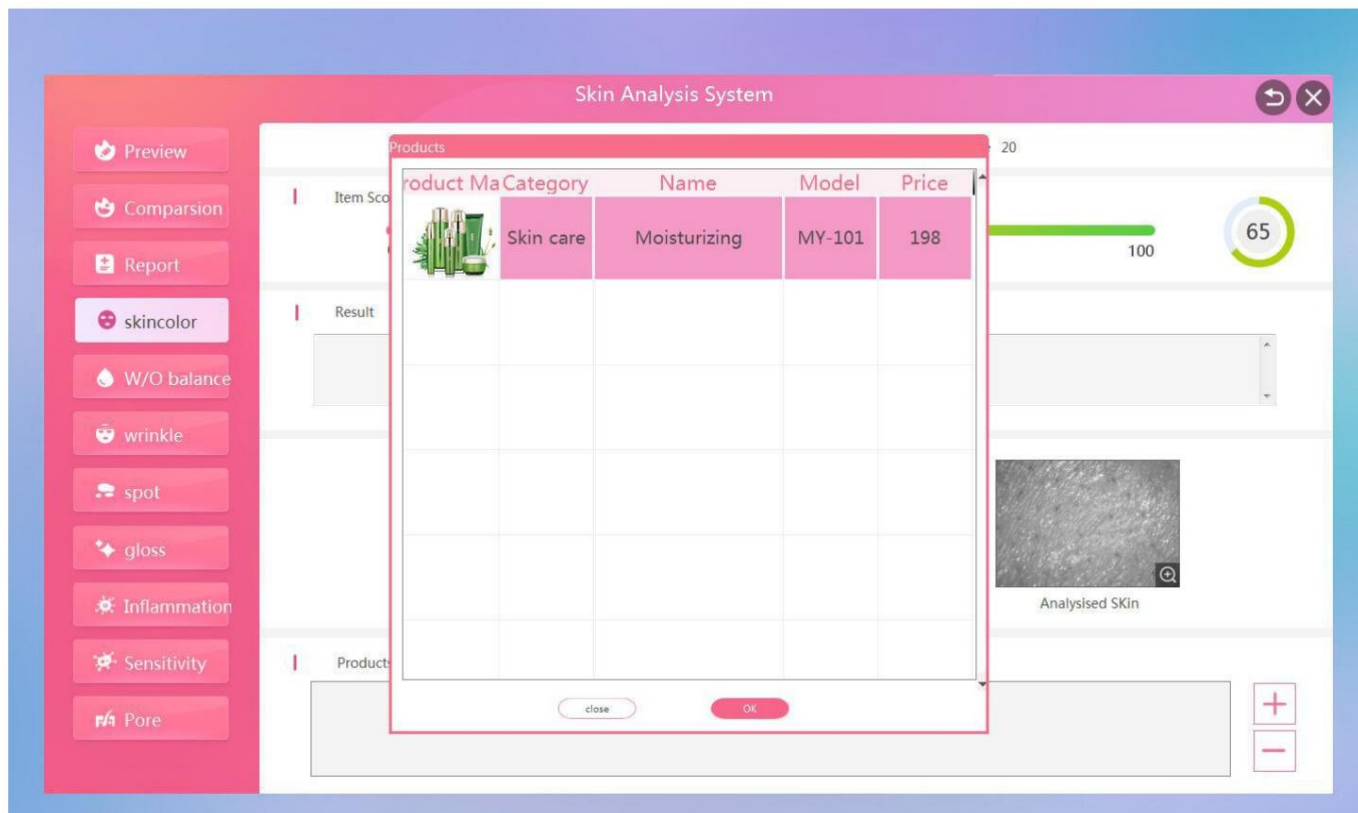

25. نتایج تست تک عکس "W/O balance" و پیشنهادات بهبود را مشاهده کنید. امتیاز داده (هرچه امتیاز بالاتر باشد، ارزش آب و روغن بهتر است)، تصویر را می توان بزرگ کرد

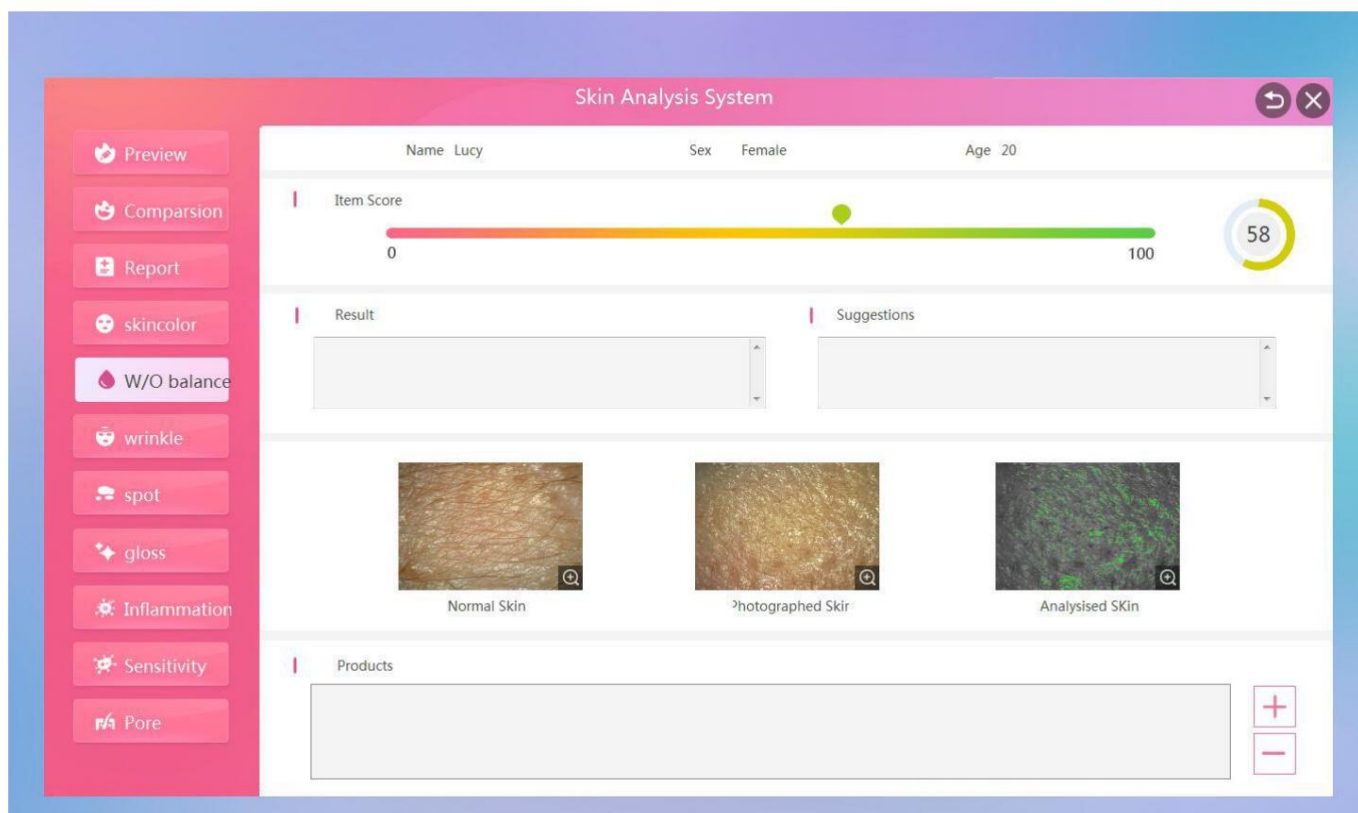

62. مشاهده نتایج آزمایش تکی "چروک" شات تمام صورت و پیشنهادات برای بهبود، داده ها امتیاز (هرچه امتیاز بالاتر باشد خطوط ظریف کمتر است)

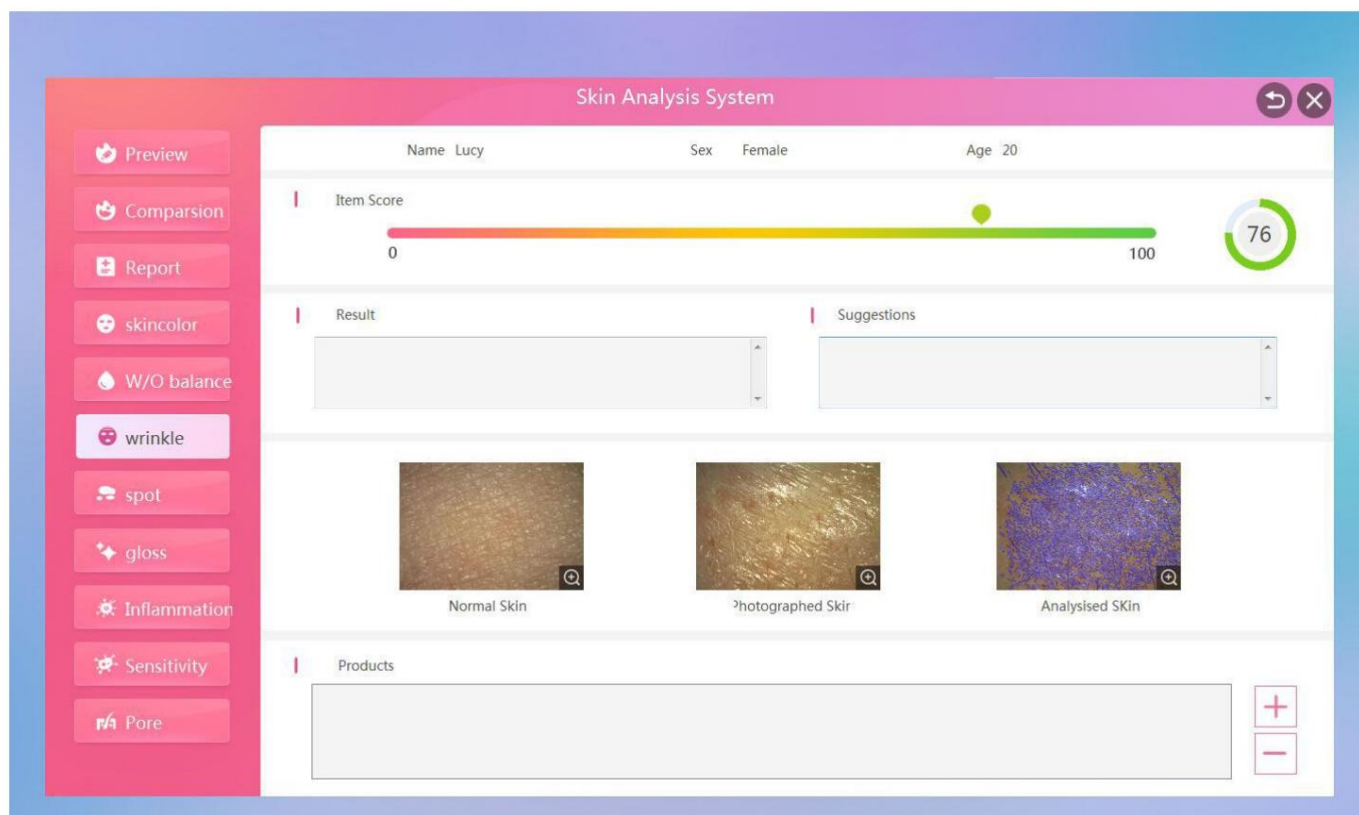


27. مشاهده نتایج آزمایش تکی "نقطه ای" تمام صورت و پیشنهادات برای بهبود، امتیاز داده ها (هرچه امتیاز بالاتر باشد لکه کمتر است)




28. مشاهده نتایج آزمایش تک عکس "براق" و پیشنهادات برای بهبود، امتیاز داده ها

(هرچه امتیاز بالاتر باشد، براقیت پوست بهتر است)

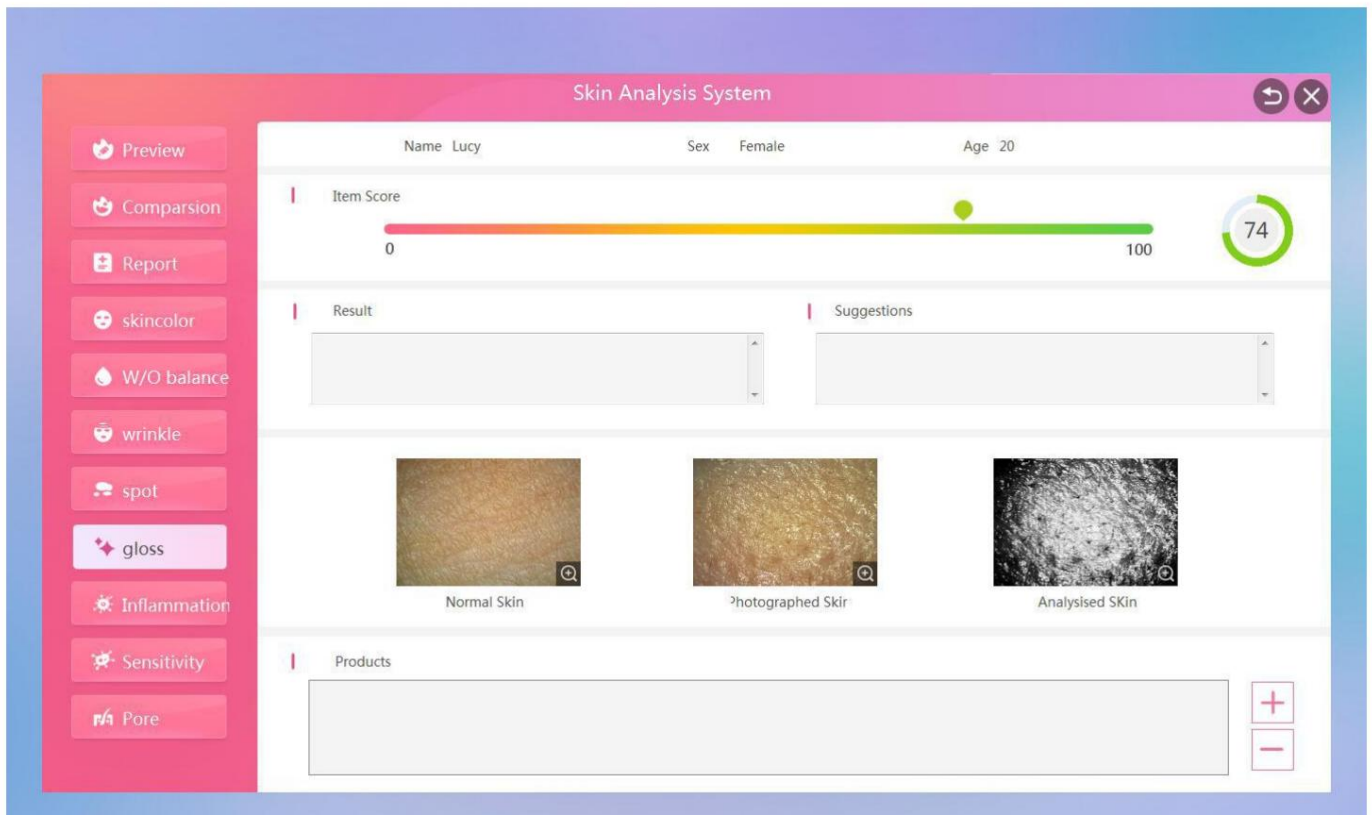


29. مشاهده نتایج آزمایش تکی "التهاب" شات تمام صورت و پیشنهادات بهبود، داده ها

(هرچه امتیاز بالاتر باشد التهاب خفیف تر است)

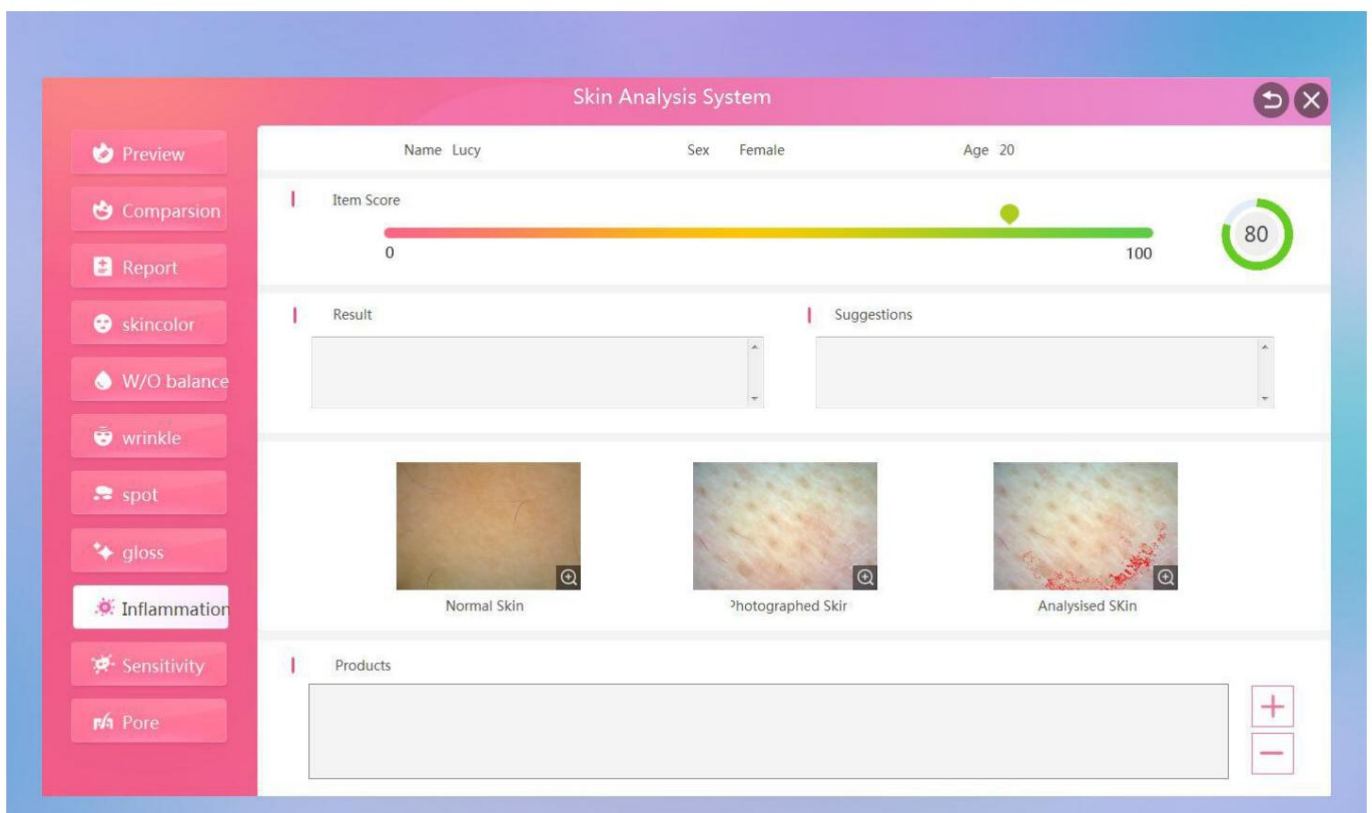


30. مشاهده نتایج تک تست "حساسیت" عکس تمام صورت و پیشنهادات بهبود، داده ها

امتیاز (هرچه امتیاز بالاتر باشد حساسیت کمتر است)

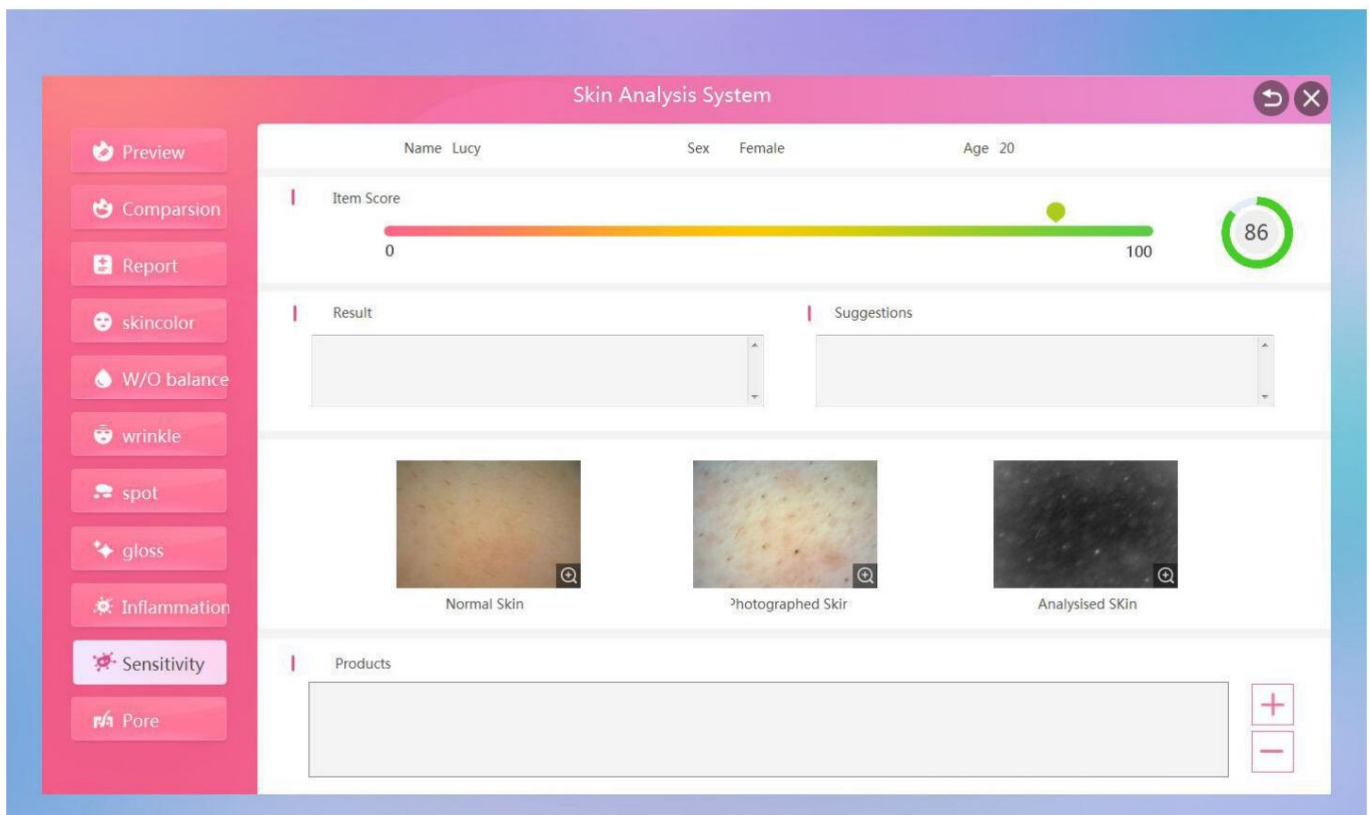


31. مشاهده نتایج تک تست عکس "Pore" و پیشنهادات برای بهبود، امتیاز داده ها

(هرچه امتیاز کمتر باشد، انسداد منافذ جدی تر است)

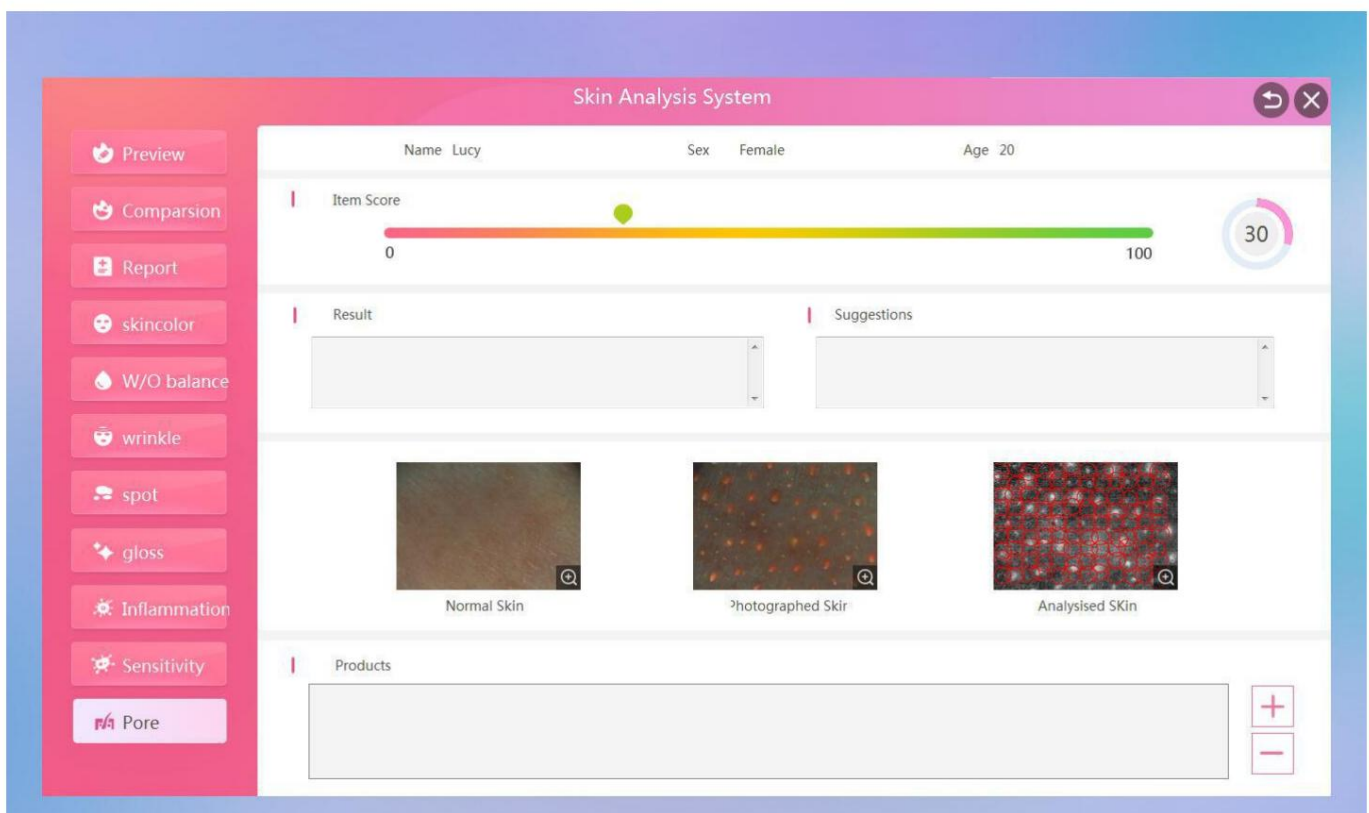


32. روی "Single" در صفحه اصلی تجزیه و تحلیل کلیک کنید تا به تجزیه و تحلیل تک نقطه ای بروید.

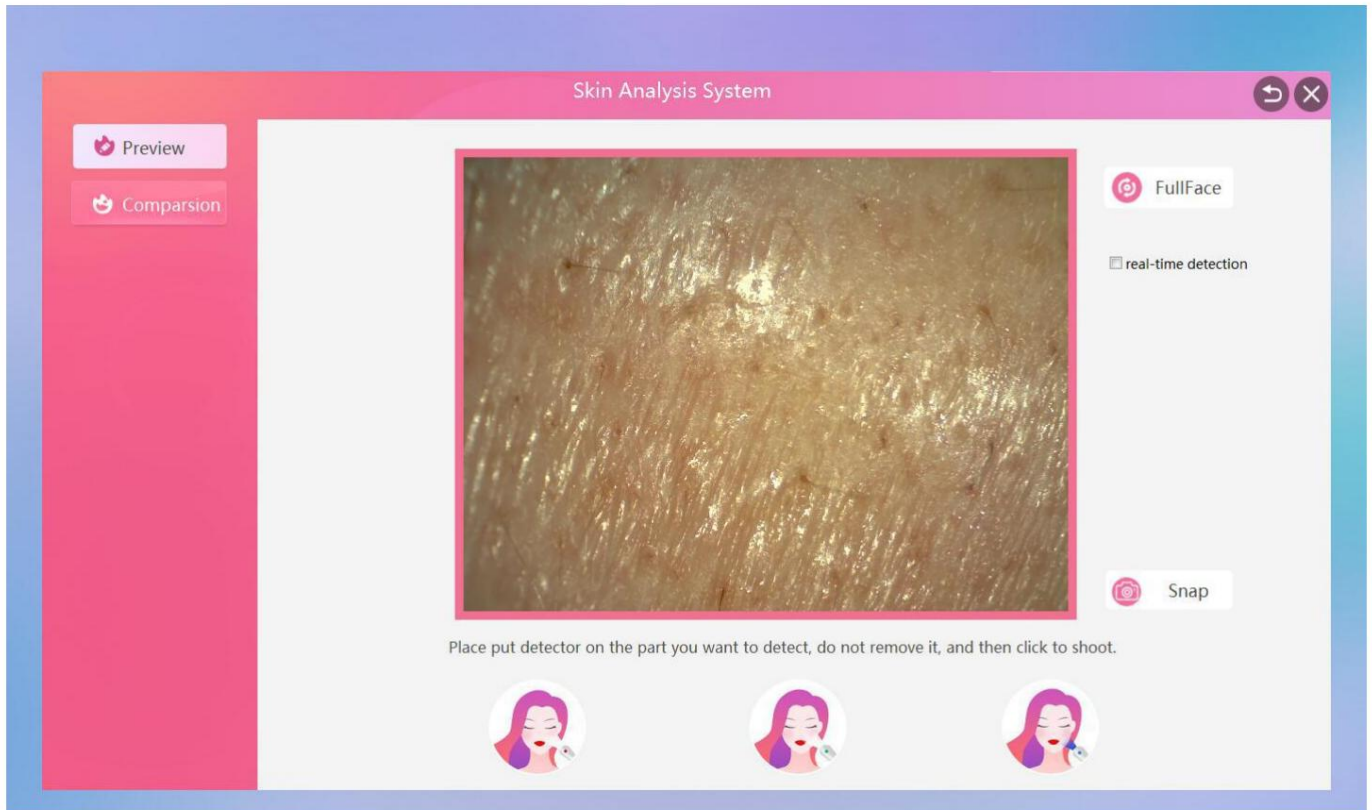


33. پس از فوکوس شدن تصویر، روی "Snap" در گوشه پایین سمت راست کلیک کنید تا عکس بگیرید. لطفاً باش

مراقب باشید که آشکارساز را حرکت ندهید. سیستم به طور خودکار از پوست عکس می گیرد


و UV

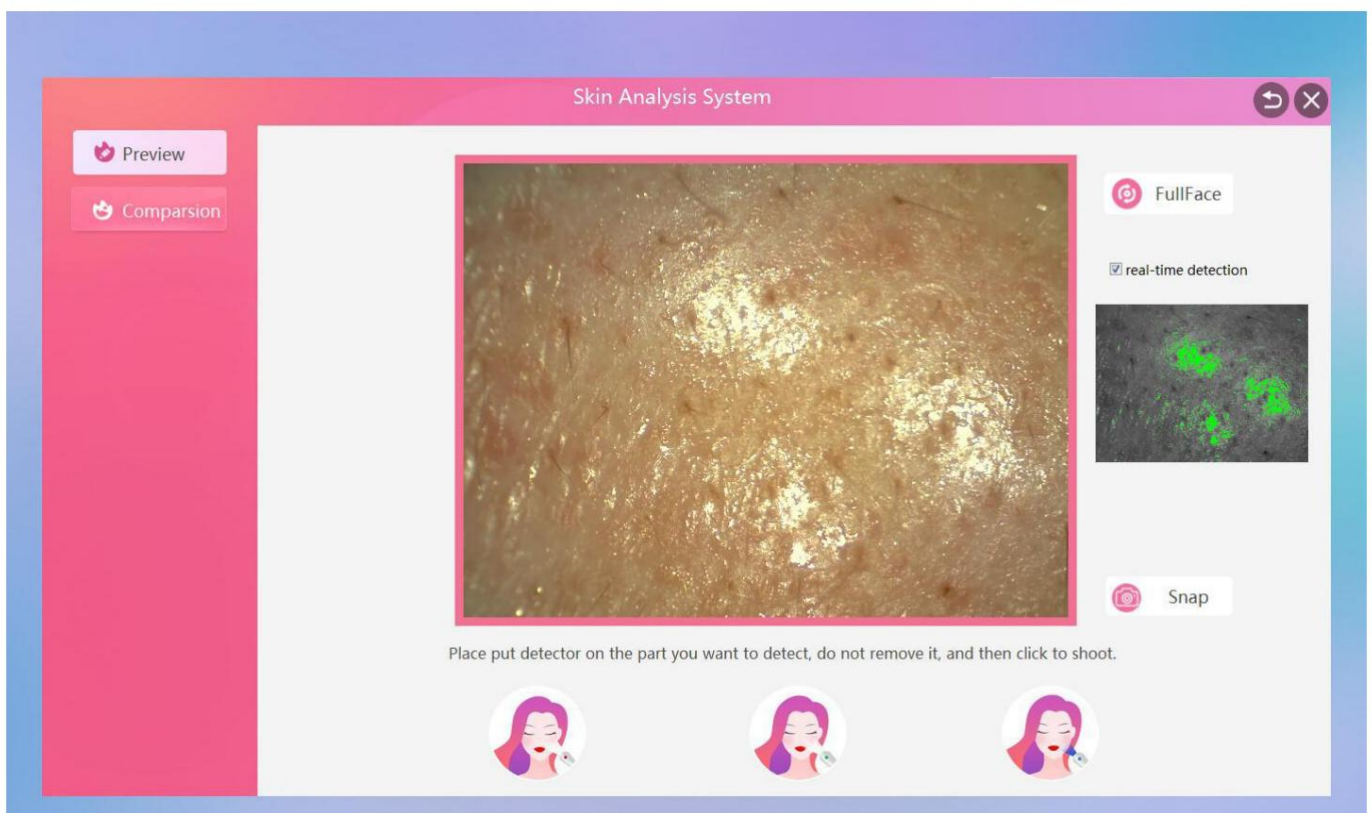


34. تصویر به طور خودکار گرفته می شود، روی "شروع" در گوشه پایین سمت راست کلیک کنید

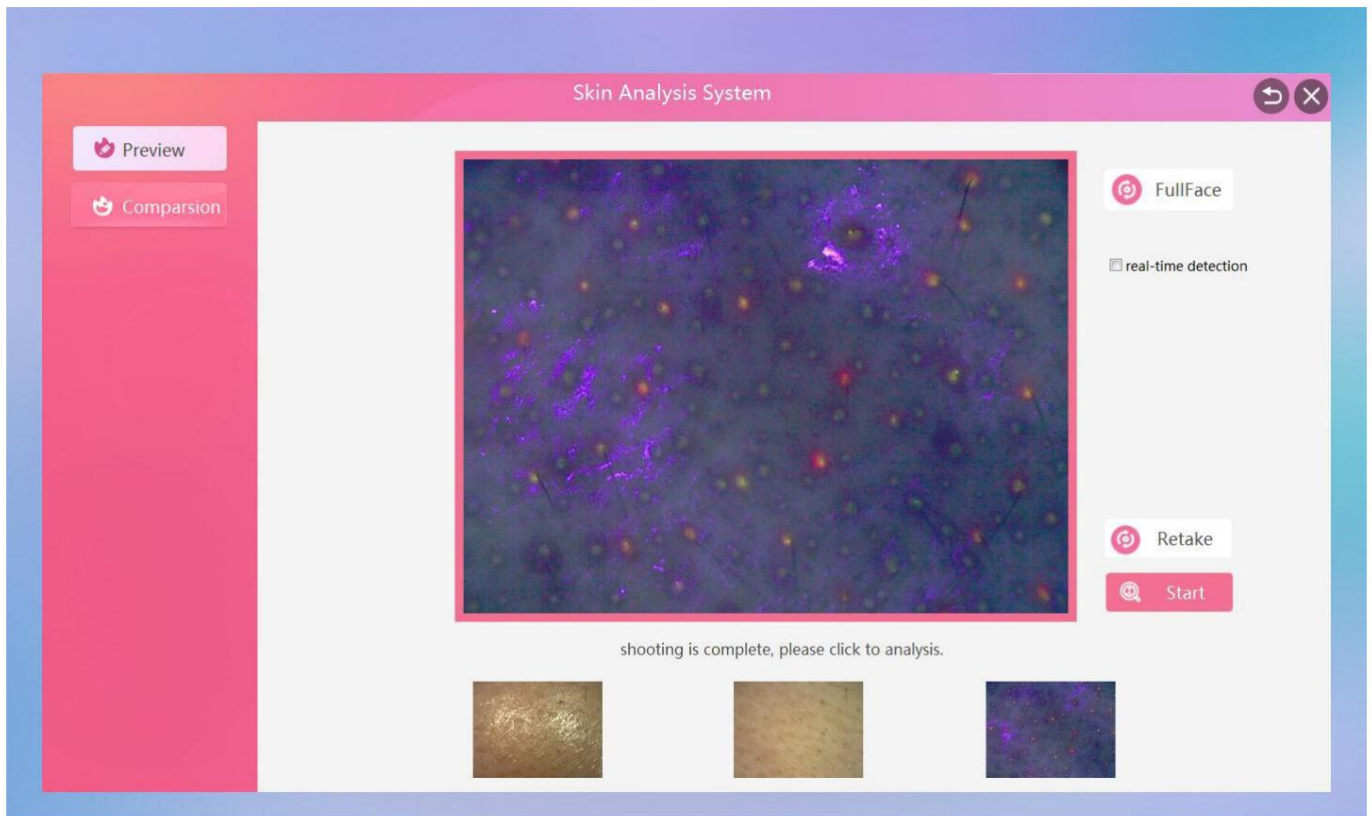


35. در انتظار گزارش تجزیه و تحلیل داده های پوستی

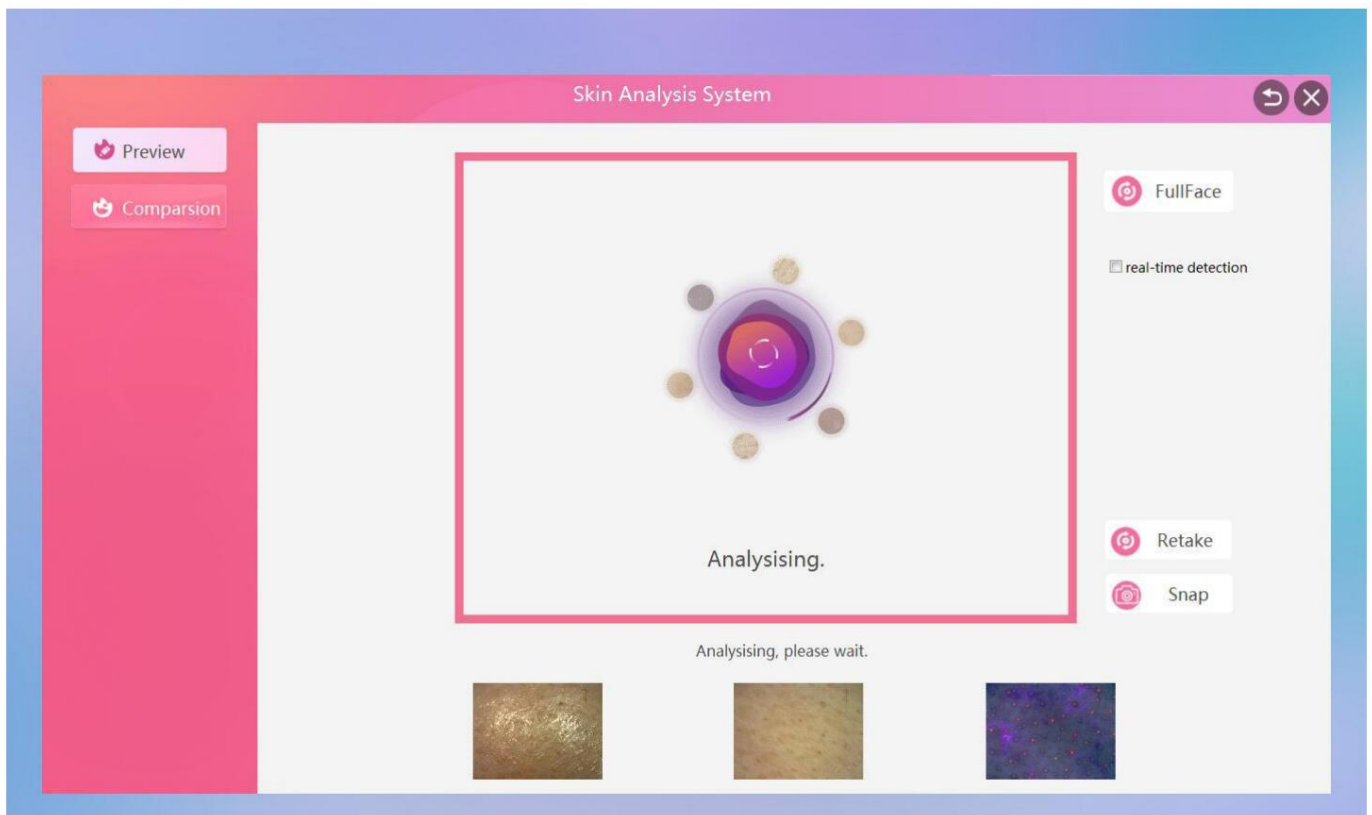

36. پس از تکمیل تجزیه و تحلیل خودکار، یک گزارش آزمون تک نقطه ای و یک گزارش آزمون تک می باشد تولید شده است. گزارش تک نقطه ای می تواند نتایج 8 مورد داده اصلی را به طور مستقیم مشاهده کند سلامت پوست خود را درک کنید.

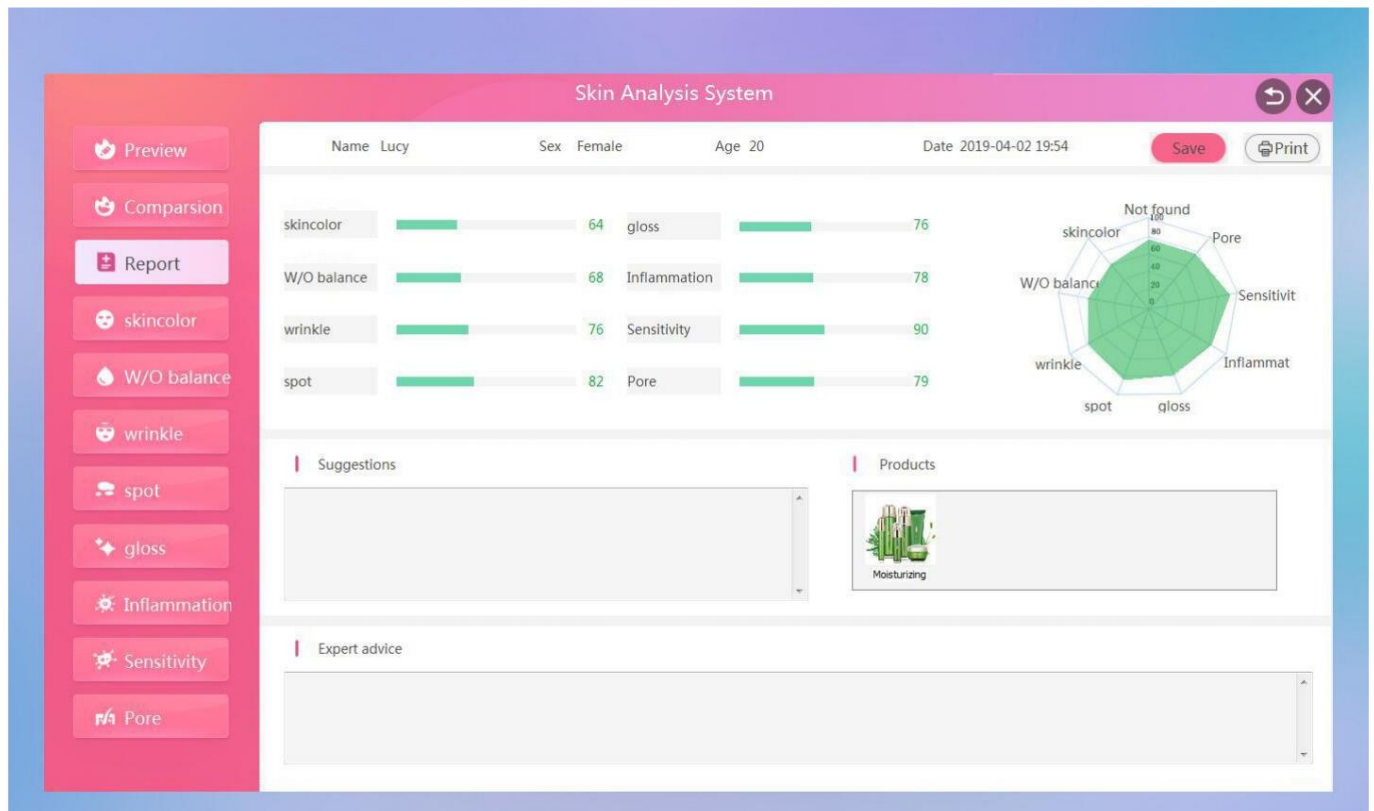

37. مشاهده تک شات "رنگ پوست" نتایج تست تک و پیشنهادات برای بهبود، امتیاز داده ها (هرچه امتیاز بالاتر باشد رنگ پوست بهتر است)

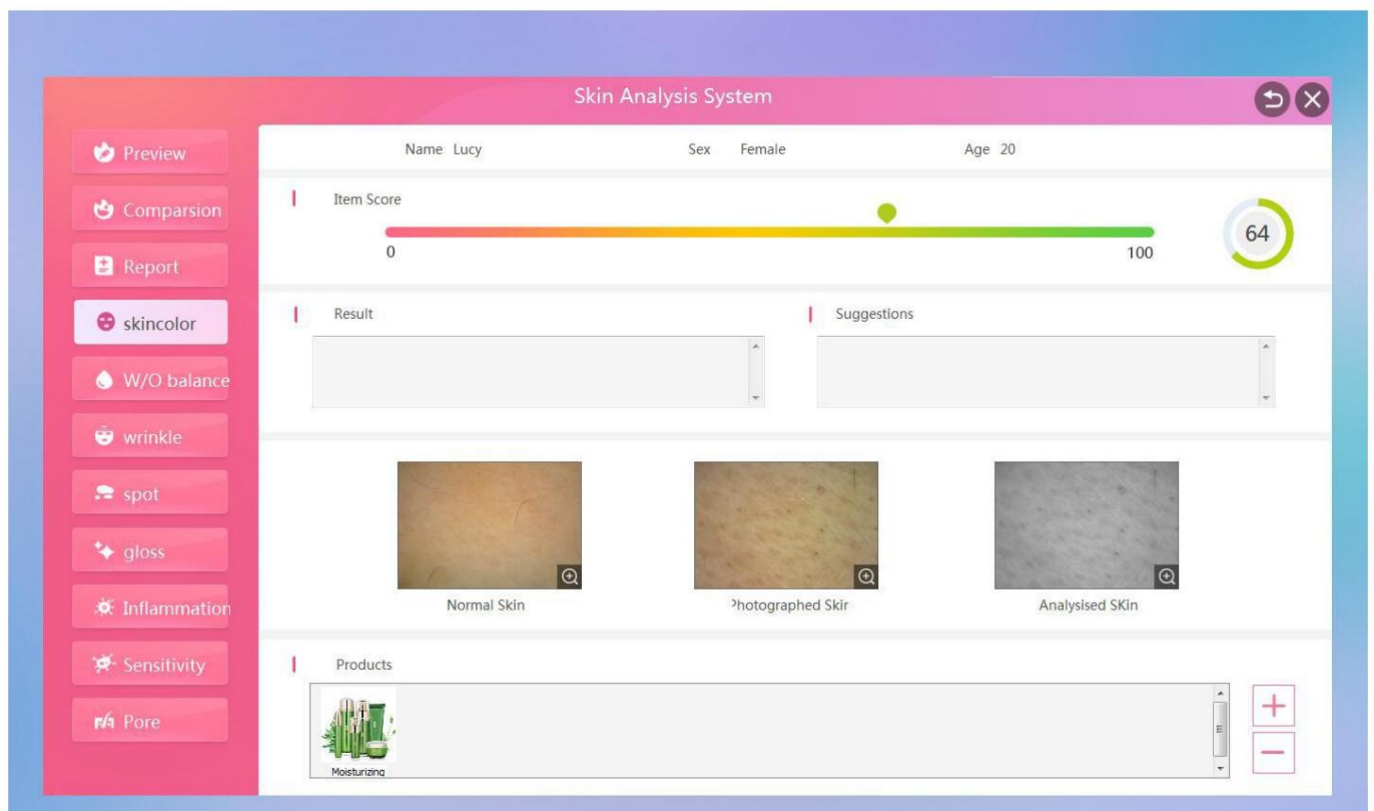

38. مشاهده تک شات "W/O balance" نتایج تست تک و پیشنهادات بهبود، امتیاز داده ها

(هر چه امتیاز بالاتر باشد، تعادل آب و روغن بهتر است)

皮肤智能分析系统

姓名 Customer 性别 - 年龄 -

本项得分

0 100 77

检测结果

您的肌肤开始出现油光现象。影响此现象的因素主要有：天气温度、年龄、体内激素水平、饮食、睡眠、压力、表面微生物等。若油份分泌过于旺盛，会给嗜脂性细菌、真菌、寄生虫制造了良

改善建议

重视下屬问题“外油内干”肌、混合性肌肤特别有必要普及分区护理的做法、电脑前要防护、吸油纸正确使用、美容仪器的选择使用等。22

正常皮肤 检测皮肤 分析图片

产品推荐

93. مشاهده تک شات "چروک" نتایج تست تک و پیشنهادات بهبود، امتیاز داده ها

(هر چه امتیاز بالاتر باشد خطوط ظریف کمتری دارد)

Skin Analysis System

Name Lucy Sex Female Age 20

Item Score

0 100 76

Result

Suggestions

Normal Skin Photographed Skin Analysed SKin

Products


04. مشاهده نتایج تک شات "نقطه ای" و پیشنهادات برای بهبود، امتیاز داده ها (

هر چه امتیاز بالاتر باشد لکه کمتر است)




41. مشاهده نتایج تک شات "براق" و پیشنهادات بهبود، امتیاز داده ها (

هرچه امتیاز بالاتر باشد، براقیت بهتری دارد)

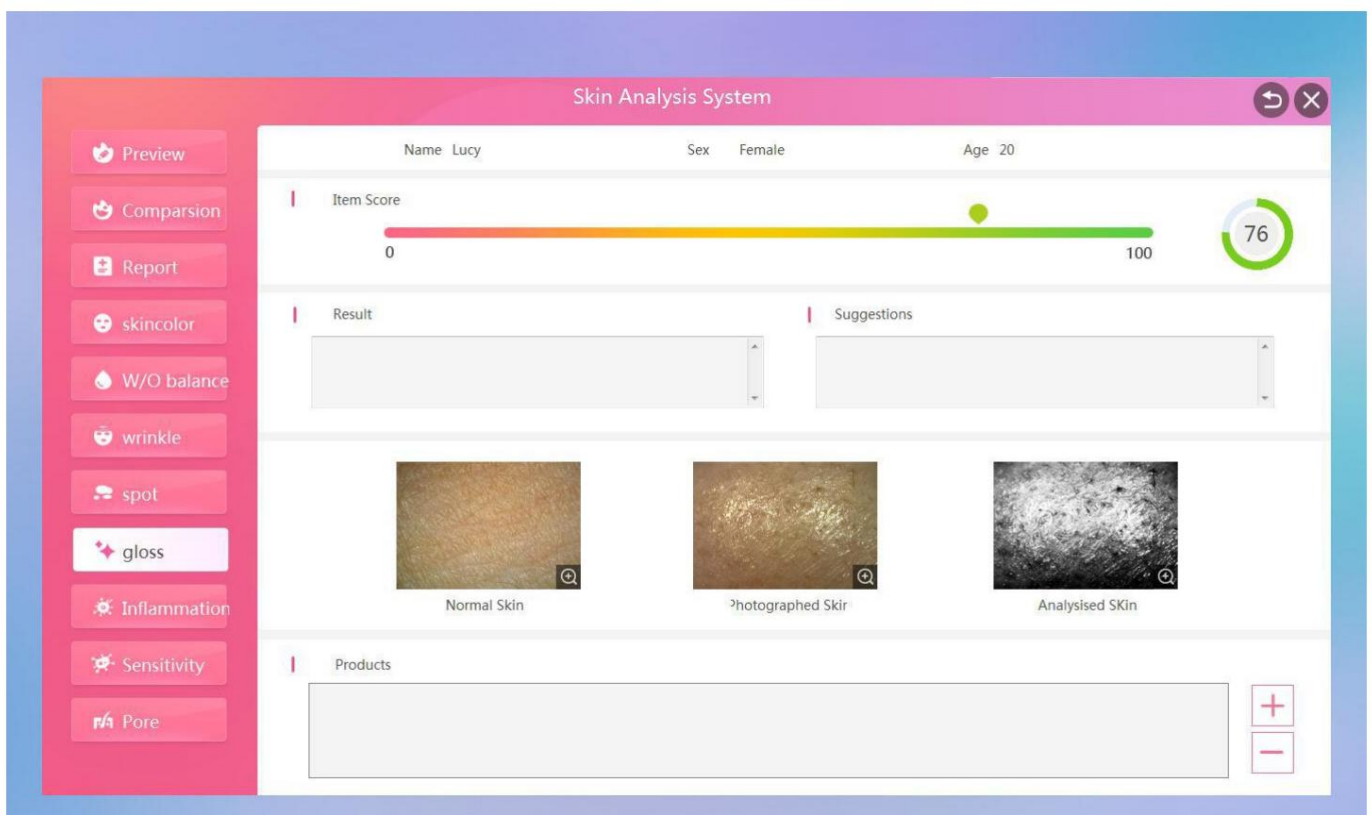

42. مشاهده تک شات "التهاب" نتایج آزمایش تک و پیشنهادات بهبود، امتیاز داده ها

(هر چه نمره بالاتر باشد التهاب خفیف تر است)

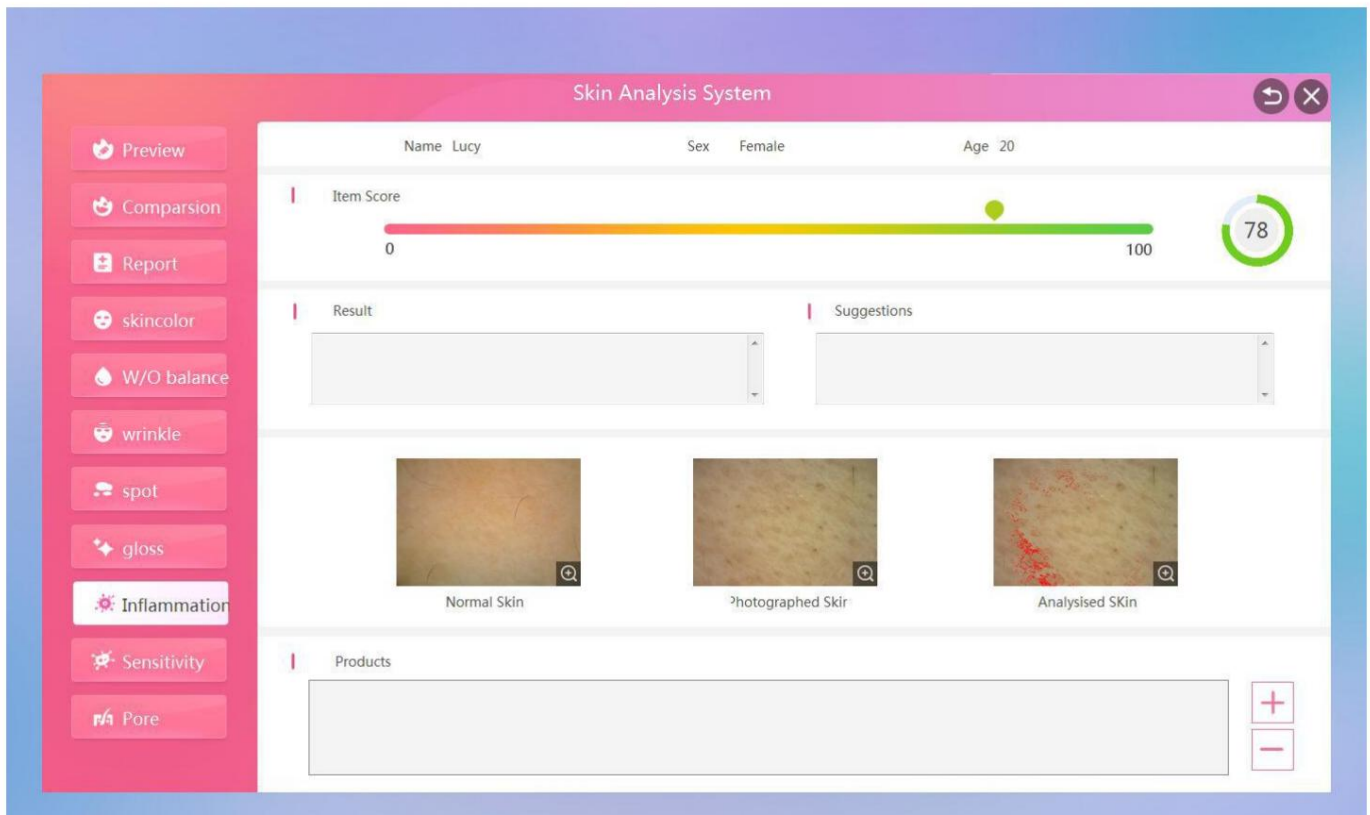

43. مشاهده نتایج تک شات "حساسیت" تک تست و پیشنهادات بهبود، امتیاز داده ها )

هرچه امتیاز بالاتر باشد حساسیت کمتری دارد)



44. مشاهده تک شات "Pore" نتایج تست تک و پیشنهادات بهبود، امتیاز داده ها (

پایین نمره، انسداد منافذ جدی تر است)


45. پس از کلیک بر روی "ذخیره" در گزارش تشخیص چهره کامل و گزارش تشخیص تک نقطه، شما

می توانید گزارش تست قبلی را در "اعضا" - "ضبط" مشاهده کنید، یک تاریخ را انتخاب کنید و سپس برای مشاهده کلیک کنید

گزارش تست روز


Date	skinolor/O	balanwrinkle	spot	gloss	lammatiensitivit	Pore	lot found		
2019-04-03 09:54	65	98	76	94	63	80	84	30	73
2019-04-03 09:56	34	97	75	79	67	50	90	30	65

46. پیش نمایش گزارش آزمون تاریخی، برای مشاهده "گزارش" و "8 گزارش واحد" دیگر کلیک کنید.

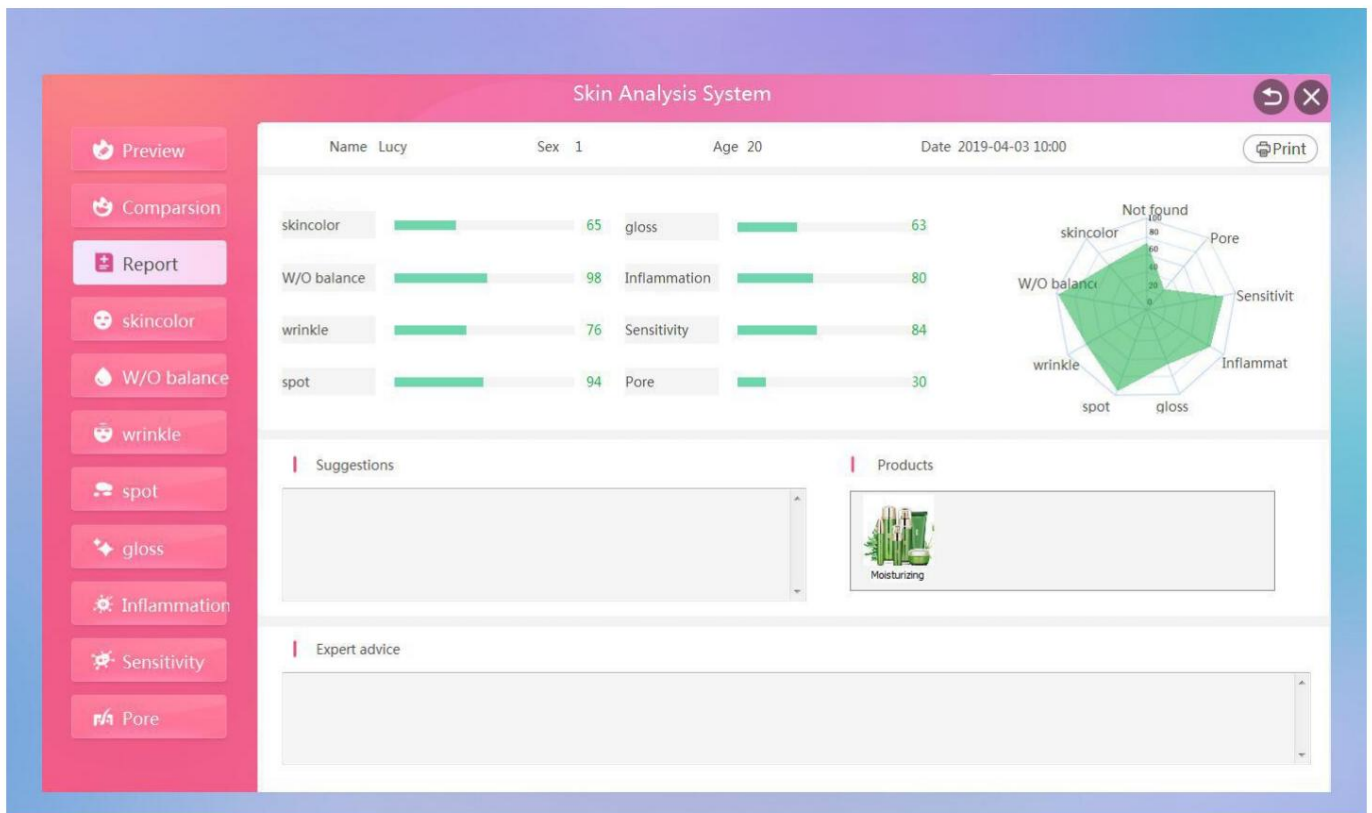


47. برای بررسی تصویر، روی "مقایسه" در رابط اصلی تجزیه و تحلیل کلیک کنید. اولین پنجره


پنجره تصویر پویا است که می تواند در زمان واقعی شناسایی شود. سه پنجره آخر عبارتند از برای انتخاب عکس ذخیره شده توسط دوربین، روی پنجره دوبار کلیک کنید. روی "Play" کلیک کنید تا باز شود پنجره اول تشخیص تصویر پویا

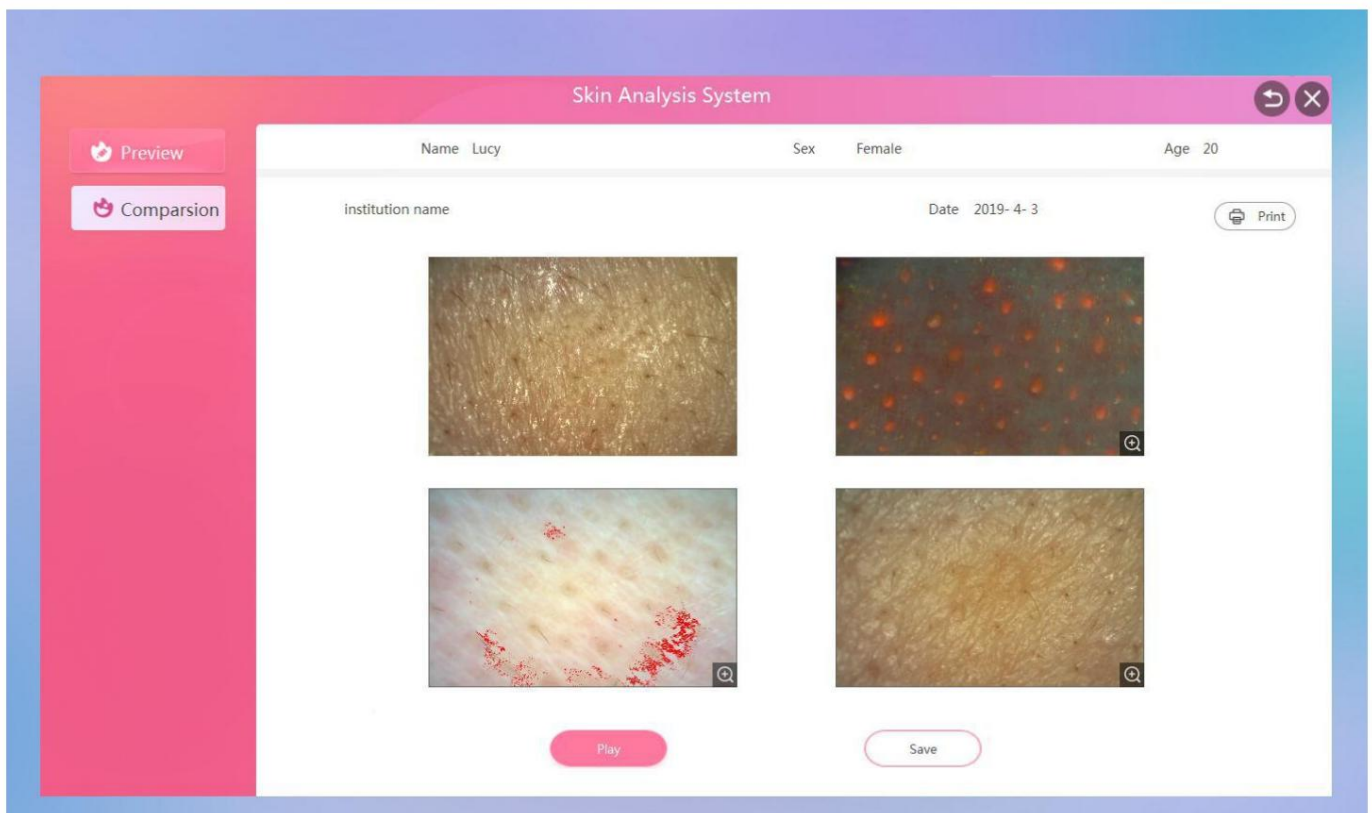

48. روی «توقف» اولین پنجره تشخیص تصویر پویا کلیک کنید تا صفحه تشخیص فعلی ثابت شود.

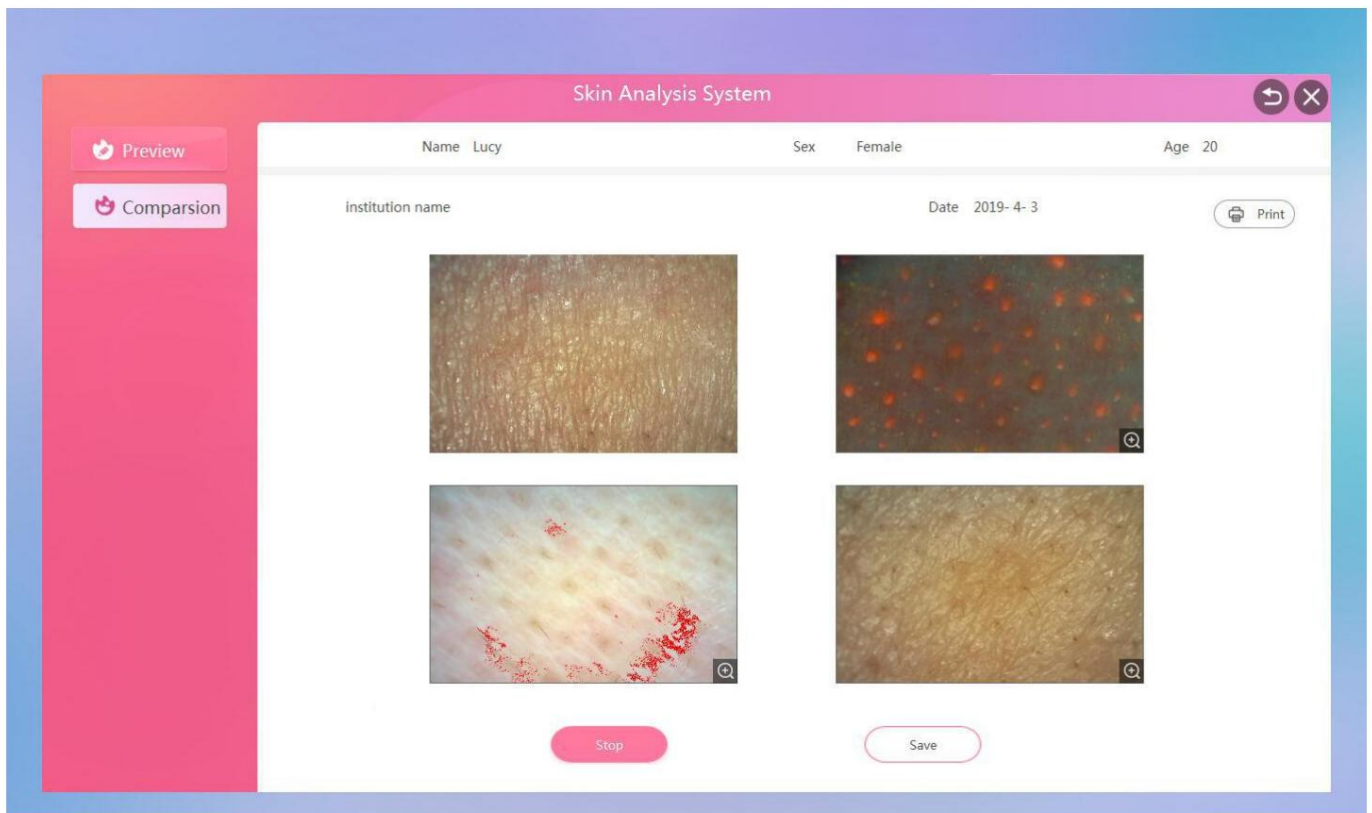


49. روی لوگوی بزرگنمایی در گوشه سمت راست پایین تصویر کلیک کنید تا تصویر بزرگ شود.

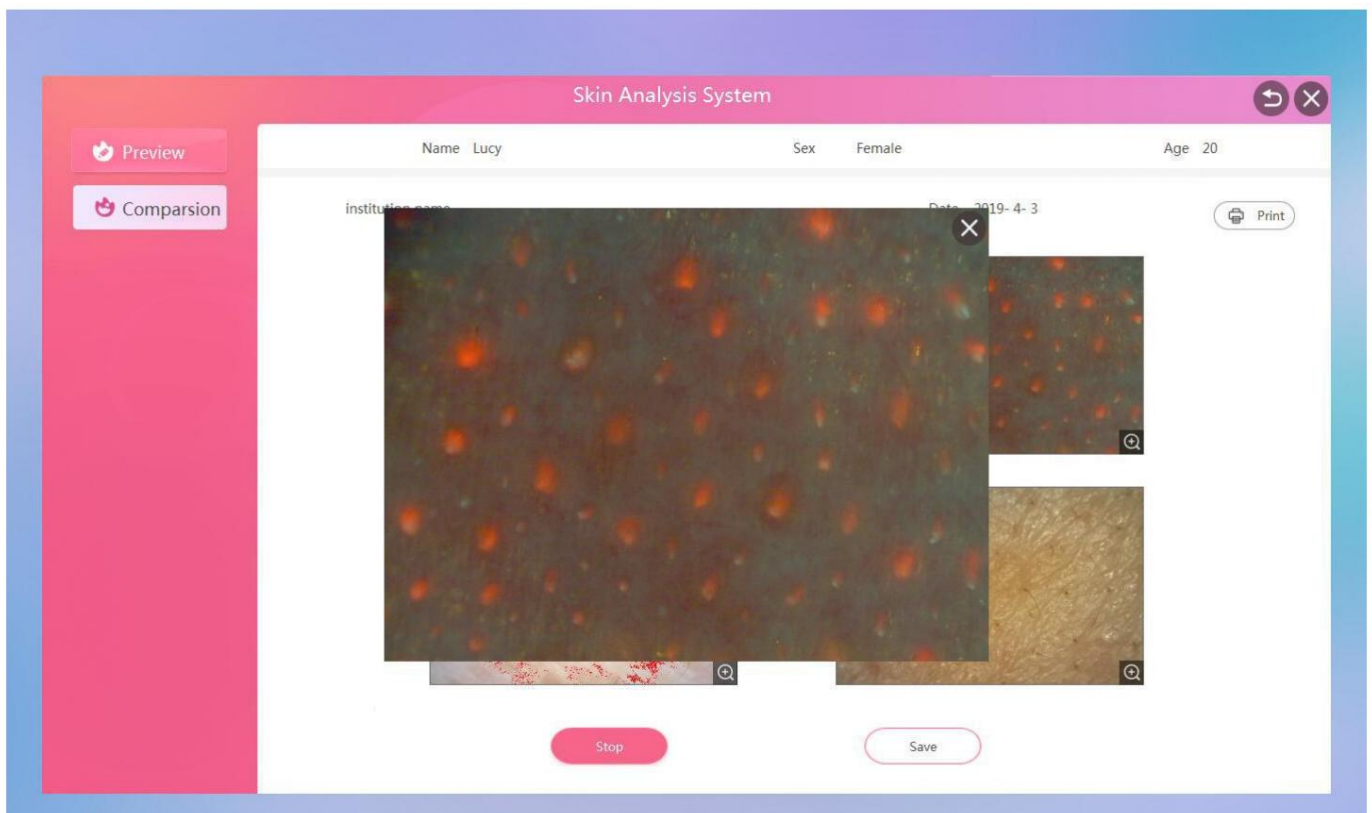

50. می توانید برای مشاهده یک عکس در یک زمان بزرگنمایی کنید و می توانید موقعیت عکس را بکشید

با ماوس

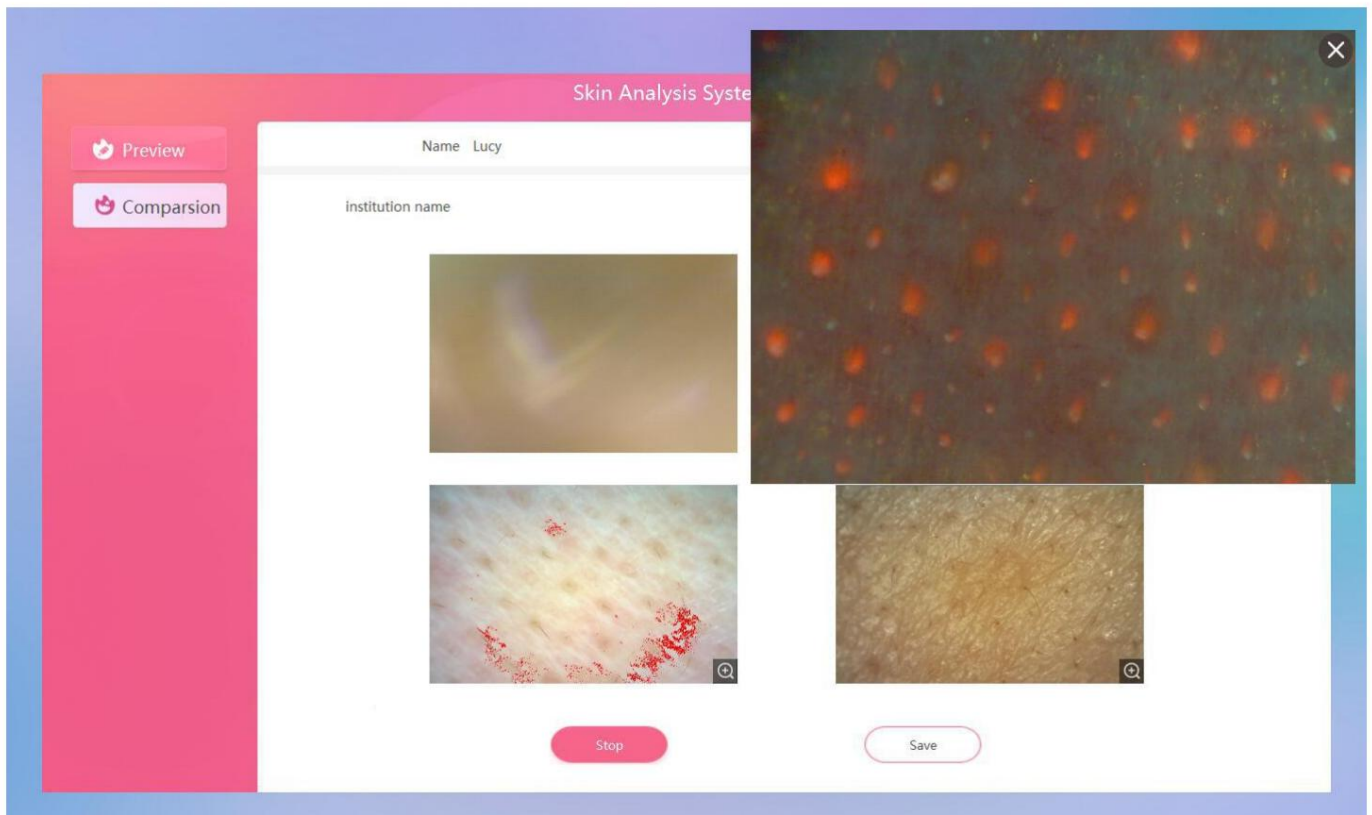

51. چرخ ماوس را برای بزرگنمایی و کوچکنمایی حرکت دهید

